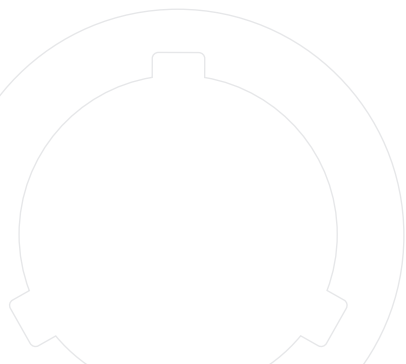




Catálogo de productos  
sistema de implantes  
CAMLOG®

Válido a partir de enero 2021





# Contenido

## Informaciones del sistema

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| El sistema de implantes CAMLOG® | 2 |
|---------------------------------|---|

## Cirugía

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Planificación                             | 16 |
| PROGRESSIVE-LINE Implantes y instrumentos | 19 |
| PROGRESSIVE-LINE Flex Instrumentos        | 24 |
| PROGRESSIVE-LINE Sistema Cirugía Guiada   | 28 |
| SCREW-LINE Implantes y instrumentos       | 34 |
| SCREW-LINE Sistema Cirugía Guiada         | 40 |
| Instrumentos quirúrgicos generales        | 43 |
| Kit de osteotomos                         | 50 |
| Set ALTApin                               | 54 |
| Tornillo de cierre                        | 57 |
| Casquillos de cicatrización               | 57 |

## Prótesis

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Toma de impresión                           | 60 |
| Registro de mordida                         | 61 |
| Fabricación del modelo                      | 61 |
| Pilares provisionales                       | 62 |
| Pilares Esthomic®                           | 62 |
| Prótesis CAD/CAM                            | 64 |
| Blank de titanio                            | 66 |
| Pilares universal                           | 67 |
| Pilares de oro                              | 67 |
| Sistema protésico Logfit®                   | 68 |
| Sistema COMFOUR®                            | 69 |
| Sistema de anclaje mediante pilares de bola | 73 |
| Sistema de anclaje Locator®                 | 74 |
| Técnica de corona telescópica               | 79 |
| Accesorios para pilares                     | 79 |
| Instrumentos protésicos                     | 80 |
| Instrumentos para el laboratorio            | 84 |
| Pilares de planificación                    | 85 |

## Artículos adicionales

|                        |    |
|------------------------|----|
| Implantes de prácticas | 88 |
| Modelos de exposición  | 89 |
| Macromodelos           | 89 |
| Literatura             | 90 |

## Informaciones adicionales

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sinopsis de las indicaciones | 92  |
| Sinopsis de los implantes    | 95  |
| Sinopsis de las prótesis     | 96  |
| Sinopsis de los tornillos    | 102 |
| Sinopsis de los torques      | 106 |
| Materiales                   | 108 |

## Índice

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Alfabético              | 110 |
| Por referencias         | 114 |
| Documentación adicional | 126 |

# El sistema de implantes CAMLOG®



El sistema de implantes CAMLOG®, basado en una experiencia clínica y de laboratorio de muchos años, es un sistema fácil de usar y con una consecuente orientación protésica.

Todos los productos CAMLOG® se elaboran empleando la tecnología más vanguardista. El sistema de implantes CAMLOG® es continuamente perfeccionado por el equipo de Investigación y desarrollo de la empresa en colaboración con clínicas, universidades y técnicos dentales. Así se garantiza su adaptación al estado más actual de los conocimientos.

Los sistemas de implantes CAMLOG® y CONELOG® tienen una sólida documentación científica. Así lo demuestran los estudios\* de los más diversos parámetros, como la superficie de los implantes, el momento de la implantación y/o la carga del implante, la estabilidad primaria y el diseño de la unión. Los resultados a largo plazo de la superficie Promote® son convincentes.

Las siguientes descripciones no son suficientes para el uso inmediato del sistema de implantes CAMLOG®.

Por eso recomendamos que sea un médico con experiencia el que instruya en el manejo correcto del sistema. Los productos CAMLOG® solo deben ser usados por dentistas, médicos, cirujanos y técnicos dentales instruidos en el sistema. Camlog ofrece los cursos y los entrenamientos necesarios.

Los errores de método en el tratamiento pueden provocar la pérdida de los implantes así como importantes pérdidas en la sustancia ósea periimplantaria.

No todos los productos y servicios de Camlog están disponibles en todos los países.

Unidades de envase: si no se indica lo contrario, cada envase contiene un producto.

Las imágenes de este documento solo deben tomarse como referencia y pueden diferir del producto real.

\* consultar la «Documentación adicional» en la página 126



## Implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE

Con los nuevos implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE es posible realizar de un modo más sencillo conceptos terapéuticos modernos, como la restauración o la carga inmediata, en los que se necesita una alta estabilidad primaria [1, 2]\*.

La geometría del implante está concebida de modo que sea posible desarrollar una alta estabilidad inicial:

- El implante de tornillo autorroscante posee una zona apical de forma cónica, que permite conseguir una fuerte estabilidad primaria incluso en hueso blando [1, 2]\*.
- La rosca, que llega hasta el ápice, asegura un anclaje óptimo en las implantaciones inmediatas [1, 2]\*.
- Una rosca crestal para una sujeción mejorada cuando la altura ósea es limitada [2]\*.

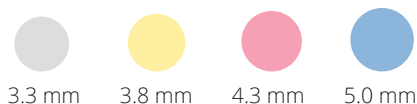
Los implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE están disponibles con la superficie Promote® plus, que presenta un cuello del implante liso de 0,4 mm de altura. Este acabado de la superficie permite, en función de la situación clínica, un posicionamiento ligeramente epicrestal o subcrestal del implante. Los implantes PROGRESSIVE-LINE con poste de inserción roscado pueden utilizarse para la implantación guiada.

Los implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE están provistos de la unión probada implante-pilar Tube-in-Tube® y poseen tres muescas poligonales dispuestas de forma simétrica en la zona cilíndrica del cuello del implante. La restauración protésica se realiza con los pilares CAMLOG®, u opcionalmente también con los componentes para Platform Switching.



\* consultar la «Documentación adicional» en la página 126

### Diámetros de los implantes



### Longitudes de implante



## Implantes CAMLOG® SCREW-LINE

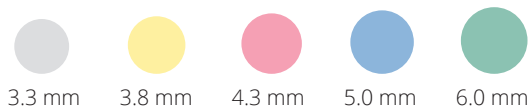
Los implantes SCREW-LINE son implantes de tornillo ligeramente cónicos y autorroscantes. Permiten una inserción sencilla gracias al autocentrado, con contacto óseo continuo, y consiguen así una sólida estabilidad primaria.

Los implantes SCREW-LINE están disponibles tanto con la superficie Promote® (altura de cuello liso 1,4 mm) como con la superficie Promote® plus (altura de cuello liso 0,4 mm), gracias a lo cual permiten una Máxima flexibilidad de la posición vertical del implante. El redondeamiento de la geometría apical garantiza la inserción cuidadosa de los implantes SCREW-LINE en el hueso, también cerca del seno maxilar.

Los implantes SCREW-LINE con poste de inserción roscado pueden utilizarse para la implantación guiada.

Los implantes CAMLOG® SCREW-LINE están provistos de la unión probada implante-pilar Tube-in-Tube® y poseen tres muescas poligonales dispuestas de forma simétrica en la zona cilíndrica del cuello del implante. La restauración protésica se realiza con los pilares CAMLOG®, u opcionalmente también con los componentes para Platform Switching.

### Diámetros de los implantes



### Longitudes de implante



Todos los implantes CAMLOG® se entregan en un envase estéril premontados en un poste de inserción codificado con color según el diámetro.

La opción Platform Switching sólo se debe usar con los implantes CAMLOG® con referencia K.

## Unión implante-pilar CAMLOG® Tube-in-Tube®

El inconfundible principio Tube-in-Tube, con las tres muescas y resaltes de interbloqueo, crea una unión implante-pilar muy precisa, estable y antirrotatorio. Su diseño biomecánico se basa en análisis complejos de elementos finitos. Ha demostrado su eficacia millones de veces durante muchos años y su éxito a largo plazo ha quedado documentado científicamente.

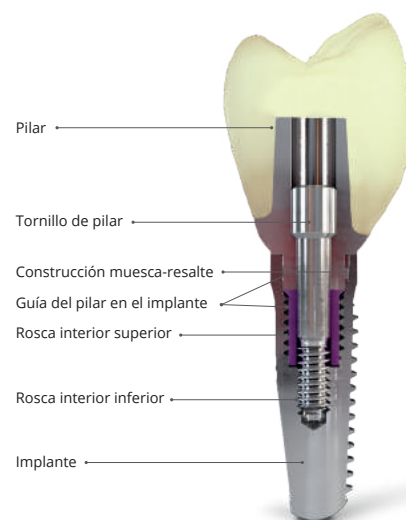
La unión CAMLOG® Tube-in-Tube® se sometió a un exhaustivo análisis científico y obtuvo unos resultados excepcionalmente buenos en cuanto a la precisión de ajuste [3, 4]\*.

\* consultar la «Documentación adicional» en la página 126

## Ventajas y beneficios de la unión Tube-in-Tube®


- Fácil de indexar gracias a las tres posiciones de los pilares
- Precisas, con excelente respuesta táctil
- Armonización de plataformas y Platform Switching opcional
- Tope vertical definido: sin desviación de altura en todo el flujo de trabajo
- Diámetro de implante reducido (Ø 3,3 mm)
- Resultados a largo plazo documentados científicamente

Para la colocación óptima del pilar, el implante debe estar alienado en el hueso de modo que una de las tres muescas apunte hacia vestibular. En los implantes CAMLOG® los instrumentos de inserción están provistos de marcas que se corresponden con las tres muescas de la configuración interna del implante.



## Superficie Promote®

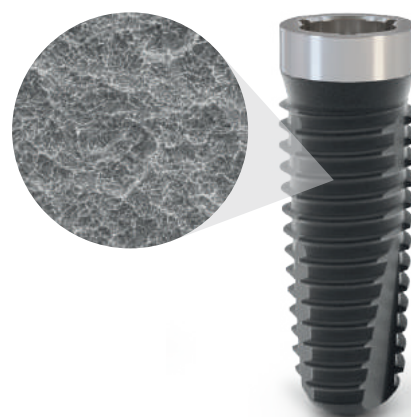Los implantes CAMLOG® están disponibles con la superficie chorreada y grabada al ácido Promote®. La superficie se corresponde con los conocimientos actuales de la ciencia y favorece una osteointegración rápida. Los resultados científicos obtenidos en los análisis con cultivos celulares, la histología ósea y las pruebas de desatornillado lo avalan de una manera contundente.



## Precisión de fabricación

Las geometrías interior y exterior de los implantes y los pilares CAMLOG® han sido torneadas, en su mayor parte, por arranque de virutas. Esto permite unas tolerancias mínimas. El resultado es una excelente precisión de ajuste de los componentes sin efecto adverso sobre la estructura del material. Por eso, la unión implante-pilar Tube-in-Tube® garantiza una conexión extraordinariamente precisa, estable y antirrotatoria con los componentes protésicos.

## Componentes protésicos CAMLOG®

Los implantes CAMLOG® se pueden rehabilitar con una amplia selección de componentes protésicos variados y adaptados anatómicamente. Los pilares CAMLOG® están codificados por colores según los diámetros de los implantes.

### Efecto del diseño Platform Switching

Platform Switching se emplea como apoyo para los tejidos duros y blandos en la zona estética periimplantaria. La distancia entre la interfaz del implante con el pilar y la cresta ósea alveolar se incrementa y, con ello, se reduce el efecto de la infiltración de las células inflamatorias con la consiguiente reabsorción ósea. La opción Platform Switching sólo se debe usar con los implantes CAMLOG® con referencia K.

### Casquillo de cicatrización PS CAMLOG® para Platform Switching

Los casquillos de cicatrización PS CAMLOG® (cilíndricos, wide body, bottle-neck) presentan un diámetro reducido en la zona del apoyo del hombro, por lo que permiten la adaptación de los tejidos blandos sobre el hombro del implante.



### Casquillo de toma de impresión PS CAMLOG®, cubeta abierta y cerrada para Platform Switching

Debido a la adaptación de los tejidos blandos sobre el hombro del implante, el uso de los casquillos de cicatrización PS CAMLOG® exigen el empleo de los casquillos de toma de impresión PS CAMLOG® para Platform Switching.

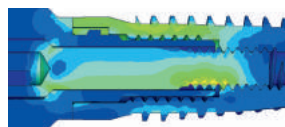


### Pilares provisionales PS CAMLOG®, Pilares PS CAMLOG® Esthomic®, Base de titanio CAD/CAM PS CAMLOG® y Pilares universales PS CAMLOG® para Platform Switching

Los pilares PS CAMLOG® también presentan un diámetro reducido en la zona del apoyo del hombro, por lo que permiten la adaptación de los tejidos blandos sobre el hombro del implante en la restauración protésica.



Geometría corta de los resaltes



## Pilares CAMLOG® con referencia K

Los pilares están alargados hacia apical en forma de tubo (5,4 mm) y en la zona superior presentan tres resaltes cortos que se corresponden con las tres muescas del implante.

Al insertar los pilares, su extensión apical con forma de tubo facilita una alineación sencilla, rápida y segura en el eje longitudinal del implante antes de colocar los tres resaltes sobre el hombro del implante. El pilar se gira hasta que los resaltes encajan de manera perceptible en las muescas del implante y llegan así a la posición final.

La unión implante-pilar en el sistema de implantes CAMLOG® es una unión mayormente positiva. La unión con la geometría de los resaltes tiene un diseño biomecánicamente óptimo gracias a complejos análisis de elementos finitos. La imagen inferior muestra la distribución de la tensión de Von Mises en la unión implante-pilar con una carga de 200 N conforme a ISO 14801.

## Casquillo de cicatrización CAMLOG®

Los diferentes casquillos de cicatrización se usan en técnicas de una o dos fases según la indicación. Los casquillos de cicatrización CAMLOG® están disponibles en tres geometrías (cilíndrica, wide body y bottleneck) tanto para la unión estándar como para la opción Platform Switching (PS). No tienen seguridad antirrotatoria y se atornillan en la rosca interna superior de los implantes.



## Toma de impresión CAMLOG®

La toma de impresión del implante CAMLOG® se puede hacer con los casquillos de toma de impresión cubeta abierta o cerrada. Opcionalmente también con casquillos de toma de impresión para Platform Switching (PS). Todos los componentes para la toma de impresión están codificados por colores según el diámetro del implante. Unos componentes de alta precisión aseguran la transferencia correcta de la situación intraoral. La geometría muescas-resaltes CAMLOG® evita la rotación.



## Pilares provisionales CAMLOG®

Para el sistema de implantes CAMLOG® hay disponibles diferentes pilares para una restauración protésica provisional. Los pilares provisionales CAMLOG® de aleación de titanio (Ti6Al4V ELI) están disponibles en las versiones corona y puente.

Opcionalmente, la restauración provisional sobre implantes CAMLOG® también se puede hacer con pilares provisionales de PEEK (poliéter-éter-cetona). Opcionalmente también para Platform Switching (PS). Los pilares se pueden usar en la colocación de un implante inmediato o después de abrir la encía.

## Bases de titanio CAD/CAM CAMLOG®

Las bases de titanio CAD/CAM CAMLOG® se emplean como base adhesiva para las prótesis dentales individualizadas e implantosoportadas de los materiales adecuados. Las reconstrucciones se elaboran con la ayuda de técnicas CAD/CAM. Las bases de titanio CAD/CAM CAMLOG® están disponibles en las versiones corona y puente.

De forma opcional, hay también disponible una corona con base de titanio CAD/CAM PS para Platform Switching.

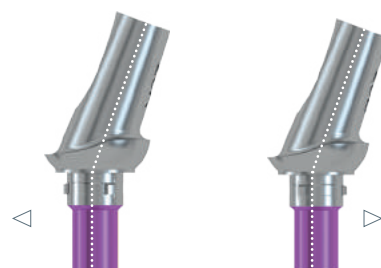


## Pilares CAMLOG® Esthomic®

Los pilares preformados anatómicamente permiten el diseño óptimo del muñón. Los pilares CAMLOG® Esthomic® están disponibles en diferentes alturas gingivales, tanto en diseño recto como angulado, con hombro oval anatómicamente preformado. Los pilares Esthomic® angulados están disponibles en una versión A y una versión B, que se diferencian en la disposición de los resaltes desplazada 60°. De este modo se consiguen seis posiciones de rotación orientadas a la prótesis, que permiten una alineación protésica óptima.



## Resalte en el pilar CAMLOG® Esthomic®




### Tipo A


Resalte en el sentido contrario a la angulación

### Tipo B

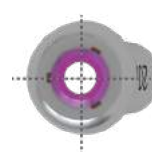Resalte en el mismo sentido que la angulación



### Tipo A

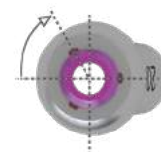

### Tipo B

Resalte desplazado 60°



### Pilar de oro CAMLOG®

Con el pilar de oro CAMLOG® pueden elaborarse, mediante la técnica de sobrecorado, diferentes restauraciones sobre implantes como coronas unitarias, mesoestructuras para restauraciones con puentes cementados y pilares primarios para superar las divergencias entre los ejes de los implantes en la técnica de la corona telescópica.



### Pilares CAMLOG® Logfit®

Con el sistema protésico CAMLOG® Logfit® pueden elaborarse restauraciones con coronas y puentes cementados. El sistema protésico Logfit® lo forman componentes prefabricados y adaptados con precisión entre sí, que estandarizan así el procedimiento clínico y técnico. Esto permite un ahorro de trabajo en la consulta y en el laboratorio dental.



### Pilares universales y telescópicos CAMLOG®

Los pilares universales y telescópicos CAMLOG® pueden usarse para restauraciones de coronas y puentes elaboradas de forma individual y restauraciones de coronas telescópicas. Opcionalmente, el pilar universal también está disponible para Platform Switching (PS). Los pilares están fabricados de aleación de titanio y se pueden tallar para personalizarlos.

### Pilares de bola, Locator® y de barra rectos CAMLOG®

Para el sistema de implantes CAMLOG® hay disponibles pilares de bola, pilares Locator® y pilares de barra rectos. Estos se diferencian de los pilares con tornillo de pilar en la zona apical por los diferentes diseños de unión. Los pilares de bola, los pilares Locator® y los pilares de barra rectos son de una pieza y presentan una rosca en la porción apical que se atornilla en la rosca interior superior del implante CAMLOG®. Estos pilares se fijan en el implante CAMLOG® usando las correspondientes llaves de inserción.



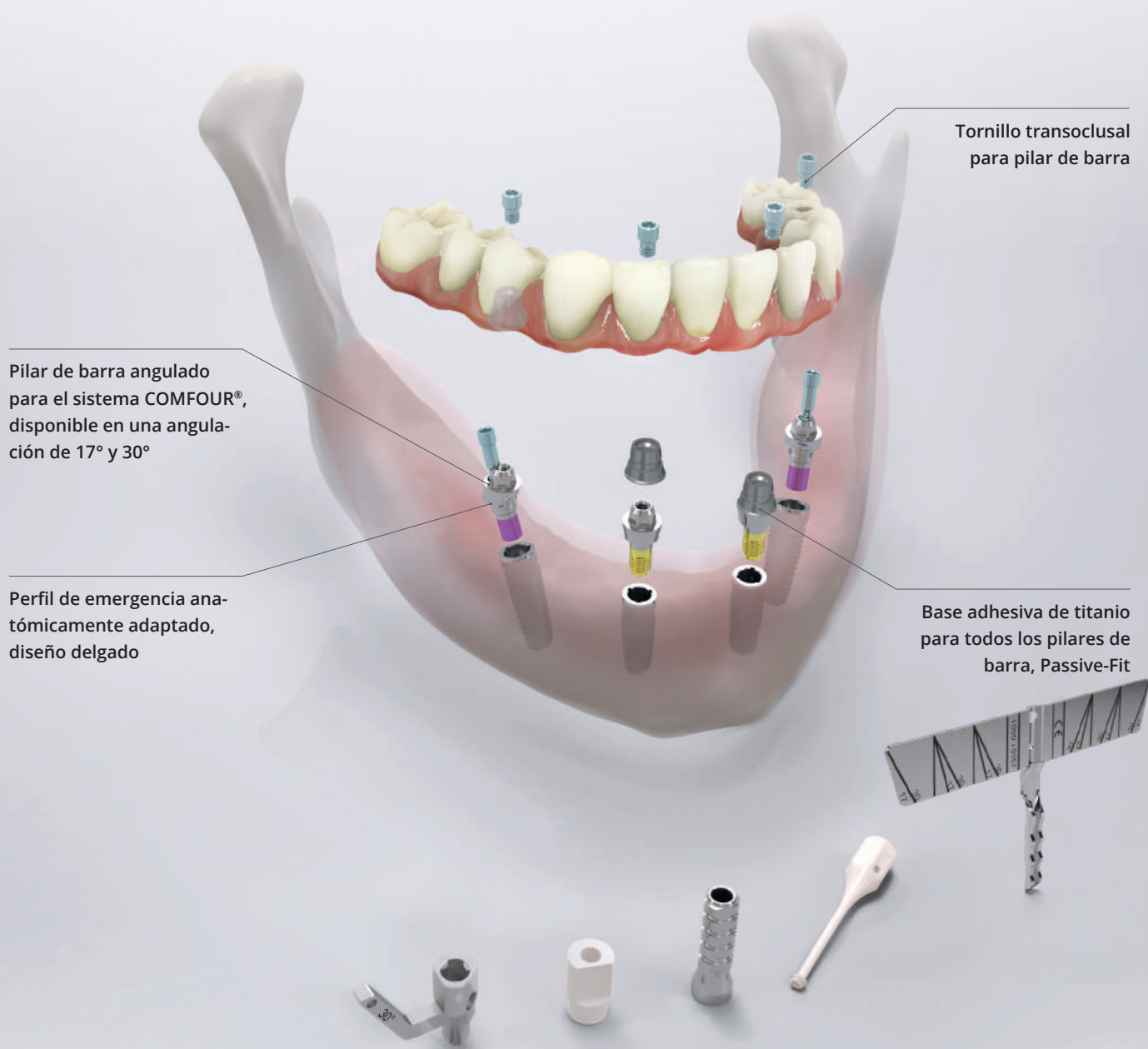


## Sistema COMFOUR®

Las restauraciones atornilladas por oclusal son una solución de vanguardia. Con el sistema COMFOUR® los pacientes edéntulos reciben una prótesis fija, cómoda y de uso inmediato retenida generalmente sobre cuatro o seis implantes con la que experimentarán una clara mejora en su calidad de vida. Por su parte, los odontólogos también se benefician de un confort y una flexibilidad superiores. COMFOUR® ofrece diferentes conceptos terapéuticos. Con este sistema multiopcional se pueden hacer tanto coronas y puentes atornillados por oclusal para las restauraciones de carga inmediata o diferida, como restauraciones de barra sobre pilares de barra rectos y angulados.

COMFOUR® ofrece todo un abanico de opciones con las que solucionar de manera satisfactoria, sencilla y rápida los desafíos de la práctica clínica diaria. El sistema protésico COMFOUR® convence por su versatilidad y, sobre todo, por su delgado diseño.

Las dimensiones reducidas y el número racionalizado de los componentes simplifican la confección de las restauraciones protésicas para los dentistas y los protésicos dentales. Además, las numerosas peculiaridades técnicas del sistema hacen de COMFOUR® no solo un nombre, sino también un programa; tanto para los usuarios como los pacientes.



COMFOUR® ofrece una amplia selección de posibilidades para dar respuesta a las diferentes necesidades en su consulta dental. Con una mayor sencillez y rapidez.



## Codificación por colores de los productos quirúrgicos y protésicos CAMLOG®



### Explicación de los símbolos

|  |                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Marcado CE                                                                                                 |
|  | Consulte las instrucciones de uso                                                                          |
|  | Atención, consulte la documentación adjunta                                                                |
|  | Producto sanitario                                                                                         |
|  | Referencia                                                                                                 |
|  | Número de lote                                                                                             |
|  | Esterilización por radiación                                                                               |
|  | Barrera estéril sencilla con envase protector exterior                                                     |
|  | No estéril                                                                                                 |
|  | Fecha de fabricación                                                                                       |
|  | Utilizable hasta                                                                                           |
|  | No reesterilizable                                                                                         |
|  | No reutilizable                                                                                            |
|  | No usar si el envase está dañado                                                                           |
|  | Mantenga alejado de la luz solar                                                                           |
|  | Límite de temperatura                                                                                      |
|  | Fabricante                                                                                                 |
|  | MR conditional                                                                                             |
|  | Atención: De acuerdo con la Ley Federal (EEUU), este producto sólo puede venderse a odontólogos o médicos. |

### Explicación de las abreviaturas

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| $\varnothing$    | Diámetro                            |
| A $\varnothing$  | Diámetro apical                     |
| G $\varnothing$  | Diámetro gingival                   |
| PP $\varnothing$ | Diámetro de la plataforma protésica |
| L                | Longitud                            |
| AG               | Altura gingival                     |
| PEEK             | Poliéter-éter-cetona                |
| POM              | Polioximetileno                     |
| PS               | Platform Switching                  |
| PPSU             | Polyphenylsulfone                   |

### Instrucciones generales de seguridad y advertencias

Las descripciones de este catálogo no son suficientes para el uso inmediato del sistema de implantes CAMLOG®. Por eso recomendamos que sea un médico con experiencia el que instruya en el manejo correcto del sistema de implantes CAMLOG®.

## Envase implantes PROGRESSIVE-LINE

### Envase secundario

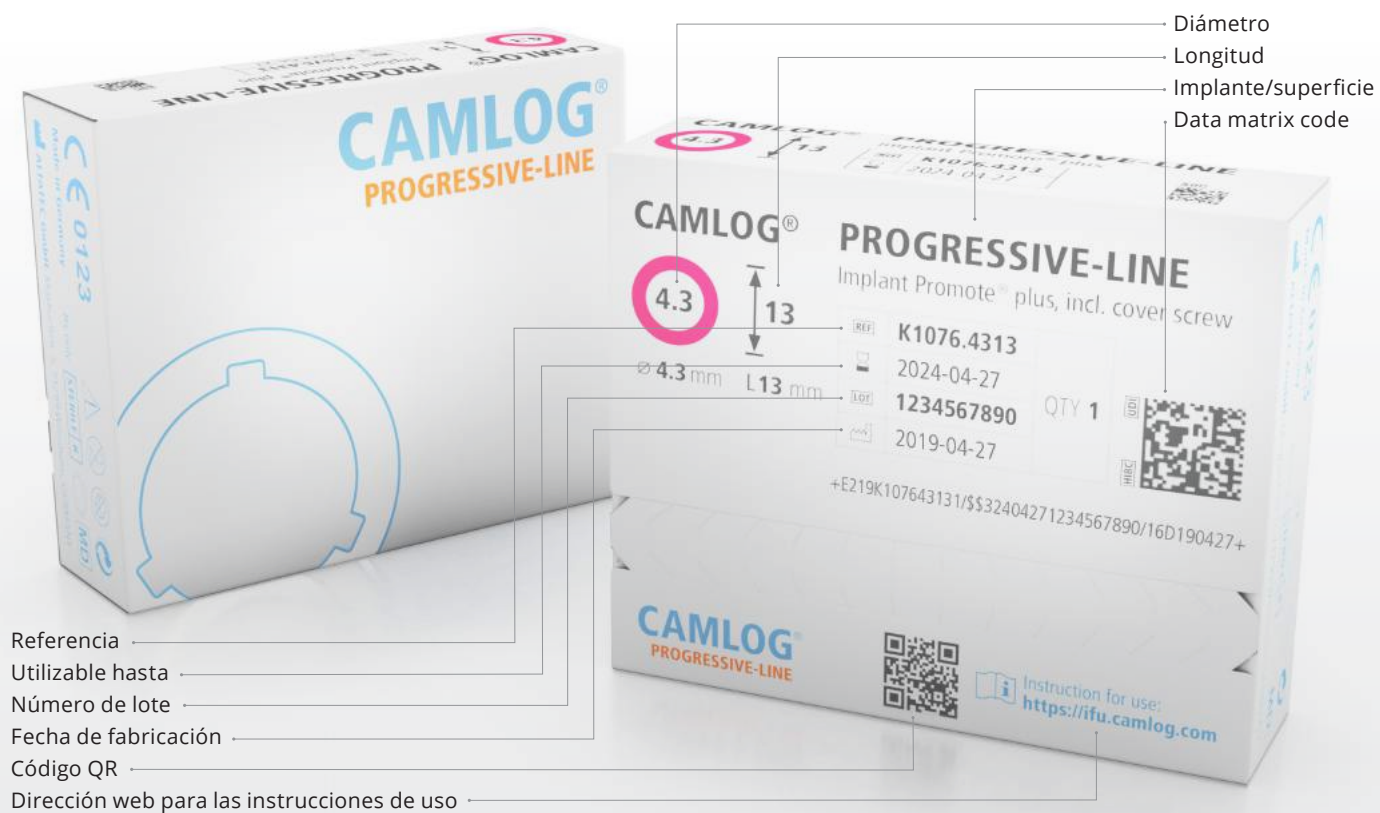
Sellado, caja de cartón con etiqueta del producto codificada por colores

### Embalaje interior del implante (envase primario)

Sellado, codificado por colores



### Ejemplo de etiqueta de producto del embalaje exterior del implante



## Envase implantes SCREW-LINE

### Envase secundario

Sellado, caja de cartón con etiqueta del producto codificada por colores

### Embalaje interior del implante (envase primario)

Sellado, codificado por colores



Ejemplo de etiqueta de producto del embalaje exterior del implante



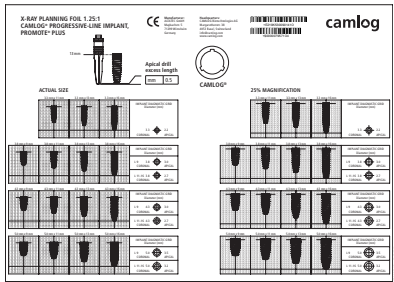
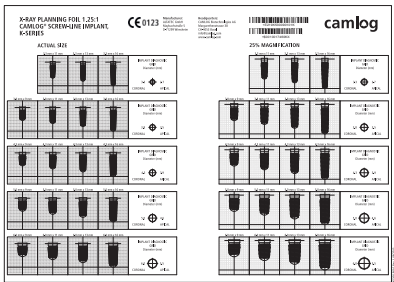
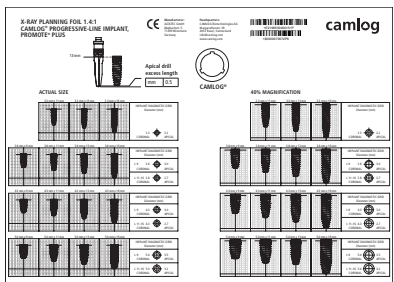
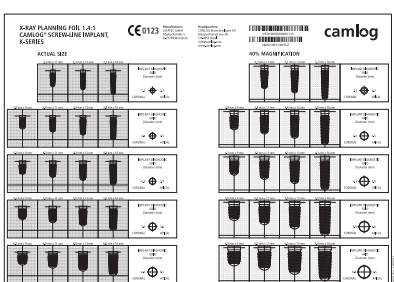
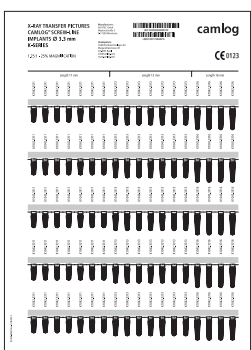






# Planificación

## Plantilla radiográfica de planificación / Plantillas autoadhesiva

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                     | Referencia | Ø      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|    | Plantilla radiográfica de planificación 1.25:1<br>Implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE<br>Aumento 25%                                          | K5300.9014 | -      |
|    | Plantilla radiográfica de planificación 1.25:1<br>Implantes CAMLOG® SCREW-LINE<br>Aumento 25%                                                | K5300.9010 | -      |
|  | Plantilla radiográfica de planificación 1.4:1<br>Implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE<br>Aumento 40%                                           | K5300.9015 | -      |
|  | Plantilla radiográfica de planificación 1.4:1<br>Implantes CAMLOG® SCREW-LINE<br>Aumento 40%                                                 | K5300.9011 | -      |
|  | Plantillas autoadhesiva de planificación 1.25:1<br>Implantes CAMLOG® SCREW-LINE<br>Plantillas de planificación, autoadhesivas<br>Aumento 25% | K5300.9080 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | K5300.9081 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | K5300.9082 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | K5300.9083 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | K5300.9084 | 6.0 mm |

## Planificación mediante TC

para plantillas radiográficas y férulas quirúrgicas 3D

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                                       | Referencia | L                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|    | <b>Casquillo para la planificación mediante TC</b><br>para fresas Ø 2.0 mm*, casquillo estriado<br>Envase de 10 unidades<br>Diámetro interior 2.1 mm<br>Diámetro exterior 2.5 mm<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | A2002.2000 | 4.0 mm<br>10.0 mm |
|    | <b>Casquillo para la planificación mediante TC</b><br>para fresas Ø 2.2 mm, casquillo estriado<br>Envase de 10 unidades<br>Diámetro interior 2.3 mm<br>Diámetro exterior 2.7 mm<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio  | A2222.2200 | 4.0 mm<br>10.0 mm |
|   | <b>Fresa para colocar el casquillo de TC estriado</b> (para A2002.2000)<br>Ø 2.6 mm<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                                                 | A2050.2600 | -                 |
|  | <b>Fresa para colocar el casquillo de TC estriado</b> (para A2222.2200)<br>Ø 2.8 mm<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                                                 | A2050.2800 | -                 |

\* para la fresa piloto J5051.2003 y la fresa piloto SCREW-LINE J5051.2000



# PROGRESSIVE-LINE

## Implantes con poste de inserción a presión

|                                                                                   | Artículo                                                                                                                                                                        | Referencia | Ø      | L     | A Ø    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|
|  | <b>Implante CAMLOG®<br/>PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus</b><br>incl. poste de inserción a presión<br>y tornillo de cierre, estéril<br><br><b>Material</b><br>Titanio de grado 4 | K1076.3311 | 3.3 mm | 11 mm | 2.2 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.3313 |        | 13 mm |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.3316 |        | 16 mm |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.3809 | 3.8 mm | 9 mm  | 3.0 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.3811 |        | 11 mm | 2.7 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.3813 |        | 13 mm |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.3816 |        | 16 mm |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.4309 | 4.3 mm | 9 mm  | 3.0 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.4311 |        | 11 mm | 2.7 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.4313 |        | 13 mm |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.4316 |        | 16 mm |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.5009 | 5.0 mm | 9 mm  | 3.5 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.5011 |        | 11 mm | 3.2 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.5013 |        | 13 mm |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | K1076.5016 |        | 16 mm |        |

Cirugía

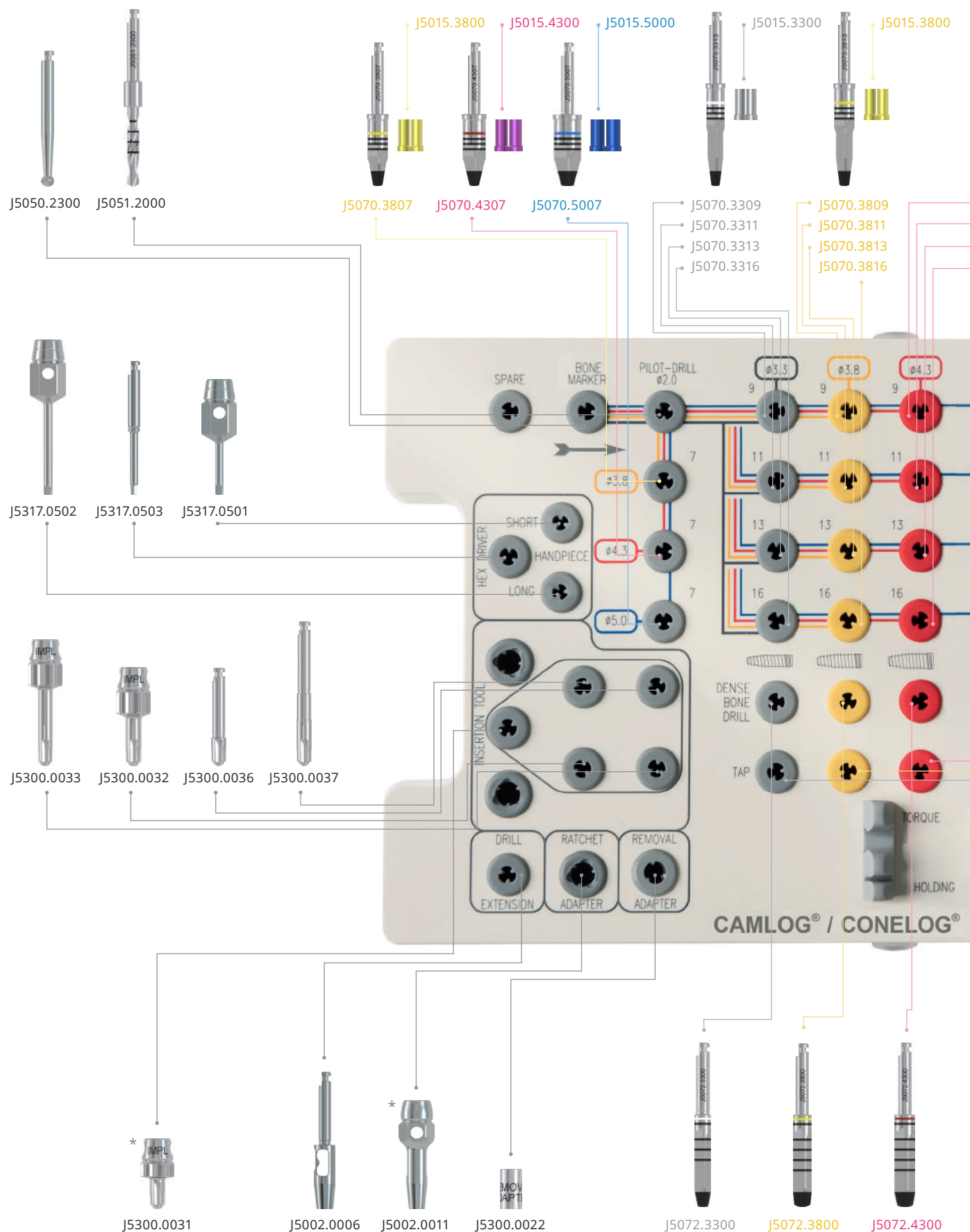
## Implantes con poste de inserción roscado

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                      | Referencia | Ø      | L     | A Ø    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|
|  | <b>Implante CAMLOG®<br/>PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus</b><br>incl. poste de inserción roscado<br>y tornillo de cierre, estéril<br><br><b>Material</b><br>Titanio de grado 4 | K1075.3311 | 3.3 mm | 11 mm | 2.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.3313 |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.3316 |        | 16 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.3809 | 3.8 mm | 9 mm  | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.3811 |        | 11 mm | 2.7 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.3813 |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.3816 |        | 16 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.4309 | 4.3 mm | 9 mm  | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.4311 |        | 11 mm | 2.7 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.4313 |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.4316 |        | 16 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.5009 | 5.0 mm | 9 mm  | 3.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.5011 |        | 11 mm | 3.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.5013 |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                               | K1075.5016 |        | 16 mm |        |

Con los implantes CAMLOG® SCREW-LINE con Ø 3.8/4.3/5.0 mm es posible la opción de Platform Switching.

# PROGRESSIVE-LINE

El kit quirúrgico CAMLOG®/CONELOG®




\* Estos artículos no están incluidos en el kit quirúrgico y se deben solicitar por separado.








Las fresas están ordenadas y clasificadas en el set siguiendo la secuencia de tratamiento. Las líneas de color indican la secuencia exacta de fresado.

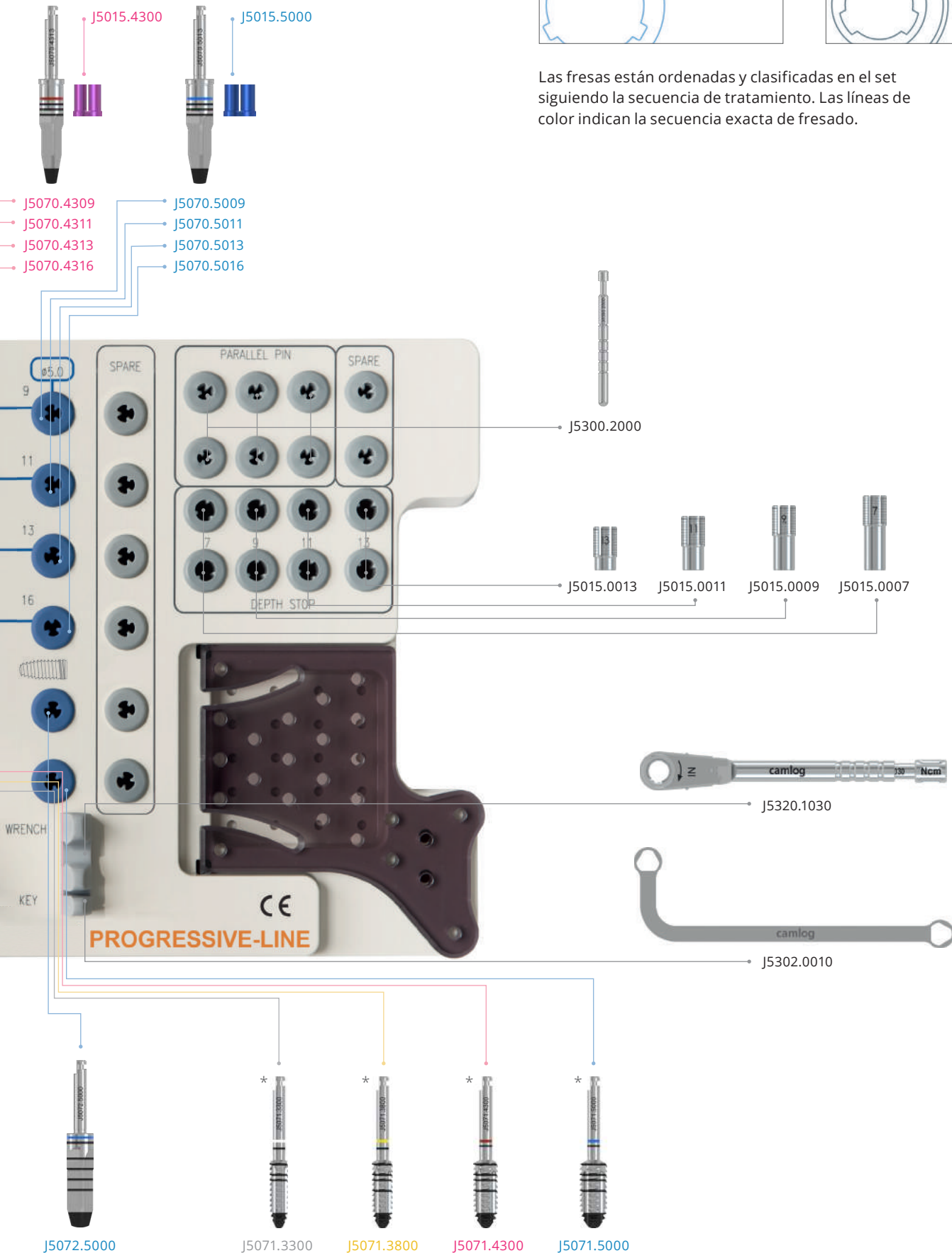Cirugía



# PROGRESSIVE-LINE
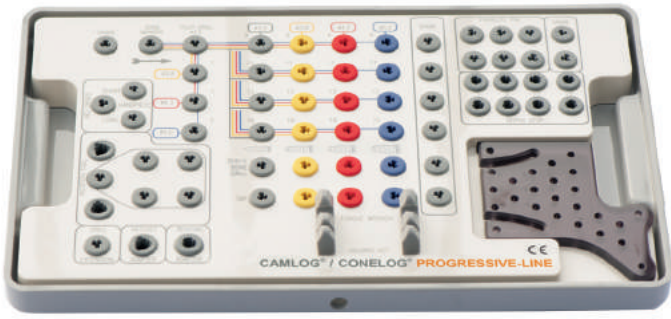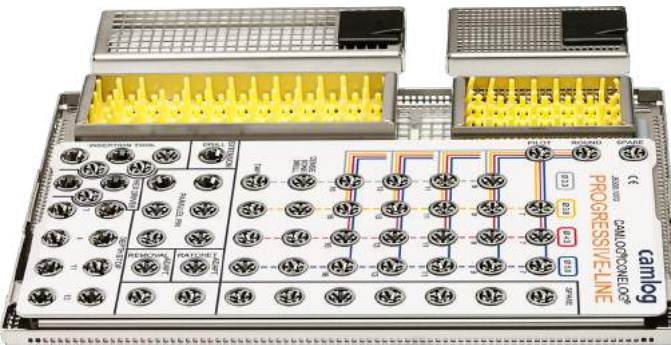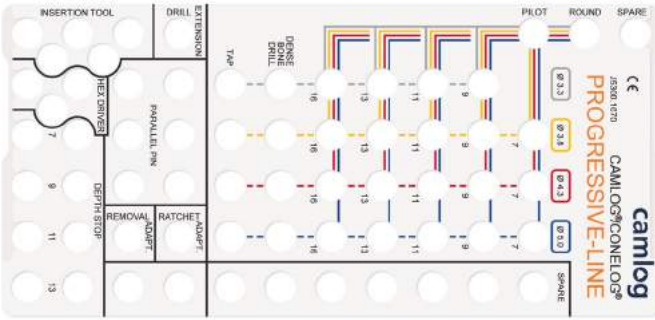
## Kit quirúrgico

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                                                                  | Referencia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <p>El kit quirúrgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE contiene todos los instrumentos quirúrgicos necesarios ordenados según el código de colores, incl. la llave de carraca dinamo-métrica y la llave guía (no están incluidos los machos de rosca)</p> | J5300.0065 |
|   | <p>Bandeja quirúrgica CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE sin contenido</p>                                                                                                                                                                                 | J5300.8917 |
|  | <p>Bandeja de cirugía para el reprocesado CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE incl. plantilla, sin contenido</p>                                                                                                                                            | J5300.8970 |
|  | <p>Plantilla para la bandeja de cirugía para el reprocesado CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE</p> <p>Material<br/>PPSU</p>                                                                                                                                | J5300.1070 |

Para la preparación del lecho implantario para los implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE y CONELOG® PROGRESSIVE-LINE se utiliza el mismo instrumental.

## Instrumentos quirúrgicos

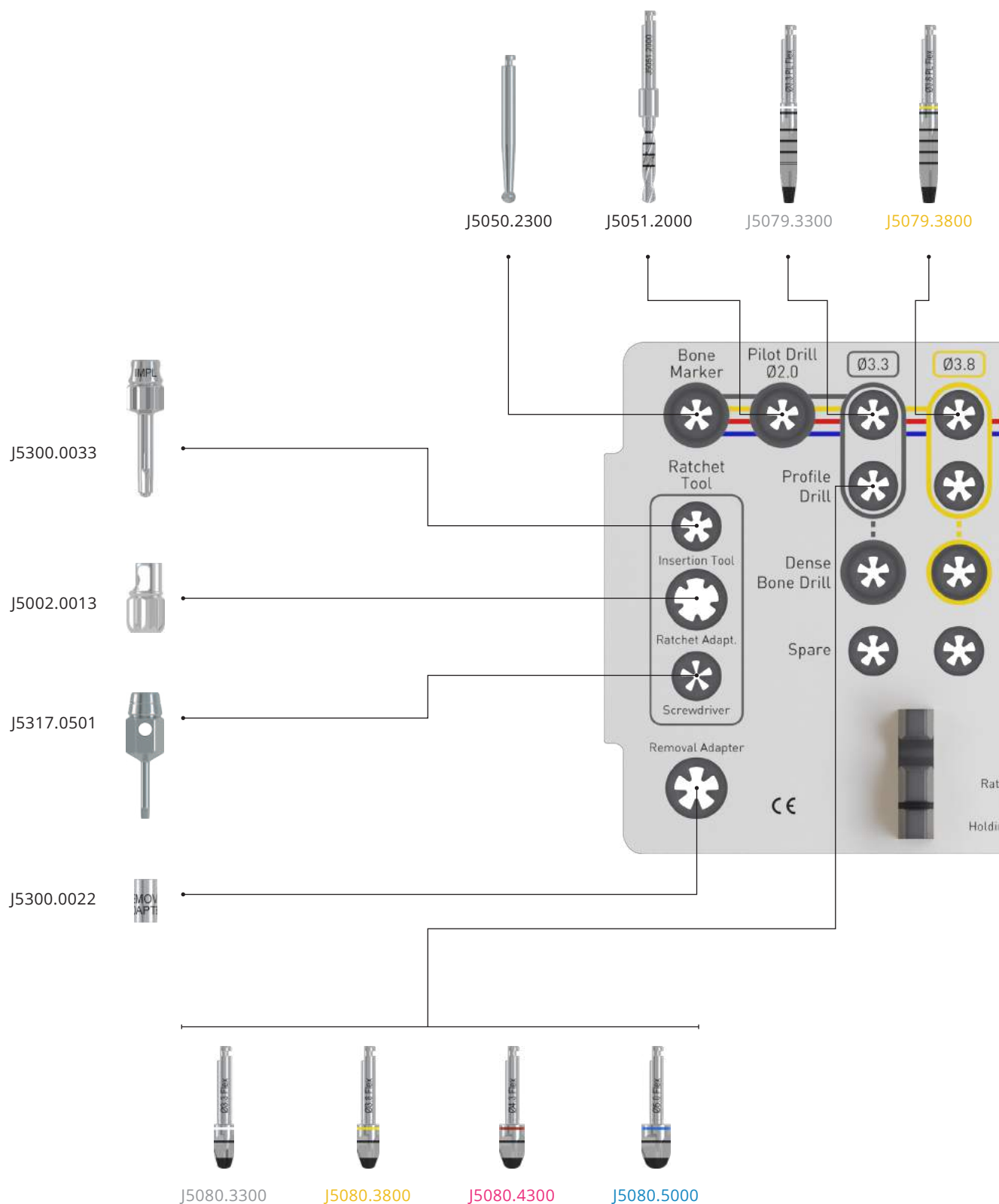
|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                         | Referencia  | Ø      | L      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
|    | <b>Fresa de perfil PROGRESSIVE-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                            | J5070.3309  | 3.3 mm | 9 mm   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.3311  |        | 11 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.3313  |        | 13 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.3316  |        | 16 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.3809  | 3.8 mm | 9 mm   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.3811  |        | 11 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.3813  |        | 13 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.3816  |        | 16 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.4309  | 4.3 mm | 9 mm   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.4311  |        | 11 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.4313  |        | 13 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.4316  |        | 16 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.5009  | 5.0 mm | 9 mm   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.5011  |        | 11 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.5013  |        | 13 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5070.5016  |        | 16 mm  |
|    | <b>Tope de profundidad para fresa de perfil PROGRESSIVE-LINE y SCREW-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio   | J5015.3300  | 3.3 mm | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5015.3800  | 3.8 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5015.4300  | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5015.5000  | 5.0 mm |        |
|  | <b>Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                           | J5072.3300  | 3.3 mm | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5072.3800  | 3.8 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5072.4300  | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5072.5000  | 5.0 mm |        |
|  | <b>Macho de rosca PROGRESSIVE-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                             | J5071.3300  | 3.3 mm | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5071.3800  | 3.8 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5071.4300  | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  | J5071.5000  | 5.0 mm |        |
|  | <b>Adaptador roscado CAMLOG® y CONELOG®</b><br>para todos los diámetros<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                               | J5300.0022* | 3.3 mm | 6.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  |             | 3.8 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  |             | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                  |             | 5.0 mm |        |
|  | <b>Paralelizador PROGRESSIVE-LINE</b><br>con marcas de profundidad<br>(para fresa piloto Ø 2,0 mm)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | J5300.2000  | -      | -      |

\* para utilizar solo con los implantes PROGRESSIVE-LINE con poste de inserción a presión

# PROGRESSIVE-LINE Flex

El kit quirúrgico CAMLOG®/CONELOG®


NOVEDAD



\* artículos opcionales, pueden adquirirse por separado



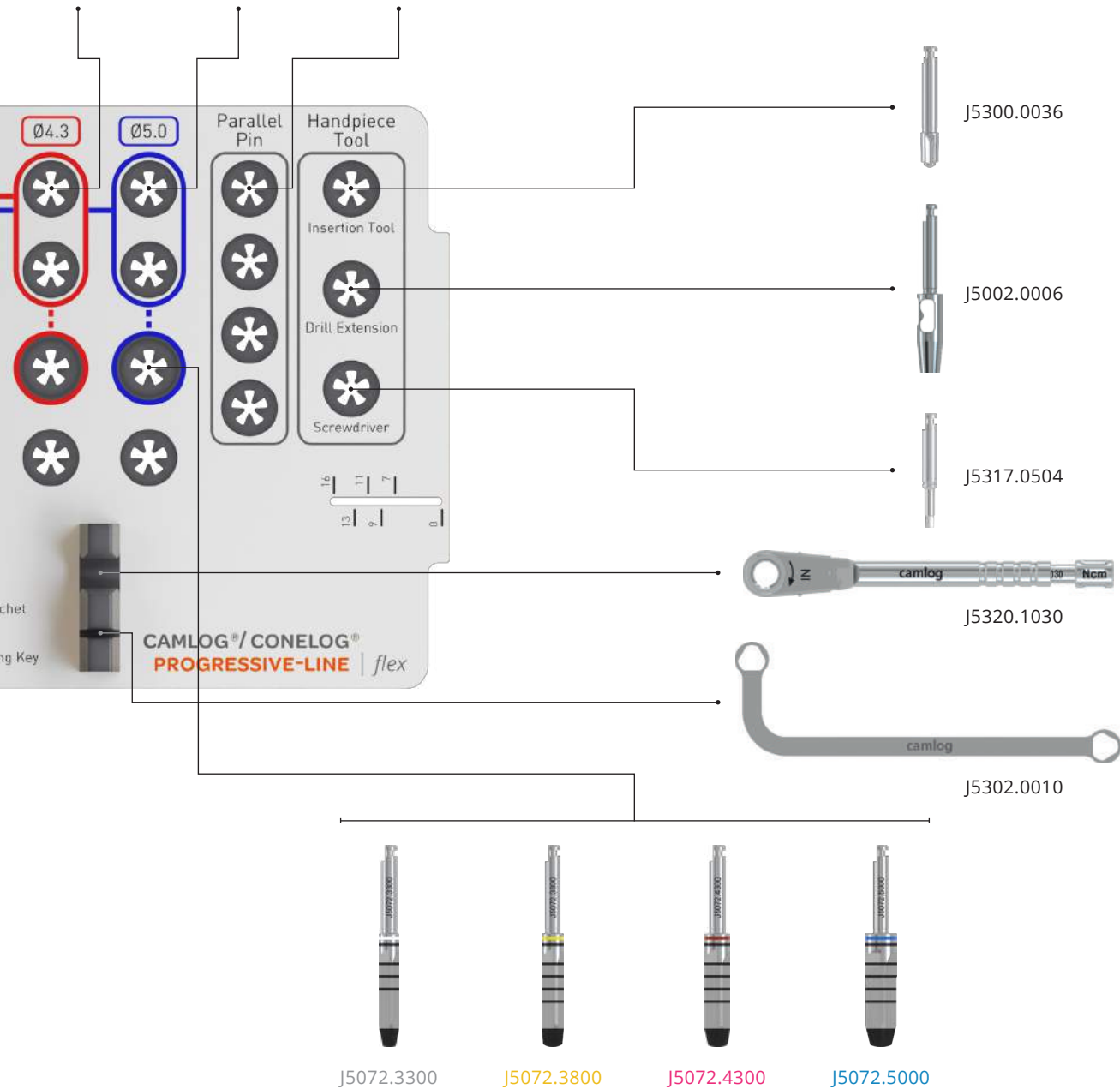Las fresas están ordenadas y clasificadas en el set siguiendo la secuencia de tratamiento. Las líneas de color indican la secuencia exacta de fresado.



# PROGRESSIVE-LINE Flex

## El kit quirúrgico

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                             | Referencia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <p>El kit quirúrgico CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Flex contiene todos los instrumentos quirúrgicos necesarios ordenados según el código de colores, incl. la llave de carraca dinamométrica y la llave guía</p> | J5300.0071 |
|  | <p>Bandeja quirúrgica CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Flex sin contenido</p>                                                                                                                                       | J5300.8920 |



## Instrumentos Quirúrgicos

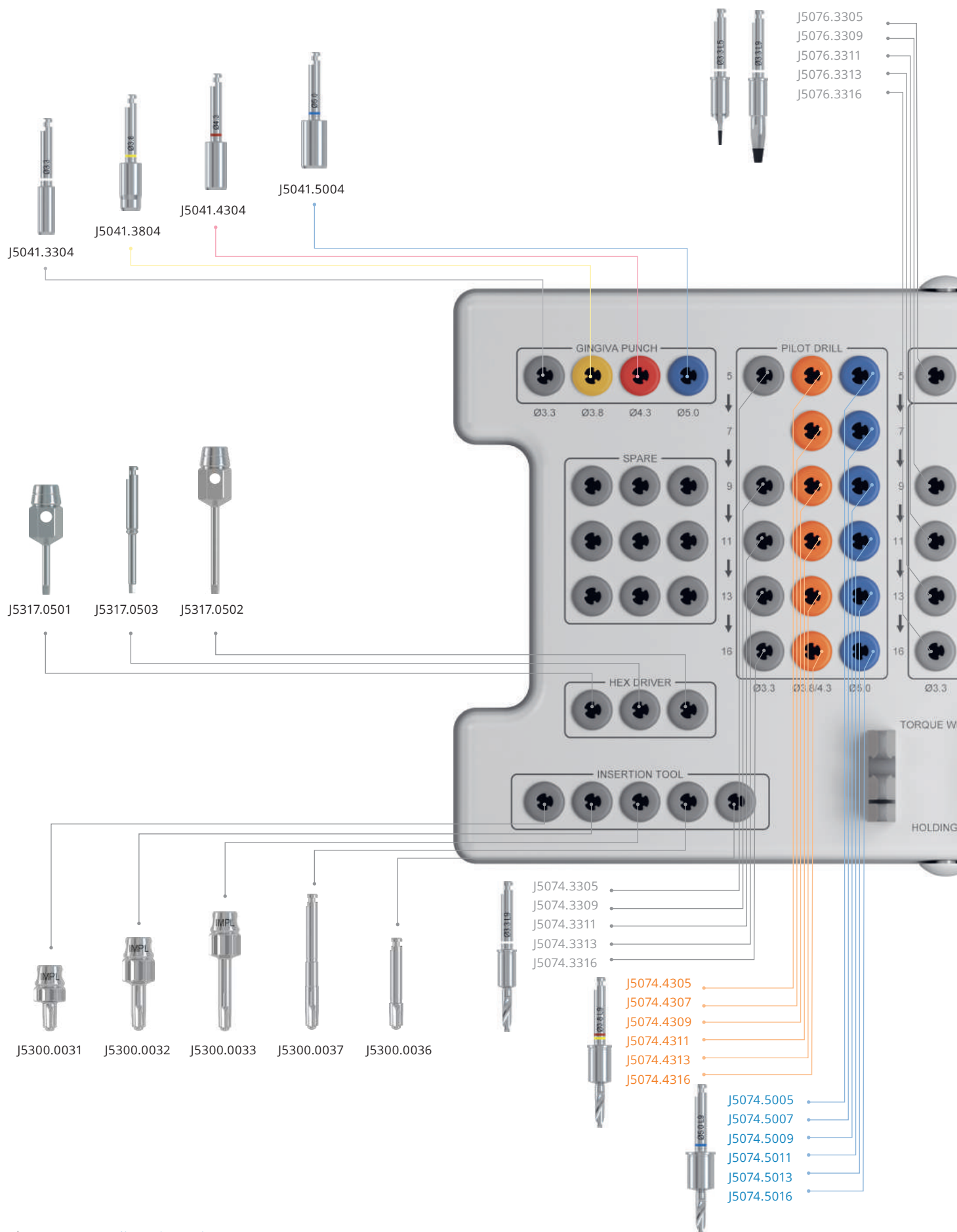
|                                                                                     | Artículo                                                                                                  | Referencia | Ø      | L     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
|    | <b>Fresa PROGRESSIVE-LINE Flex</b><br>resterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable           | J5079.3300 | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                           | J5079.3800 | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                           | J5079.4300 | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                           | J5079.5000 | 5.0 mm |       |
|    | <b>Fresa perfilada PROGRESSIVE-LINE Flex</b><br>resterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5080.3300 | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                           | J5080.3800 | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                           | J5080.4300 | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                           | J5080.5000 | 5.0 mm |       |
|  | <b>Adaptador de la llave de carraca</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                        | J5002.0013 | -      | 11 mm |

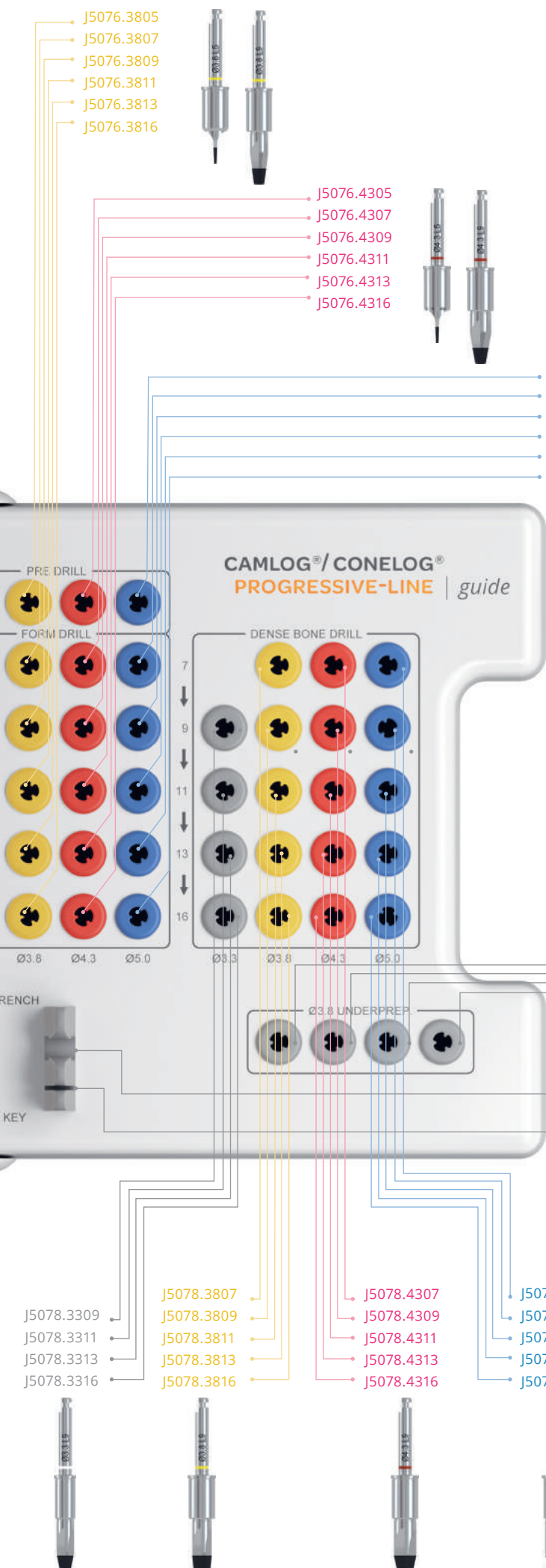
La preparación del lecho implantario con los instrumentos PROGRESSIVE-LINE Flex es igual que para los implantes CAMLOG® y CONELOG® PROGRESSIVE-LINE.

# PROGRESSIVE-LINE


El kit quirúrgico CAMLOG®/CONELOG® Cirugía Guiada

NOVEDAD





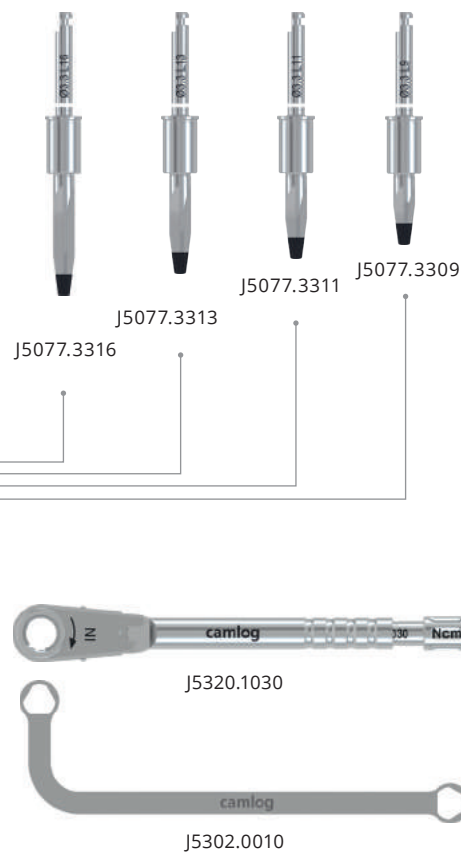Las fresas están ordenadas y clasificadas en el set siguiendo la secuencia de tratamiento. Las líneas de color indican la secuencia exacta de fresado.



# PROGRESSIVE-LINE

## Sistema de Cirugía Guiada

|                                                                                   | Artículo                                                                          | Referencia |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Bandeja quirúrgica Cirugía Guiada CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE sin contenido | J5300.8919 |

|                                                                                     | Artículo                                                                                                | Referencia  | Ø      | L     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
|   | Bisturís circulares Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE reesterilizable<br><br>Material<br>Acero inoxidable | J5041.3304  | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5041.3804  | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5041.4304  | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5041.5004* | 5.0 mm |       |
|  | Fresa piloto Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE reesterilizable<br><br>Material<br>Acero inoxidable        | J5074.3305  | 3.3 mm | 5 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.3309  |        | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.3311  |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.3313  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.3316  |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.4305  | 3.8 mm | 5 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.4307  |        | 7 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.4309  |        | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.4311  |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.4313  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.4316  |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.5005* | 5.0 mm | 5 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.5007* |        | 7 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.5009* |        | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.5011* |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.5013* |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                         | J5074.5016* |        | 16 mm |

\* se espera disponibilidad del producto para finales del T1/2021

### Notas

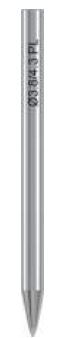
Los implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE con la ref. K1075.xxxx y poste de inserción roscado pueden utilizarse con PROGRESSIVE-LINE Sistema Cirugía Guiada.

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                           | Referencia  | Ø      | L     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
|    | <b>Fresa cónica Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                  | J5076.3305  | 3.3 mm | 5 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.3805  | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.4305  | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.5005* | 5.0 mm |       |
|   | <b>Fresa de perfil Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                               | J5076.3311  | 3.3 mm | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.3313  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.3316  |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.3809  | 3.8 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.3811  |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.3813  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.3816  |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.4309  | 4.3 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.4311  |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.4313  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.4316  | 5.0 mm | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.5009* |        | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.5011* |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.5013* |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5076.5016* |        | 16 mm |
|  | <b>Dense bone drill Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                              | J5078.3311  | 3.3 mm | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.3313  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.3316  |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.3809  | 3.8 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.3811  |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.3813  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.3816  |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.4309  | 4.3 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.4311  |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.4313  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.4316  | 5.0 mm | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.5009* |        | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.5011* |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.5013* |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5078.5016* |        | 16 mm |
|  | <b>Fresa de perfil Cirugía Guiada para Ø 3,8 mm con preparación PROGRESSIVE-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5077.3309  | 3.3 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5077.3311  |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5077.3313  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                    | J5077.3316  |        | 16 mm |

\* se espera disponibilidad del producto para finales del T1/2021

# PROGRESSIVE-LINE


## Sistema de Cirugía Guiada

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                           | Referencia  | Ø             | L |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---|
|    | <b>Fresa para férula Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE</b><br>para casquillo guía Cirugía Guiada<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                          | J3753.3300  | 3.3 mm        | - |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | J3753.4300  | 3.8 mm 4.3 mm |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | J3753.5000* | 5.0 mm        |   |
|    | <b>Casquillo guía Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE**</b><br>(2 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                              | J3754.3301  | 3.3 mm        | - |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | J3754.3801  | 3.8 mm        |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | J3754.4301  | 4.3 mm        |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | J3754.5001* | 5.0 mm        |   |
|   | <b>Instrumento de inserción Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE</b><br>para casquillo guía Cirugía Guiada<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                   | J3717.3300  | 3.3 mm        | - |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | J3717.4300  | 3.8 mm 4.3 mm |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | J3717.5000* | 5.0 mm        |   |
|  | <b>Perno de control Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE</b><br>para casquillo guía Cirugía Guiada<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                           | J5301.3310  | 3.3 mm        | - |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | J5301.4310  | 3.8 mm 4.3 mm |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | J5301.5010* | 5.0 mm        |   |
|  | <b>Poste de inserción Cirugía Guiada CAMLOG®, roscado</b><br>para implante CAMLOG® Lab/análogo de implante, incl. tornillo de retención (2 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2026.3303  | 3.3 mm        | - |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | K2026.3803  | 3.8 mm        |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | K2026.4303  | 4.3 mm        |   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | K2026.5003* | 5.0 mm        |   |

\* se espera disponibilidad del producto para finales del T1/2021

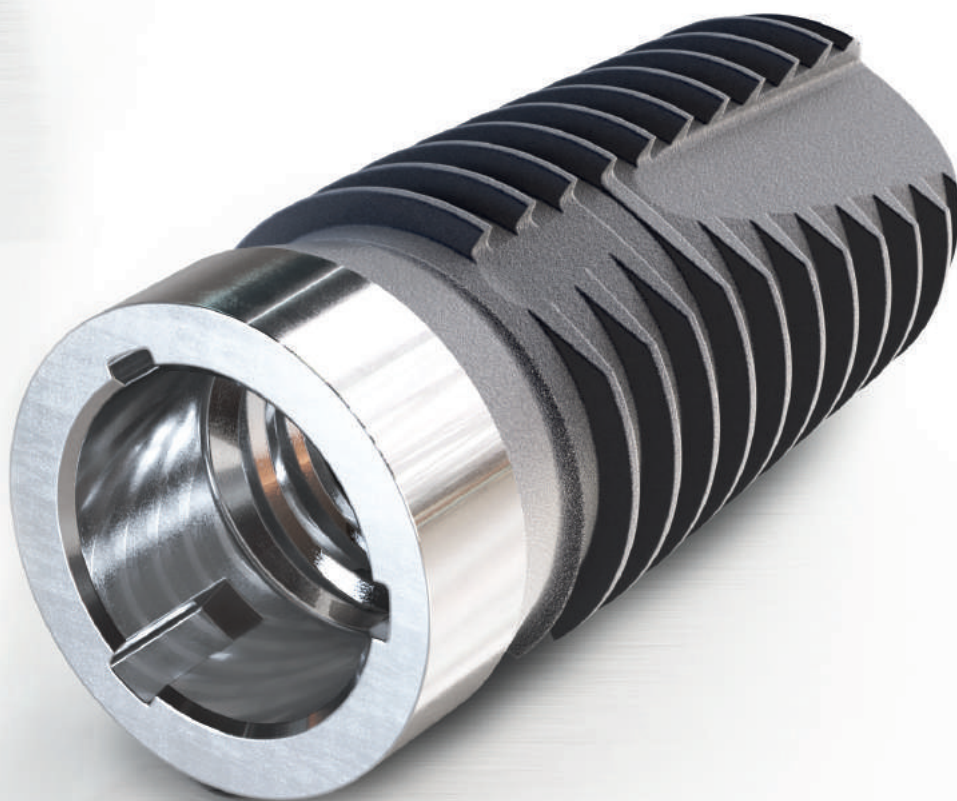\*\* para utilizar solo con los implantes PROGRESSIVE-LINE con poste de inserción roscado





# SCREW-LINE

## Implantes con poste de inserción a presión

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                           | Referencia   | Ø      | L     | A Ø    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|--------|
|    | <b>Implante CAMLOG® SCREW-LINE, Promote®</b><br>incl. poste de inserción a presión y tornillo de cierre, estéril<br><br><b>Material</b><br>Titanio de grado 4      | K1046.3311*  | 3.3 mm | 11 mm | 2.7 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.3313*  |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.3316*  |        | 16 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.3809*  | 3.8 mm | 9 mm  | 3.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.3811*  |        | 11 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.3813*  |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.3816*  |        | 16 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.4309*  | 4.3 mm | 9 mm  | 3.9 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.4311*  |        | 11 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.4313*  |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.4316*  |        | 16 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.5009*  | 5.0 mm | 9 mm  | 4.6 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.5011*  |        | 11 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.5013*  |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.5016*  |        | 16 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.6009*  | 6.0 mm | 9 mm  | 5.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.6011*  |        | 11 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.6013*  |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1046.6016*  |        | 16 mm |        |
|  | <b>Implante CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® plus</b><br>incl. poste de inserción a presión y tornillo de cierre, estéril<br><br><b>Material</b><br>Titanio de grado 4 | K1056.3311** | 3.3 mm | 11 mm | 2.7 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.3313** |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.3316** |        | 16 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.3809** | 3.8 mm | 9 mm  | 3.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.3811** |        | 11 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.3813** |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.3816** |        | 16 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.4309** | 4.3 mm | 9 mm  | 3.9 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.4311** |        | 11 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.4313** |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.4316** |        | 16 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.5009** | 5.0 mm | 9 mm  | 4.6 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.5011** |        | 11 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.5013** |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.5016** |        | 16 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.6009** | 6.0 mm | 9 mm  | 5.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.6011** |        | 11 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.6013** |        | 13 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | K1056.6016** |        | 16 mm |        |

\* Atención: Los implantes CAMLOG® SCREW-LINE Promote® con la ref. K1046.xxxx reemplazan a los implantes con la ref. K1044.xxxx. Dependiendo de su país, puede que los implantes CAMLOG® SCREW-LINE Promote® con la ref. K1044.xxxx sigan disponibles durante más tiempo.

\*\* Atención: Los implantes CAMLOG® SCREW-LINE Promote® plus con la ref. K1056.xxxx reemplazan a los implantes con la ref. K1054.xxxx. Dependiendo de su país, puede que los implantes CAMLOG® SCREW-LINE Promote® plus con la ref. K1054.xxxx sigan disponibles durante más tiempo.

### Notas

Los implantes Promote® CAMLOG® SCREW-LINE con las ref. K1044.xxxx/K1045.xxxx/K1046.xxxx y los implantes Promote® plus CAMLOG® SCREW-LINE con las ref. K1054.xxxx/K1055.xxxx/K1056.xxxx solo se pueden usar con los instrumentos de inserción con las ref. J5300.0031, J5300.0032, J5300.0033, J5300.0034, J5300.0035, J5300.0036 o J5300.0037.

Con los implantes CAMLOG® SCREW-LINE con Ø 3.8/4.3/5.0/6.0 mm es posible la opción de Platform Switching.

## Implantes con poste de inserción roscado

|                                                                                    | Artículo                                                                                                                                                         | Referencia  | Ø      | L     | A Ø    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|
|   | <b>Implante CAMLOG® SCREW-LINE, Promote®</b><br>incl. poste de inserción roscado y tornillo de cierre, estéril<br><br><b>Material</b><br>Titanio de grado 4      | K1045.3311  | 3.3 mm | 11 mm | 2.7 mm |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.3313  |        | 13 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.3316  |        | 16 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.3809  | 3.8 mm | 9 mm  | 3.5 mm |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.3811  |        | 11 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.3813  |        | 13 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.3816  |        | 16 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.4309  | 4.3 mm | 9 mm  | 3.9 mm |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.4311  |        | 11 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.4313  |        | 13 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.4316  |        | 16 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.5009  | 5.0 mm | 9 mm  | 4.6 mm |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.5011  |        | 11 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1045.5013  |        | 13 mm |        |
|  | <b>Implante CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® plus</b><br>incl. poste de inserción roscado y tornillo de cierre, estéril<br><br><b>Material</b><br>Titanio de grado 4 | K1055.3311* | 3.3 mm | 11 mm | 2.7 mm |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.3313* |        | 13 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.3316* |        | 16 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.3809* | 3.8 mm | 9 mm  | 3.5 mm |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.3811* |        | 11 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.3813* |        | 13 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.3816* |        | 16 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.4309* | 4.3 mm | 9 mm  | 3.9 mm |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.4311* |        | 11 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.4313* |        | 13 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.4316* |        | 16 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.5009* | 5.0 mm | 9 mm  | 4.6 mm |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.5011* |        | 11 mm |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                  | K1055.5013* |        | 13 mm |        |

\* Atención: Los implantes CAMLOG® SCREW-LINE Promote® plus con la ref. K1055.xxxx reemplazan a los implantes con la ref. K1053.xxxx. Dependiendo de su país, puede que los implantes CAMLOG® SCREW-LINE Promote® plus con la ref. K1053.xxxx sigan disponibles durante más tiempo.

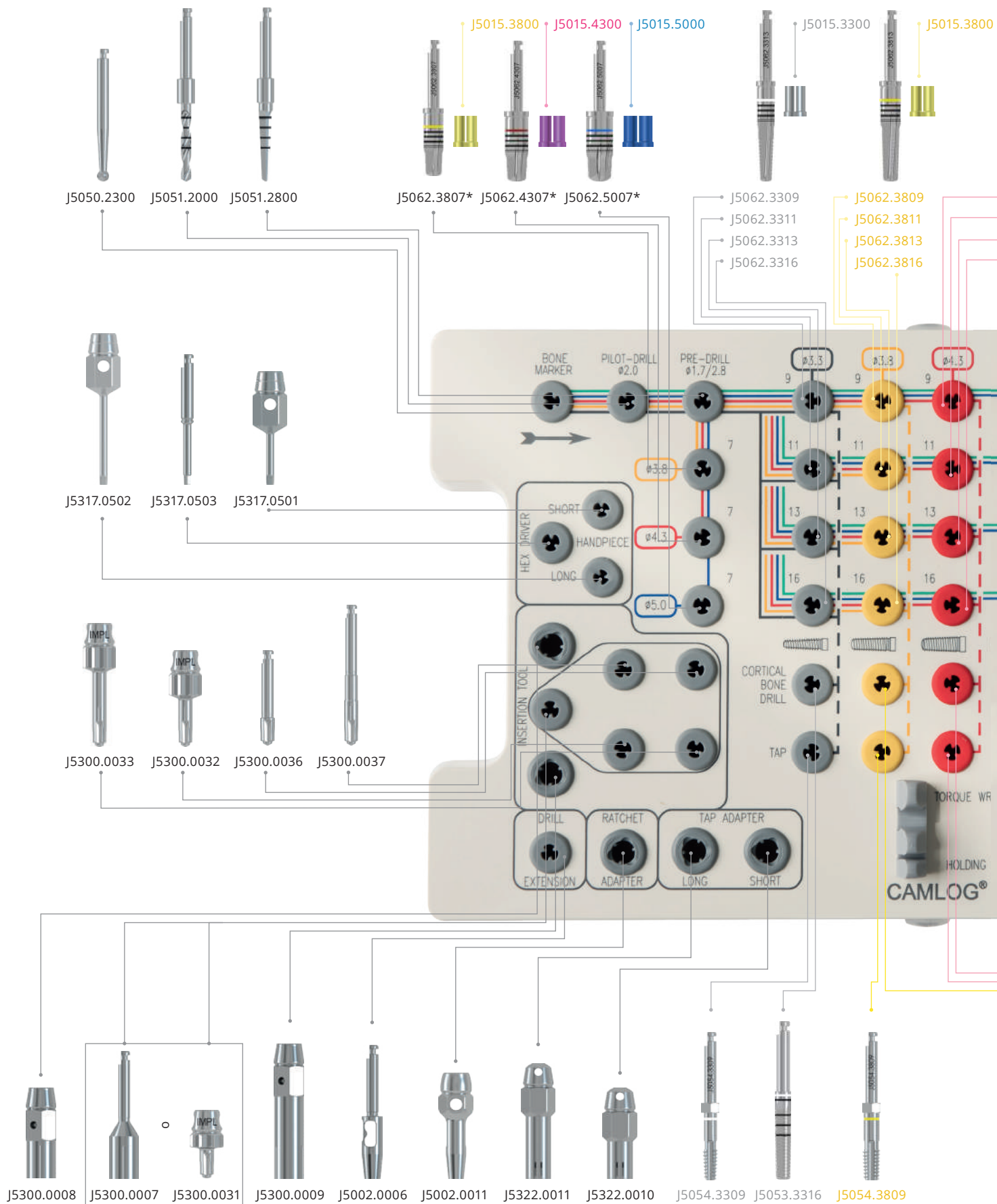
### Notas

Los implantes Promote® CAMLOG® SCREW-LINE con las ref. K1044.xxxx/K1045.xxxx/K1046.xxxx y los implantes Promote® plus CAMLOG® SCREW-LINE con las ref. K1054.xxxx/K1055.xxxx/K1056.xxxx solo se pueden usar con los instrumentos de inserción con las ref. J5300.0031, J5300.0032, J5300.0033, J5300.0034, J5300.0035, J5300.0036 o J5300.0037.


Con los implantes CAMLOG® SCREW-LINE con Ø 3.8/4.3/5.0/6.0 mm es posible la opción de Platform Switching.

# SCREW-LINE

## Kit quirúrgico CAMLOG®/CONELOG®





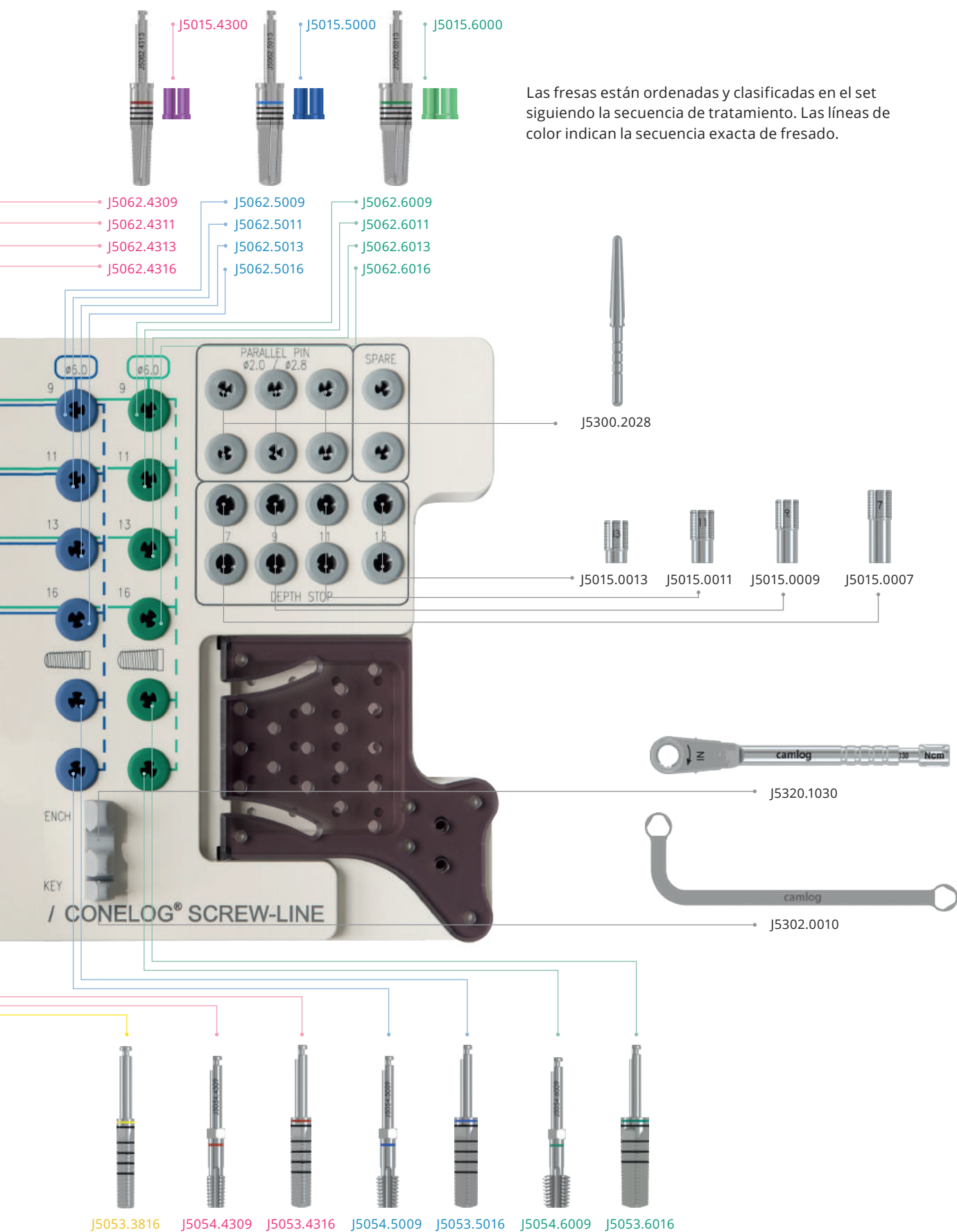
\* solo para los implantes CONELOG® SCREW-LINE longitud 7 mm





# SCREW-LINE
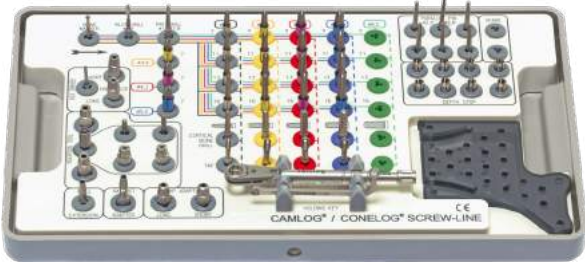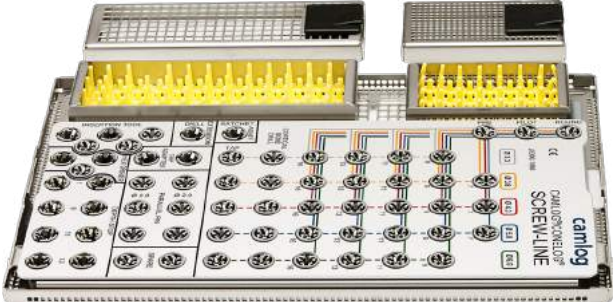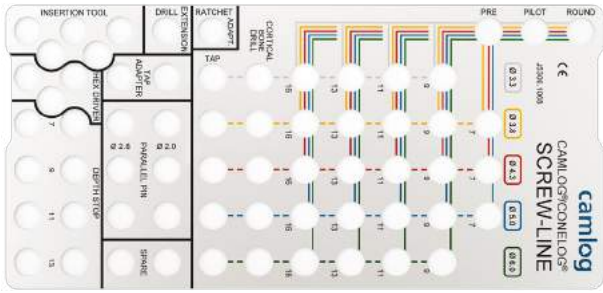
## Kit quirúrgico

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Referencia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | El kit quirúrgico<br>CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE<br>contiene todos los instrumentos<br>quirúrgicos necesarios ordenados<br>según el código de colores, incl. la<br>llave de carraca dinamo métrica y<br>la llave guía (No están incluidas las<br>fresas ni los machos de rosca para<br>el Ø 6.0 mm) | J5300.0063 |
|   | Bandeja de quirúrgica<br>CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE<br>sin contenido                                                                                                                                                                                                                               | J5300.8916 |
|  | Bandeja de cirugía<br>para el reprocesado<br>CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE<br>incl. plantilla, sin contenido                                                                                                                                                                                          | J5300.8968 |
|  | Plantilla para la bandeja de cirugía<br>para el reprocesado<br>CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE<br><br>Material<br>Aluminio                                                                                                                                                                              | J5300.1068 |

Para la preparación del lecho implantario para los implantes CAMLOG® SCREW-LINE y CONELOG® SCREW-LINE se utiliza el mismo instrumental.



## Instrumentos quirúrgicos

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                       | Referencia | Ø      | L     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
|    | <b>Fresa de perfil SCREW-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                | J5062.3309 | 3.3 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.3311 |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.3313 |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.3316 |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.3809 | 3.8 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.3811 |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.3813 |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.3816 |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.4309 | 4.3 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.4311 |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.4313 |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.4316 |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.5009 | 5.0 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.5011 |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.5013 |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.5016 |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.6009 | 6.0 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.6011 |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.6013 |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5062.6016 |        | 16 mm |
|  | <b>Tope de profundidad para fresa de perfil PROGRESSIVE-LINE y SCREW-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | J5015.3300 | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5015.3800 | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5015.4300 | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5015.5000 | 5.0 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5015.6000 | 6.0 mm |       |
|  | <b>Fresa de perfil SCREW-LINE para hueso cortical</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                            | J5053.3316 | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5053.3816 | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5053.4316 | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5053.5016 | 5.0 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5053.6016 | 6.0 mm |       |
|  | <b>Macho de rosca SCREW-LINE con hexágono, reesterilizable</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                      | J5054.3309 | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5054.3809 | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5054.4309 | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5054.5009 | 5.0 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                | J5054.6009 | 6.0 mm |       |

# SCREW-LINE

## Sistema de cirugía guiada

|                                                                                   | Artículo                                                                                                                                                  | Referencia  | Ø      | L                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------|
|  | <b>Set de fresa piloto Cirugía Guiada</b><br>refrigeración interna,<br>estéril (para fresa piloto<br>Ø 2.0 mm)<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5063.3311  | 3.3 mm | 11 mm (incl. 5 y 9 mm)**     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | J5063.3313  |        | 13 mm (incl. 5, 9 y 11 mm)** |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | J5064.3316* |        | 16 mm                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | J5063.4309  | 3.8 mm | 9 mm (incl. 5 mm)**          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           |             | 4.3 mm |                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | J5063.4311  | 3.8 mm | 11 mm (incl. 5 y 9 mm)**     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           |             | 4.3 mm |                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | J5063.4313  | 3.8 mm | 13 mm (incl. 5, 9 y 11 mm)** |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           |             | 4.3 mm |                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           | J5064.4316* | 3.8 mm | 16 mm                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                           |             | 4.3 mm |                              |

\* Fresa piloto Cirugía Guiada necesaria para la longitud de implante de 16 mm, después del uso previo obligatorio del set de la fresa piloto de 13 mm de longitud.

\*\* Todos los sets de la fresa piloto Cirugía Guiada incluyen una fresa piloto de 5 mm de longitud, y todas las demás fresas piloto necesarias para la longitud de implante seleccionada.

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                         | Referencia    | Ø      | L                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
|  | <b>Set quirúrgico Cirugía Guiada, SCREW-LINE</b><br>refrigeración interna,<br>estéril<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5065.3311    | 3.3 mm | 11 mm (incl. 5 y 9 mm)****     |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | J5065.3313    |        | 13 mm (incl. 5, 9 y 11 mm)**** |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | J5066.3316*** |        | 16 mm                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | J5065.3809    | 3.8 mm | 9 mm (incl. 5 mm)****          |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | J5065.3811    |        | 11 mm (incl. 5 y 9 mm)****     |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | J5065.3813    |        | 13 mm (incl. 5, 9 y 11 mm)**** |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | J5066.3816*** |        | 16 mm                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | J5065.4309    | 4.3 mm | 9 mm (incl. 5 mm)****          |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | J5065.4311    |        | 11 mm (incl. 5 y 9 mm)****     |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | J5065.4313    |        | 13 mm (incl. 5, 9 y 11 mm)**** |
|                                                                                     |                                                                                                                                  | J5066.4316*** |        | 16 mm                          |

\*\*\* Fresa de perfil Cirugía Guiada necesaria para la longitud de implante de 16 mm, después del uso previo obligatorio del set de cirugía Guide System de 13 mm de longitud.

\*\*\*\* Todos los sets Quirúrgicos Cirugía Guiada incluyen una fresa cónica de 5 mm de longitud, y todas las demás fresas de perfil necesarias para la longitud de implante seleccionada.

Todas las fresas de Cirugía Guiada y los bisturís circulares para SCREW-LINE son de usar y tirar.

### Notas

Los implantes CAMLOG® SCREW-LINE con las ref. K1045.xxxx/K1055.xxxx y poste de inserción roscado pueden utilizarse con SCREW-LINE Cirugía Guiada.

SCREW-LINE Cirugía Guiada solo puede utilizarse para diámetros de implante de 3,3/3,8/4,3 mm.

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                          | Referencia  | Ø      | L     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|
|    | <b>Fresa para hueso cortical</b><br><b>Cirugía Guiada SCREW-LINE</b><br>refrigeración interna, estéril<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5068.3311  | 3.3 mm | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5068.3313  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5068.3316  |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5068.3809  | 3.8 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5068.3811  |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5068.3813  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5068.3816  |        | 16 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5068.4309  | 4.3 mm | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5068.4311  |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5068.4313  |        | 13 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5068.4316  |        | 16 mm |
|   | <b>Bisturís circulares Cirugía Guiada</b><br>estéril<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                   | J5041.3303  | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5041.3803  | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J5041.4303  | 4.3 mm |       |
|  | <b>Casquillos guía Cirugía Guiada</b><br>altura 3.0 mm (2 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                 | J3734.3303* | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J3734.3803* | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | J3734.4303* | 4.3 mm |       |

\* para utilizar solo con los implantes SCREW-LINE con poste de inserción roscado

Todas las fresas de Cirugía Guiada y los bisturís circulares para SCREW-LINE son de usar y tirar.

# SCREW-LINE

## Sistema de cirugía guiada

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                  | Referencia | Ø      | L       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
|    | <b>Poste de inserción Cirugía Guiada CAMLOG®, roscado</b><br>para implante CAMLOG® Lab/<br>análogo de implante, incl. tornillo<br>de retención (2 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2026.3303 | 3.3 mm | -       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | K2026.3803 | 3.8 mm |         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | K2026.4303 | 4.3 mm |         |
|    | <b>Fresa para férula Cirugía Guiada</b><br>para casquillos guía Cirugía<br>Guiada<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                              | J3733.3300 | 3.3 mm | -       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | J3733.4300 | 3.8 mm |         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |            | 4.3 mm |         |
|  | <b>Instrumento de inserción Cirugía Guiada</b><br>para casquillos guía Cirugía<br>Guiada<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                       | J3716.3300 | 3.3 mm | -       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | J3716.4300 | 3.8 mm |         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |            | 4.3 mm |         |
|  | <b>Perno de control Cirugía Guiada</b><br>para casquillos guía Cirugía<br>Guiada<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                               | J5301.3300 | 3.3 mm | -       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | J5301.4300 | 3.8 mm |         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |            | 4.3 mm |         |
|  | <b>Prolongador de fresas</b><br>vástago ISO, para instrumentos<br>con refrigeración interna<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                    | J5002.0005 | -      | 26.6 mm |

# Instrumentos quirúrgicos generales

|                                                                                     | Artículo                                                                                      | Referencia | Ø            | L       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------|
|    | <b>Fresa redonda</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable            | J5050.2300 | 2.3 mm       | -       |
|    | <b>Fresa lanceta</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable            | B1012*     | 1.5 mm       | 30.0 mm |
|   | <b>Fresa piloto</b><br>sin cuello, reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5051.2003 | 2.0 mm       | -       |
|  | <b>Fresa piloto SCREW-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable  | J5051.2000 | 2.0 mm       | -       |
|  | <b>Fresa cónica SCREW-LINE</b><br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable  | J5051.2800 | 1.7 – 2.8 mm | -       |

\* Fabricante: AXIS biodental SA, Les Rosées 5, 2336 Les Bois, Suiza

## Instrumentos quirúrgicos generales

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                           | Referencia             | Ø      | L     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------|
|    | <b>Tope de profundidad SCREW-LINE</b><br>para fresa piloto (J5051.2000) y fresa<br>cónica (J5051.2800), reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5015.0009             | -      | 9 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | J5015.0011             |        | 11 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | J5015.0013             |        | 13 mm |
|    | <b>Fresa avellanadora</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                                               | Ø 5.0 mm<br>J5003.3350 | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | Ø 6.0 mm<br>J5003.4360 | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                        | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | Ø 7.0 mm<br>J5003.5070 | 5.0 mm |       |
|   | <b>Espiga guía CAMLOG® para<br/>fresa avellanadora</b><br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                               | J5002.3300             | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | J5002.3800             | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | J5002.4300             | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | J5002.5000             | 5.0 mm |       |
|  | <b>Avellanador</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                                                      | Ø 4.6 mm<br>J5006.3346 | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | Ø 5.2 mm<br>J5006.3852 | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | Ø 5.6 mm<br>J5006.4356 | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | Ø 6.3 mm<br>J5006.5063 | 5.0 mm |       |
|  | <b>Fresa para la exposición para<br/>el tornillo de cierre</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                          | J5004.3300             | 3.3 mm | -     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | J5004.3800             | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | J5004.4300             | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                    | J5004.5000             | 5.0 mm |       |



|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                           | Referencia | Dimensiones                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|    | <b>Paralelizador SCREW-LINE</b><br>con marcas de profundidad<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                         | J5300.2028 | $\varnothing$<br>1.7 – 2.8 mm/<br>2.0 mm |
|   | <b>Prolongador de fresas</b><br>vástago ISO (no está indicado para<br>fresas con refrigeración interna)<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5002.0006 | 26.5 mm                                  |
|  | <b>Adaptador manual, corto</b><br>para macho de rosca SCREW-LINE<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                        | J5322.0010 | 18.0 mm                                  |
|  | <b>Adaptador manual, largo</b><br>para macho de rosca SCREW-LINE<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                        | J5322.0011 | 23.0 mm                                  |

# Instrumentos quirúrgicos generales

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                              | Referencia  | Dimensiones |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|    | <b>Llave de inserción, extracorto</b><br>para implantes,<br>manual/carraca<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                 | J5300.0031* | 13.7 mm     |
|    | <b>Llave de inserción, corto</b><br>para implantes,<br>manual/carraca<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                      | J5300.0032* | 19.2 mm     |
|    | <b>Llave de inserción, largo</b><br>para implantes,<br>manual/carraca<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                      | J5300.0033* | 24.8 mm     |
|  | <b>Instrumento de inserción, corto</b><br>para implantes de tornillo, con<br>vástago ISO para contraángulo<br>(sin hexágono en el vástago)<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5300.0036* | 19.1 mm     |
|  | <b>Instrumento de inserción, largo</b><br>para implantes de tornillo, con<br>vástago ISO para contraángulo<br>(sin hexágono en el vástago)<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5300.0037* | 28.2 mm     |
|  | <b>Llave de inserción, corto</b><br>para implantes con vástago ISO<br>para contraángulo, con hexágo-<br>no en el vástago<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                   | J5300.0034* | 19.1 mm     |
|  | <b>Llave de inserción, largo</b><br>para implantes con vástago ISO<br>para contraángulo, con hexágo-<br>no en el vástago<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                   | J5300.0035* | 28.2 mm     |

\* para utilizar solo con los implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE con las ref. K1075.xxxx y K1076.xxxx, y los implantes CAMLOG® SCREW-LINE con las ref. K1044.xxxx, K1045.xxxx, K1046.xxxx, K1054.xxxx, K1055.xxxx y K1056.xxxx

|                                                                                     | Artículo                                                                                                          | Referencia   | Dimensiones |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|    | <b>Instrumento de inserción, cardánico (30°)</b><br>longitud ajustable<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5300.0038*  | -           |
|   | <b>Instrumento PickUp</b><br>mango para cambiar los implantes de sitio<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5300.0030** | -           |
|  | <b>Adaptador</b><br>vástago ISO para contraángulo/carraca<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable              | J5002.0011   | 21.0 mm     |

\* para utilizar solo con los implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE con las ref. K1075.xxxx y K1076.xxxx, y los implantes CAMLOG® SCREW-LINE con las ref. K1044.xxxx, K1045.xxxx, K1046.xxxx, K1054.xxxx, K1055.xxxx y K1056.xxxx.

\*\* para utilizar solo con los implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE (con poste de inserción a presión) con la ref. K1076.xxxx y los implantes CAMLOG® SCREW-LINE con las ref. K1042.xxxx, K1046.xxxx, K1052.xxxx y K1056.xxxx.

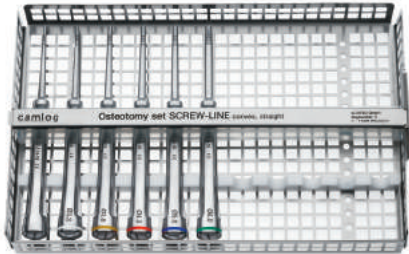
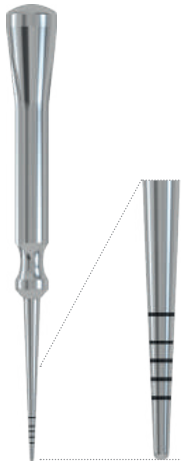
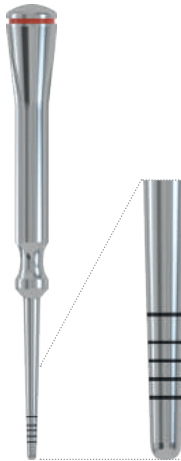
# Instrumentos quirúrgicos generales

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                             | Referencia | Ø      | Dimensiones |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
|    | <b>Llave guía</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                                         | J5302.0010 | -      | -           |
|    | <b>Adaptador CAMLOG® para implantes de tornillo, corto</b><br>para implantes CAMLOG®<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                      | K5302.3311 | 3.3 mm | 29.8 mm     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | K5302.3811 | 3.8 mm |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | K5302.4311 | 4.3 mm |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | K5302.6011 | 5.0 mm |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      |            | 6.0 mm |             |
|   | <b>Adaptador CAMLOG® para implantes de tornillo, largo</b><br>para implantes CAMLOG®<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                      | K5302.3310 | 3.3 mm | 34.8 mm     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | K5302.3810 | 3.8 mm |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | K5302.4310 | 4.3 mm |             |
|  | <b>Casquillo para colocar el instrumento auxiliar de inserción en el implante codificado por color</b><br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | J5302.3300 | 3.3 mm | -           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | J5302.3800 | 3.8 mm |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | J5302.4300 | 4.3 mm |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | J5302.5000 | 5.0 mm |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                      | J5302.6000 | 6.0 mm |             |
|  | <b>Destornillador hex, extracorto, manual/carraca</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                     | J5317.0510 | -      | 14.5 mm     |
|  | <b>Destornillador hex, corto, manual/carraca</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                          | J5317.0501 | -      | 22.5 mm     |
|  | <b>Destornillador hex, largo, manual/carraca</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                          | J5317.0502 | -      | 30.3 mm     |

|                                                                                     | Artículo                                                                                                        | Referencia | Dimensiones |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|    | <b>Destornillador</b><br>hex, corto, vástago ISO<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                     | J5317.0504 | 18.0 mm     |
|    | <b>Destornillador</b><br>hex, largo, vástago ISO<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                     | J5317.0503 | 26.0 mm     |
|   | <b>Destornillador manual, hex</b><br>sin conexión para carraca<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable       | J5317.0511 | 23.0 mm     |
|  | <b>Aguja de limpieza</b><br>para fresa con refrigeración<br>interna<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable  | J5002.0012 | -           |
|  | <b>Cánula de limpieza</b><br>para fresa con refrigeración<br>interna<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5002.0020 | -           |




# SCREW-LINE

## Kit de osteotomos

|                                                                                     | Artículo                                                                                                             | Referencia  | Ø               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|    | <b>Kit de osteotomos<br/>CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE</b><br>recto convexo<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5418.0020  | -               |
|   | <b>Pre-osteotomo SCREW-LINE</b><br>recto convexo<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                          | J5417.2800* | 1.7 –<br>2.8 mm |
|  | <b>Osteotomos SCREW-LINE</b><br>recto convexo<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                             | J5418.3300* | 3.3 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                      | J5418.3800* | 3.8 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                      | J5418.4300* | 4.3 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                      | J5418.5000* | 5.0 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                      | J5418.6000* | 6.0 mm          |

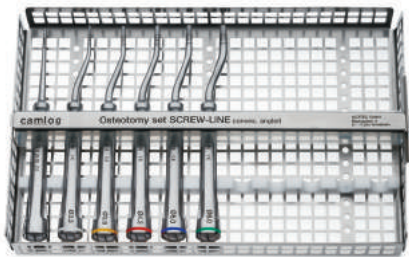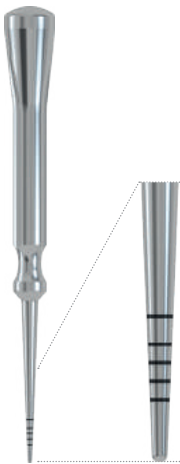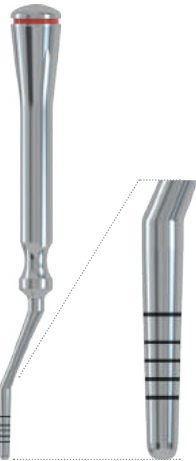\* Estos productos están disponibles también en el kit de osteotomos CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE recto convexo.






|                                                                                     | Artículo                                                                                                                 | Referencia  | Ø               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|    | <b>Kit de osteotomos<br/>CAMLOG®/CONOLOG® SCREW-LINE<br/>angulado convexo</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5418.0030  | -               |
|   | <b>Pre-osteotomo SCREW-LINE<br/>recto convexo</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                             | J5417.2800* | 1.7 –<br>2.8 mm |
|  | <b>Osteotomos SCREW-LINE<br/>angulado convexo</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                             | J5418.3310* | 3.3 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                          | J5418.3810* | 3.8 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                          | J5418.4310* | 4.3 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                          | J5418.5010* | 5.0 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                          | J5418.6010* | 6.0 mm          |




\* Estos productos están disponibles también en el kit de osteotomos CAMLOG®/CONOLOG® SCREW-LINE angulado convexo.

# SCREW-LINE
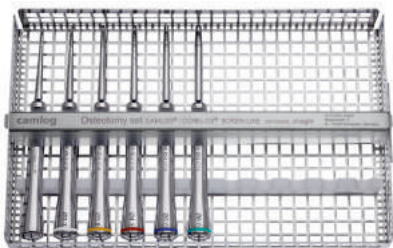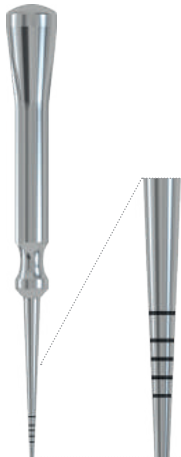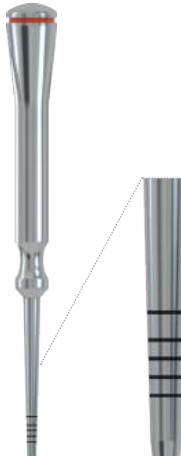
## Kit de osteotomos

|                                                                                     | Artículo                                                                                                             | Referencia  | Ø               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|    | <b>Kit de osteotomos<br/>CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE</b><br>recto cóncavo<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5420.0020  | -               |
|   | <b>Pre-osteotomo SCREW-LINE</b><br>recto cóncavo<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                          | J5419.2800* | 1.7 –<br>2.8 mm |
|  | <b>Osteotomos SCREW-LINE</b><br>recto cóncavo<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                             | J5420.3300* | 3.3 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                      | J5420.3800* | 3.8 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                      | J5420.4300* | 4.3 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                      | J5420.5000* | 5.0 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                      | J5420.6000* | 6.0 mm          |

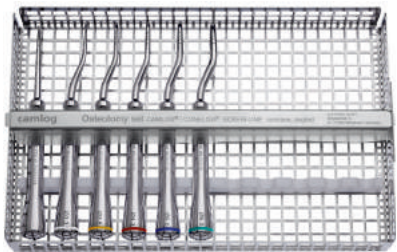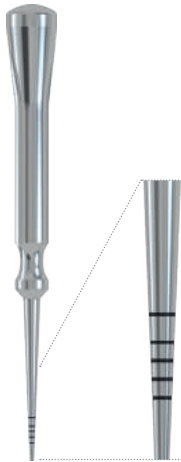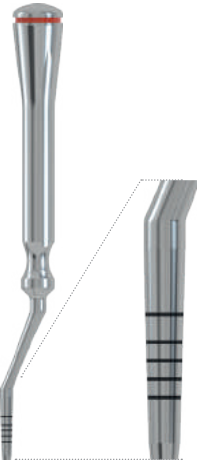\* Estos productos están disponibles también en el kit de osteotomos CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE recto cóncavo.

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                 | Referencia  | Ø               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|    | <b>Kit de osteotomos<br/>CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE<br/>angulado cóncavo</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5420.0030  | -               |
|   | <b>Pre-osteotomo SCREW-LINE<br/>recto cóncavo</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                             | J5419.2800* | 1.7 –<br>2.8 mm |
|  | <b>Osteotomos SCREW-LINE<br/>angulado cóncavo</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                             | J5420.3310* | 3.3 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                          | J5420.3810* | 3.8 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                          | J5420.4310* | 4.3 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                          | J5420.5010* | 5.0 mm          |
|                                                                                     |                                                                                                                          | J5420.6010* | 6.0 mm          |

\* Estos productos están disponibles también en el kit de osteotomos CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE angulado cóncavo.

## Set ALTApin

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                 | Referencia  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | <b>Set ALTApin</b><br>Sistema de fijación de la membrana,<br>reesterilizable<br><br><b>Material</b><br>Plástico/Aleación de titanio/<br>Acero inoxidable | M5600.0110  |
|    | <b>Bandeja ALTApin</b><br>(sin contenido)<br><br><b>Material</b><br>Plástico                                                                             | M5600.0210  |
|   | <b>Aplicador ALTApin, recto</b><br>incl. activador<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                            | M5100.0010* |
|  | <b>Aplicador ALTApin, angulado 90°</b><br>incl. activador<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                     | M5100.0030  |
|  | <b>Aplicador ALTApin, recto, extremo activo</b><br>incl. activador<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                            | M5200.0010  |

\* Estos productos están incluidos en el set ALTApin.

|                                                                                     | Artículo                                                                                | Referencia  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | <b>Aguja para pretaladrar ALTApin</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable        | M5100.0050* |
|   | <b>Fijador de membrana ALTApin</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable           | M5100.0070* |
|  | <b>Martillo quirúrgico ALTApin</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable/POM       | M5100.0100  |
|  | <b>Fresa desechable ALTApin, vástago ISO</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | M5500.0050  |

\* Estos productos están incluidos en el set ALTApin.

## Set ALTApin

|                                                                                   | Artículo                                                                                                                 | Referencia  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>Aguja para pretaladrar ALTApin, pieza insertada</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                        | M5200.0055* |
|  | <b>Cartucho ALTApin</b><br>7 chinchetas de titanio, estéril,<br>1 unidad<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio   | M1000.0050* |
|  | <b>Cartucho ALTApin</b><br>7 chinchetas de titanio, estéril,<br>3 unidades<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | M1000.0100  |

\* Estos productos están incluidos en el set ALTApin.

## Tornillo de cierre

|                                                                                   | Artículo                                                                                     | Referencia | Ø      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  | <b>Tornillo de cierre del implante CAMLOG®</b><br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | J2019.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                   |                                                                                              | J2019.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                   |                                                                                              | J2019.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                   |                                                                                              | J2019.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                   |                                                                                              | J2019.6000 | 6.0 mm |

## Casquillos de cicatrización

|                                                                                     | Artículo                                                                                                    | Referencia  | Ø      | AG     | G Ø    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|   | <b>Casquillo de cicatrización CAMLOG®, cilíndrico estéril</b><br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | J2015.3320  | 3.3 mm | 2.0 mm | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.3340  |        | 4.0 mm | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.3820  | 3.8 mm | 2.0 mm | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.3840  |        | 4.0 mm | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.3860* | 4.3 mm | 6.0 mm | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.4320  |        | 2.0 mm | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.4340  | 5.0 mm | 4.0 mm | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.4360* |        | 6.0 mm | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.5020  | 6.0 mm | 2.0 mm | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.5040  |        | 4.0 mm | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.5060* | 6.0 mm | 6.0 mm | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.6020  |        | 2.0 mm | 6.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.6040  | 6.0 mm | 4.0 mm | 6.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2015.6060* |        | 6.0 mm | 6.0 mm |
|  | <b>Casquillo de cicatrización CAMLOG®, wide body estéril</b><br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio  | J2014.3320  | 3.3 mm | 2.0 mm | 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.3340  |        | 4.0 mm | 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.3820  | 3.8 mm | 2.0 mm | 4.9 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.3840  |        | 4.0 mm | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.3860  | 4.3 mm | 6.0 mm | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.4320  |        | 2.0 mm | 5.4 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.4340  | 5.0 mm | 4.0 mm | 5.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.4360  |        | 6.0 mm | 5.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.5020  | 6.0 mm | 2.0 mm | 6.1 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.5040  |        | 4.0 mm | 6.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.5060  | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.6020  |        | 2.0 mm | 7.1 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.6040  | 6.0 mm | 4.0 mm | 7.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2014.6060  |        | 6.0 mm | 7.2 mm |
|  | <b>Casquillo de cicatrización CAMLOG®, bottleneck estéril</b><br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | J2011.3340  | 3.3 mm | 4.0 mm | 3.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2011.3840  | 3.8 mm | 4.0 mm | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2011.3860  |        | 6.0 mm | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2011.4340  | 4.3 mm | 4.0 mm | 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2011.4360  |        | 6.0 mm | 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2011.5040  | 5.0 mm | 4.0 mm | 5.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2011.5060  |        | 6.0 mm | 5.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2011.6040  | 6.0 mm | 4.0 mm | 6.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                             | J2011.6060  |        | 6.0 mm | 6.2 mm |

\* indicado para el registro de la mordida



# Casquillos de cicatrización

## Platform Switching

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                          | Referencia  | Ø      | AG     | G Ø    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|    | <b>Casquillo de cicatrización PS CAMLOG®, cilíndrico</b><br>estéril, para Platform Switching con implantes CAMLOG® con referencia K<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2005.3820  | 3.8 mm | 2.0 mm | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2005.3840  |        | 4.0 mm | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2005.3860* |        | 6.0 mm | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2005.4320  | 4.3 mm | 2.0 mm | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2005.4340  |        | 4.0 mm | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2005.4360* |        | 6.0 mm | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2005.5020  | 5.0 mm | 2.0 mm | 4.4 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2005.5040  |        | 4.0 mm | 4.4 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2005.5060* |        | 6.0 mm | 4.4 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2005.6020  | 6.0 mm | 2.0 mm | 5.1 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2005.6040  |        | 4.0 mm | 5.1 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2005.6060* |        | 6.0 mm | 5.1 mm |
|    | <b>Casquillo de cicatrización PS CAMLOG®, wide body</b><br>estéril, para Platform Switching con implantes CAMLOG® con referencia K<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio  | K2004.3840  | 3.8 mm | 4.0 mm | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2004.3860  |        | 6.0 mm | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2004.4340  | 4.3 mm | 4.0 mm | 5.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2004.4360  |        | 6.0 mm | 5.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2004.5040  | 5.0 mm | 4.0 mm | 6.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2004.5060  |        | 6.0 mm | 6.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2004.6040  | 6.0 mm | 4.0 mm | 7.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2004.6060  |        | 6.0 mm | 7.2 mm |
|  | <b>Casquillo de cicatrización PS CAMLOG®, bottleneck</b><br>estéril, para Platform Switching con implantes CAMLOG® con referencia K<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2001.3840  | 3.8 mm | 4.0 mm | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2001.3860  |        | 6.0 mm | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2001.4340  | 4.3 mm | 4.0 mm | 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2001.4360  |        | 6.0 mm | 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2001.5040  | 5.0 mm | 4.0 mm | 5.2 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   | K2001.5060  |        | 6.0 mm | 5.2 mm |

\* indicado para el registro de la mordida



## Toma de impresión

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                                                                            | Referencia | Ø      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|    | <b>Casquillos de toma de impresión CAMLOG®, cubeta abierta</b><br>incl. tornillo de retención (el tornillo de retención puede acortarse extraoralmente en 3 mm con un destornillador hex)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                             | K2121.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2121.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2121.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2121.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2121.6000 | 6.0 mm |
|    | <b>Casquillos de toma de impresión CAMLOG®, cubeta cerrada</b><br>incl. retenedor, casquillo para registro de mordida y tornillo de retención<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/POM                                                                     | K2110.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2110.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2110.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2110.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2110.6000 | 6.0 mm |
|  | <b>Casquillos de toma de impresión PS CAMLOG®, cubeta abierta, para Platform Switching</b><br>incl. tornillo de retención (el tornillo de retención puede acortarse extraoralmente en 3 mm con un destornillador hex)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2119.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2119.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2119.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2119.6000 | 6.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |
|  | <b>Casquillos de toma de impresión PS CAMLOG®, cubeta cerrada, para Platform Switching</b><br>incl. retenedor, casquillo para registro de mordida y tornillo de retención<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/POM                                         | K2109.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2109.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2109.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | K2109.6000 | 6.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |
|  | <b>Retenedor para casquillos de toma de impresión, cubeta cerrada</b><br>(5 unidades)<br><br><b>Material</b><br>POM                                                                                                                                                 | J2111.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | J2111.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | J2111.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | J2111.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | J2111.6000 | 6.0 mm |

## Registro de mordida

|                                                                                                 | Artículo                                                                                                                                                                                                       | Referencia | Ø      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  <p>8.1 mm</p> | <b>Pilar para el registro de la mordida CAMLOG®</b><br>incl. tornillo de retención y casquillo para registro de la mordida (también para Platform Switching)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/POM | J2140.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | J2140.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | J2140.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | J2140.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | J2140.6000 | 6.0 mm |
|                | <b>Casquillo para registro de mordida</b><br>(5 unidades)<br><br><b>Material</b><br>POM                                                                                                                        | J2112.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | J2112.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | J2112.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | J2112.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | J2112.6000 | 6.0 mm |

## Fabricación del modelo

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                  | Referencia | Ø      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  | <b>Análogo de laboratorio CAMLOG®</b><br>para modelos colados<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                               | K3010.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K3010.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K3010.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K3010.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K3010.6000 | 6.0 mm |
|  | <b>Análogo de implante CAMLOG®</b><br>para modelos impresos y colados<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                       | K3025.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K3025.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K3025.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K3025.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K3025.6000 | 6.0 mm |
|  | <b>DIM Analog® para el sistema de implantes CAMLOG®</b><br>para modelos impresos, incl. tornillo moleteado<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/Acero inoxidable | K3012.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K3012.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K3012.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K3012.6000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 6.0 mm |

## Pilares provisionales

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                    | Referencia | Ø       | AG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----|
|    | <b>Pilar provisional CAMLOG®, PEEK</b><br>individualizable,<br>incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>PEEK                                       | K2241.3800 | 3.8 mm  | -  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | K2241.4300 | 4.3 mm  |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | K2241.5000 | 5.0 mm  |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | K2241.6000 | 6.0 mm  |    |
|    | <b>Pilar provisional PS CAMLOG®, PEEK,</b><br><b>para Platform Switching</b><br>individualizable,<br>incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>PEEK | K2208.3800 | 3.8 mm  | -  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | K2208.4300 | 4.3 mm  |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | K2208.5000 | 5.0 mm  |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | K2208.6000 | 6.0 mm  |    |
|   | <b>Pilar provisional CAMLOG®,</b><br><b>corona, aleación de titanio</b><br>incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio            | K2239.3300 | 3.3 mm* | -  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | K2239.3800 | 3.8 mm  |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | K2239.4300 | 4.3 mm  |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | K2239.5000 | 5.0 mm  |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | K2239.6000 | 6.0 mm  |    |
|  | <b>Pilar provisional CAMLOG®,</b><br><b>punto, aleación de titanio</b><br>incl. tornillo de<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                   | J2339.3300 | 3.3 mm  | -  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | J2339.3800 | 3.8 mm  |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | J2339.4300 | 4.3 mm  |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | J2339.5000 | 5.0 mm  |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             | J2339.6000 | 6.0 mm  |    |

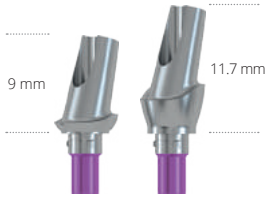
## Pilares Esthomic®

### Rehabilitaciones con coronas y puentes cementados

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                       | Referencia | Ø      | AG           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|
|  | <b>Pilares CAMLOG® Esthomic®, recto</b><br>individualizable,<br>incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                          | K2226.3810 | 3.8 mm | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2226.3830 |        | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2226.4310 | 4.3 mm | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2226.4330 |        | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2226.5010 | 5.0 mm | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2226.5030 |        | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2226.6010 | 6.0 mm | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2226.6030 |        | 3.0 – 4.5 mm |
|  | <b>Pilares CAMLOG® Esthomic®,</b><br><b>angulado 15°, tipo A</b><br>individualizable,<br>incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2227.3810 | 3.8 mm | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2227.3830 |        | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2227.4310 | 4.3 mm | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2227.4330 |        | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2227.5010 | 5.0 mm | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2227.5030 |        | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2227.6010 | 6.0 mm | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                | K2227.6030 |        | 3.0 – 4.5 mm |

Los pilares PS CAMLOG® sólo se deben usar con implantes CAMLOG® con referencia K.

\* solo para restauraciones de corona en la zona de los incisivos laterales superiores y los incisivos laterales y centrales inferiores

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                              | Referencia | Ø       | AG           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|    | <b>Pilares CAMLOG® Esthomic®,<br/>angulado 15°, tipo B</b><br>individualizable, incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                 | K2228.3810 | 3.8 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2228.3830 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2228.4310 | 4.3 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2228.4330 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2228.5010 | 5.0 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2228.5030 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2228.6010 | 6.0 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2228.6030 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|    | <b>Pilares CAMLOG® Esthomic®,<br/>angulado 20°, tipo A</b><br>individualizable, incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                 | K2231.3810 | 3.8 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2231.3830 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2231.4310 | 4.3 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2231.4330 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2231.5010 | 5.0 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2231.5030 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2231.6010 | 6.0 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2231.6030 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|   | <b>Pilares CAMLOG® Esthomic®,<br/>angulado 20°, tipo B</b><br>individualizable, incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                 | K2232.3810 | 3.8 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2232.3830 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2232.4310 | 4.3 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2232.4330 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2232.5010 | 5.0 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2232.5030 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2232.6010 | 6.0 mm  | 1.0 – 1.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2232.6030 |         | 3.0 – 4.5 mm |
|  | <b>Pilares CAMLOG® Esthomic®, Inset</b><br>individualizable, incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                    | K2235.3315 | 3.3 mm* | 1.5 – 2.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2235.3815 | 3.8 mm  |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2235.4315 | 4.3 mm  |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2235.5015 | 5.0 mm  |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2235.6015 | 6.0 mm  |              |
|  | <b>Pilares PS CAMLOG® Esthomic®,<br/>recto, para Platform Switching</b><br>individualizable, incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                    | K2202.3815 | 3.8 mm  | 1.5 – 2.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2202.4315 | 4.3 mm  |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2202.5015 | 5.0 mm  |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2202.6015 | 6.0 mm  |              |
|  | <b>Pilares PS CAMLOG® Esthomic®,<br/>angulado 15°, tipo A,<br/>para Platform Switching</b><br>individualizable, incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2203.3815 | 3.8 mm  | 1.5 – 2.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2203.4315 | 4.3 mm  |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2203.5015 | 5.0 mm  |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2203.6015 | 6.0 mm  |              |
|  | <b>Pilares PS CAMLOG® Esthomic®,<br/>angulado 15°, tipo B,<br/>para Platform Switching</b><br>individualizable, incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2204.3815 | 3.8 mm  | 1.5 – 2.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2204.4315 | 4.3 mm  |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2204.5015 | 5.0 mm  |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | K2204.6015 | 6.0 mm  |              |

Los pilares PS CAMLOG® sólo se deben usar con implantes CAMLOG® con referencia K.

\* solo para restauraciones de corona en la zona de los incisivos laterales superiores y los incisivos laterales y centrales inferiores

# Prótesis CAD/CAM

## Rehabilitaciones con coronas, puentes y híbridas

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Referencia | Ø       | AG     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
|    | <b>Base de titanio CAD/CAM CAMLOG®, corona</b><br>base adhesiva para prótesis dentales fabricadas de forma individual mediante CAD/CAM, incl. tornillo de pilar y poste de ayuda para cementar (POM)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/POM                            | K2244.3348 | 3.3 mm* | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K2244.3848 | 3.8 mm  |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K2244.4348 | 4.3 mm  |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K2244.5048 | 5.0 mm  |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K2244.6048 | 6.0 mm  |        |
|    | <b>Base de titanio CAD/CAM CAMLOG®, puente</b><br>base adhesiva para prótesis dentales fabricadas de forma individual mediante CAD/CAM, incl. tornillo de pilar y poste de ayuda para cementar (POM)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/POM                            | J2344.3348 | 3.3 mm  | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2344.3848 | 3.8 mm  |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2344.4348 | 4.3 mm  |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2344.5048 | 5.0 mm  |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2344.6048 | 6.0 mm  |        |
|  | <b>Base de titanio CAD/CAM PS CAMLOG® para Platform Switching, corona</b><br>base adhesiva para prótesis dentales fabricadas de forma individual mediante CAD/CAM, incl. tornillo de pilar y poste de ayuda para cementar (POM)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/POM | K2210.3808 | 3.8 mm  | 0.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K2210.4308 | 4.3 mm  |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K2210.5008 | 5.0 mm  |        |

Las geometrías de las bases de titanio CAD/CAM CAMLOG® ya están como librería CAD para los sistemas CAD dentales líderes. Las librerías se pueden descargar de forma gratuita en: [www.camlog.com/en/media-center/cad-libraries](http://www.camlog.com/en/media-center/cad-libraries).

\* sólo para restauraciones con coronas en la zona de los incisivos superiores laterales e inferiores laterales y centrales



|                                                                                                    | Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Referencia  | Ø      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  <p>11 mm</p>     | <b>Ayuda para el modelado CAMLOG® para base de titanio CAD/CAM CAMLOG</b><br>calcinable, para la fabricación de mesoestructuras y coronas<br><br><b>Material</b><br>POM                                                                                                                                              | J2244.3302  | 3.3 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J2244.3802  | 3.8 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J2244.4302  | 4.3 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J2244.5002  | 5.0 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J2244.6002  | 6.0 mm |
|  <p>10 mm</p>     | <b>Scanbody CAMLOG®**</b><br>para la localización óptica tridimensional de los implantes CAMLOG® en la boca y de los análogos de laboratorio CAMLOG® en el modelo de trabajo, incl. tornillo de pilar, estéril®<br><br>No es compatible con los sistemas CEREC ni inLab de Sirona®<br><br><b>Material</b><br>PEEK    | K2610.3310  | 3.3 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K2610.3810* | 3.8 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K2610.4310* | 4.3 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K2610.6010* | 5.0 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 6.0 mm |
|  <p>10.2 mm</p> | <b>ScanPost CAMLOG® se emplean junto con los Scanbodies de Sirona®</b><br>para el registro digital de la posición de los implantes CAMLOG® o de los análogos de laboratorio y para demás procesamiento en los sistemas Sirona® CEREC e inLab, incl. tornillo de pilar.<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2620.3306  | 3.3 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K2620.3806* | 3.8 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K2620.4306* | 4.3 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K2620.5006* | 5.0 mm |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K2620.6006* | 6.0 mm |

\*\* Compruebe si Scanbody CAMLOG® está disponible en el software CAD utilizado. Las librerías CAD para los componentes protésicos CAMLOG® se pueden descargar de forma gratuita en:  
[www.camlog.com/en/media-center/cad-libraries](http://www.camlog.com/en/media-center/cad-libraries).

**Scanbodies de Sirona® tamaño S aptos para postes de escaneado CAMLOG® y bases de titanio CAD/CAM CAMLOG® corona con Ø 3.3/3.8/4.3 mm:**

Para Omnicam®: referencia 6431311

Para Bluecam®: referencia 6431295

**Scanbodies de Sirona® tamaño L aptos para postes de escaneado CAMLOG® y bases de titanio CAD/CAM CAMLOG® corona con Ø 5.0/6.0 mm:**

Para Omnicam®: referencia 6431329

Para Bluecam®: referencia 6431303

Los scanbodies de Sirona® están disponibles en Dentsply Sirona®.

\* indicado también para Platform Switching

## Blank de titanio

Para el mecanizado por fresado de pilares y casquillos de cicatrización personalizados de una pieza utilizando la tecnología CAD/CAM

|                                                                                   | Artículo                                                                                                                                                                                             | Referencia | Ø      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  | <b>Blank de titanio para CAM CAMLOG®, tipo IAC*</b><br>Ø 12 mm, longitud 12.5 mm (2 unidades), envío incl. 2 tornillos de pilar envasados por separado<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2411.3313 | 3.3 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | K2411.3813 | 3.8 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | K2411.4313 | 4.3 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | K2411.6013 | 5.0 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |            | 6.0 mm |
|  | <b>Blank de titanio para CAM CAMLOG®, tipo ME**</b><br>Ø 12 mm, longitud 20 mm (2 unidades), envío incl. 2 tornillos de pilar envasados por separado<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio   | K2421.3320 | 3.3 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | K2421.3820 | 3.8 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | K2421.4320 | 4.3 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | K2421.5020 | 5.0 mm |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | K2421.6020 | 6.0 mm |

## Accesorios para blank de titanio CAM, tipo IAC

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                         | Referencia | Ø      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|  | <b>Soporte CAMLOG® para blank para CAM, tipo IAC*</b><br>Ø 6 mm, longitud 17 mm, incl. 2 tornillos de retención CAMLOG® para blank para CAM, tipo IAC<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | K3720.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | K3720.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | K3720.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | K3720.6000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |            | 6.0 mm |

### Tipo IAC\*

Para el mecanizado mediante fresado, el blank de titanio para CAM tipo IAC se fija en la unión implante-pilar sobre el soporte CAMLOG® para los blanks para CAM. El usuario debe facilitar el soporte o adaptador específico de la máquina para el alojamiento, así como las estrategias de fresado.

### Tipo ME\*\*

Para el fresado, el blank de titanio CAM tipo ME se fija con la muesca frontal de su sección cilíndrica mediante un portafresas para pilares PreFace® de Medentika®. Estos portafresas están disponibles a través del fabricante de determinadas fresadoras. Los blanks de titanio CAM requieren librerías CAM específicas del producto, que se encuentran disponibles para los programas CAM seleccionados bajo previa solicitud al proveedor del software.

Las geometrías de los blanks de titanio CAM CAMLOG® están disponibles en formato de librería CAD para los principales sistemas CAD. Las librerías se pueden descargar de forma gratuita en: [www.camlog.com/en/media-center/cad-libraries](http://www.camlog.com/en/media-center/cad-libraries).

Medentika® y PreFace® son marcas registradas de la compañía Medentika GmbH, D-Hügelsheim.

## Pilares universal

### Rehabilitaciones con coronas y puentes cementados

|                                                                                   | Artículo                                                                                                                                                | Referencia | Ø       | Dimensiones |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
|  | <b>Pilar universal CAMLOG®</b><br>individualizable, incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                               | K2211.3300 | 3.3 mm* | -           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                         | K2211.3800 | 3.8 mm  |             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                         | K2211.4300 | 4.3 mm  |             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                         | K2211.5000 | 5.0 mm  |             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                         | K2211.6000 | 6.0 mm  |             |
|  | <b>Pilar universal PS CAMLOG®</b><br>para Platform Switching<br>individualizable, incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2201.3800 | 3.8 mm  | -           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                         | K2201.4300 | 4.3 mm  |             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                         | K2201.5000 | 5.0 mm  |             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                         | K2201.6000 | 6.0 mm  |             |

## Pilares de oro

### Rehabilitaciones con coronas y puentes cementados

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                        | Referencia | Ø       | Peso del metal noble |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|
|  | <b>Pilar de oro CAMLOG®</b><br>sobrecolable, incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de oro sobrecolable/POM | K2246.3300 | 3.3 mm* | aprox. 0.42 g        |
|                                                                                     |                                                                                                                                 | K2246.3800 | 3.8 mm  | aprox. 0.46 g        |
|                                                                                     |                                                                                                                                 | K2246.4300 | 4.3 mm  | aprox. 0.65 g        |
|                                                                                     |                                                                                                                                 | K2246.5000 | 5.0 mm  | aprox. 0.81 g        |
|                                                                                     |                                                                                                                                 | K2246.6000 | 6.0 mm  | aprox. 0.89 g        |

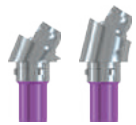
\* sólo para restauraciones con coronas en la zona de los incisivos superiores laterales e inferiores laterales y centrales (Ø 3.3 mm no para restauraciones de coronas telescópicas)

# Sistema protésico Logfit®

## Rehabilitaciones con coronas y puentes cementados

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                | Referencia | Ø      | AG     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|    | <b>Pilares CAMLOG® Logfit®</b><br>incl. tornillo de pilar<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                 | K2550.3808 | 3.8 mm | 0.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                         | K2550.3815 |        | 1.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                         | K2550.4308 | 4.3 mm | 0.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                         | K2550.4315 |        | 1.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                         | K2550.5008 | 5.0 mm | 0.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                         | K2550.5015 |        | 1.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                         | K2550.6008 | 6.0 mm | 0.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                         | K2550.6015 |        | 1.5 mm |
|    | <b>Casquillo de toma de impresión Logfit®</b><br><br><b>Material</b><br>POM                                             | J2551.4300 | 3.8 mm | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                         |            | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                         | J2551.6000 | 5.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                         |            | 6.0 mm |        |
|   | <b>Análogos Logfit®</b><br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                   | J2552.4300 | 3.8 mm | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                         |            | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                         | J2552.6000 | 5.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                         |            | 6.0 mm |        |
|  | <b>Casquillo calcinable Logfit®, para coronas (con bloqueo antirrotatorio) calcinable</b><br><br><b>Material</b><br>POM | J2553.4302 | 3.8 mm | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                         |            | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                         | J2553.6002 | 5.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                         |            | 6.0 mm |        |
|  | <b>Casquillo calcinable Logfit®, para puentes (sin bloqueo antirrotatorio) calcinable</b><br><br><b>Material</b><br>POM | J2553.4301 | 3.8 mm | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                         |            | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                         | J2553.6001 | 5.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                         |            | 6.0 mm |        |

## Prótesis atornilladas por oclusal

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                  | Referencia | Tipo | Ø      | AG     | PP Ø   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|--------|--------|
|    | <b>Pilares de barra CAMLOG®, recto estéril</b><br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                              | J2254.3305 | -    | 3.3 mm | 0.5 mm | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | J2254.3320 |      |        | 2.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | J2254.3805 |      | 3.8 mm | 0.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | J2254.3820 |      |        | 2.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | J2254.3840 |      |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | J2254.4305 |      | 4.3 mm | 0.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | J2254.4320 |      |        | 2.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | J2254.4340 |      |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | J2254.5005 |      | 5.0 mm | 0.5 mm | 6.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | J2254.5020 |      |        | 2.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | J2254.5040 |      |        | 4.0 mm |        |
|   | <b>Pilares de barra CAMLOG®, angulado 17°</b><br>incl. tornillo de pilar con cabeza reducida, anodizado azul claro, estéril<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2256.3325 | A    | 3.3 mm | 2.5 mm | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2256.3340 | A    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2257.3325 | B    |        | 2.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2257.3340 | B    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2256.3825 | A    | 3.8 mm | 2.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2256.3840 | A    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2257.3825 | B    |        | 2.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2257.3840 | B    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2256.4325 | A    | 4.3 mm | 2.5 mm | 6.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2256.4340 | A    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2257.4325 | B    |        | 2.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2257.4340 | B    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2256.5025 | A    | 5.0 mm | 2.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2256.5040 | A    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2257.5025 | B    |        | 2.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2257.5040 | B    |        | 4.0 mm |        |
|  | <b>Pilares de barra CAMLOG®, angulado 30°</b><br>incl. tornillo de pilar con cabeza reducida, anodizado azul claro, estéril<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2258.3325 | A    | 3.3 mm | 2.5 mm | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2258.3340 | A    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2259.3325 | B    |        | 2.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2259.3340 | B    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2258.3825 | A    | 3.8 mm | 2.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2258.3840 | A    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2259.3825 | B    |        | 2.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2259.3840 | B    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2258.4325 | A    | 4.3 mm | 2.5 mm | 6.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2258.4340 | A    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2259.4325 | B    |        | 2.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2259.4340 | B    |        | 4.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2258.5035 | A    | 5.0 mm | 3.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2258.5050 | A    |        | 5.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2259.5035 | B    |        | 3.5 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | K2259.5050 | B    |        | 5.0 mm |        |

Tipo A y B ver la página 7

**Prótesis atornilladas por oclusal**

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                            | Referencia   | Ø                    | Dimensiones |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
|    | <b>Plantilla de orientación para COMFOUR®</b><br>para fresa piloto Ø 2,0 mm<br><b>Material</b><br>Nitinol                                                                           | J3551.0001   | -                    | -           |
|    | <b>Componente auxiliar</b><br>para la alineación para pilares de barra angulados, para postes de inserción<br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                   | J2269.0003*  | -                    | 17°         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J2269.0004*  | -                    | 30°         |
|    |                                                                                                                                                                                     | J2269.0005** | -                    | 17°         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J2269.0006** | -                    | 30°         |
|    | <b>Indicador de la altura gingival, recto</b><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                                             | J3550.3300   | 3.3 mm               | -           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J3550.3800   | 3.8 mm               |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J3550.4300   | 4.3 mm               |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J3550.5000   | 5.0 mm               |             |
|    | <b>Instrumento de inserción para casquillos de toma de impresión y casquillos de cicatrización para pilares de barra</b><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                     | J5300.0027   | 3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm | 19.1 mm     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J5300.0028   | 5.0 mm               |             |
|  | <b>Casquillos de cicatrización para pilar de barra</b><br>parcialmente anodizado azul claro, estéril<br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                      | J2029.4300   | 3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm | -           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J2029.6000   | 5.0 mm               |             |
|  | <b>Casquillo de toma de impresión, corto, para pilar de barra, cubeta cerrada (puente/barra)</b><br>anodizado parcial azul claro, estéril<br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | J2129.4300   | 3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm | 6.5 mm      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J2129.6000   | 5.0 mm               | 7.0 mm      |
|  | <b>Casquillo de toma de impresión, largo, para pilar de barra, cubeta cerrada (puente/barra)</b><br>anodizado parcial azul claro, estéril<br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | J2129.4310   | 3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm | 11.0 mm     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J2129.6010   | 5.0 mm               |             |
|  | <b>Análogo de laboratorio de barra para soldar para pilares de barra</b><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                     | J3020.4300   | 3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm | -           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J3020.6000   | 5.0 mm               |             |
|  | <b>Análogo de implante de barra para pilares de barra</b><br>para modelos impresos y colados<br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                 | J3025.4300   | 3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm | -           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J3025.6000   | 5.0 mm               |             |
|  | <b>Casquillo de escaneado para pilares de barra</b><br>incl. tornillo transoclusal anodizado azul claro, estéril<br><b>Material</b><br>PEEK                                         | J2610.4300   | 3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm | -           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J2610.6000   | 5.0 mm               |             |
|  | <b>Casquillo de titanio para pilar de barra, para corona</b><br>incl. tornillo transoclusal anodizado azul claro, estéril<br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                 | J2259.4301   | 3.3 mm 3.8 mm 4.3 mm | -           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | J2259.6001   | 5.0 mm               |             |

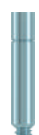
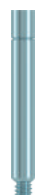
\* solo para el uso con los implantes CAMLOG® con referencia K1032.xxxx, K1042.xxxx, K1052.xxxx y K1053.xxxx.

\*\* solo para el uso con los implantes CAMLOG® con referencia K1044.xxxx, K1054.xxxx, K1075.xxxx y K1076.xxxx.

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Referencia | Ø      |        |        | Dimensiones   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|---------------|
|    | <b>Casquillo de titanio para pilar de barra, para puente</b><br>incl. tornillo transoclusal, anodizado azul claro, estéril                                                                                                                                                    | J2259.4302 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | -             |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                                                                                                                                                                                        | J2259.6002 | 5.0 mm |        |        |               |
|    | <b>Cazoleta de titanio sin retención para pilar de barra, para puente</b><br>incl. tornillo transoclusal, anodizado azul claro                                                                                                                                                | J2259.4322 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | -             |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                                                                                                                                                                                        | J2259.6022 | 5.0 mm |        |        |               |
|    | <b>Base de corona para pilar de barra</b><br>calcinable                                                                                                                                                                                                                       | J2256.4306 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | -             |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>POM                                                                                                                                                                                                                                                        | J2256.6006 | 5.0 mm |        |        |               |
|   | <b>Base para pilar de barra</b><br>calcinable                                                                                                                                                                                                                                 | J2257.4301 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | -             |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>POM                                                                                                                                                                                                                                                        | J2257.6001 | 5.0 mm |        |        |               |
|  | <b>Base para pilar de barra</b><br>sobrecolable                                                                                                                                                                                                                               | J2263.4300 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | aprox. 0.48 g |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Cast-on gold alloy/POM                                                                                                                                                                                                                                     | J2263.6000 | 5.0 mm |        |        | aprox. 0.70 g |
|  | <b>Base para pilar de barra</b><br>soldable                                                                                                                                                                                                                                   | J2258.4300 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | -             |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Solderable gold alloy                                                                                                                                                                                                                                      | J2258.6000 | 5.0 mm |        |        |               |
|  | <b>Base para pilar de barra, titanio</b><br>soldable por láser                                                                                                                                                                                                                | J2262.4300 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | -             |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Titanio de grado 4                                                                                                                                                                                                                                         | J2262.6000 | 5.0 mm |        |        |               |
|  | <b>Base adhesiva de titanio para pilar de barra</b><br>Passive-Fit                                                                                                                                                                                                            | J2260.4301 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | -             |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                                                                                                                                                                                        | J2260.6001 | 5.0 mm |        |        |               |
|  | <b>Casquillo de barra para base adhesiva de titanio</b><br>calcinable, Passive-Fit, incl. tornillo transoclusal para pilar de barra, hex, (solo para la fabricación de la estructura colada en combinación con casquillos de barra para base adhesiva de titanio Passive-Fit) | J2261.4301 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | -             |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>POM                                                                                                                                                                                                                                                        | J2261.6001 | 5.0 mm |        |        |               |



## Prótesis atornilladas por oclusal

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                     | Referencia | Ø      |        |        | Rosca |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|
|    | <b>Protector para pulido para casquillos y bases para pilar de barra</b>                                                     | J3021.4300 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | M 1.6 |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                                       | J3021.6000 | 5.0 mm |        |        | M 2.0 |
|    | <b>Aditamento Locator® para pilar de barra</b>                                                                               | J2253.4301 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | -     |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Aleación de titanio/TiN                                                                                   | J2253.6001 | 5.0 mm |        |        |       |
|    | <b>Tornillo de pilar CAMLOG® con cabeza reducida hex, anodizado azul claro</b>                                               | J4004.1601 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | M 1.6 |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                                       | J4004.2001 | 5.0 mm |        |        | M 2.0 |
|   | <b>Tornillo de laboratorio CAMLOG® con cabeza reducida hex, anodizado azul claro</b>                                         | J4004.1600 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | M 1.6 |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                                       | J4004.2000 | 5.0 mm |        |        | M 2.0 |
|  | <b>Tornillo transoclusal, para pilar de barra hex, anodizado azul claro (para la fijación definitiva de la restauración)</b> | J4012.1601 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | M 1.6 |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                                       | J4012.2001 | 5.0 mm |        |        | M 2.0 |
|  | <b>Tornillo transoclusal de laboratorio, para pilar de barra hex, anodizado marrón</b>                                       | J4013.1601 | 3.3 mm | 3.8 mm | 4.3 mm | M 1.6 |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                                       | J4013.2001 | 5.0 mm |        |        | M 2.0 |
|  | <b>Tornillo, hex, longitud 10 mm acortable en 2.5 mm, anodizado azul claro, estéril</b>                                      | J4012.1610 | -      |        |        | M 1.6 |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                                       | J4012.2010 |        |        |        | M 2.0 |
|  | <b>Tornillo, hex, longitud 15 mm acortable en 2.5 mm, anodizado azul claro, estéril</b>                                      | J4012.1615 | -      |        |        | M 1.6 |
|                                                                                     | <b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                                                       | J4012.2015 |        |        |        | M 2.0 |

Los tornillos de laboratorio no deben usarse en el paciente.

|                                                                                    | Artículo                                                                                                                                 | Referencia | Ø | Rosca |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|
|   | <b>Tornillo, hex, longitud 20 mm</b><br>acortable en 2.5 mm, anodizado azul claro, estéril<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | J4012.1620 | - | M 1.6 |
|                                                                                    |                                                                                                                                          | J4012.2020 |   | M 2.0 |
|  | <b>Tornillo de plástico para pilar de barra</b><br>hex, longitud 27 mm, estéril<br><br><b>Material</b><br>PEEK                           | J4009.1627 | - | M 1.6 |
|                                                                                    |                                                                                                                                          | J4009.2027 |   | M 2.0 |

## Sistema de anclaje mediante pilares de bola

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                            | Referencia | Ø      | AG     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|  | <b>Set de pilar de bola CAMLOG®, componentes macho</b><br>incl. anillo de estabilización<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/plástico                     | J2249.3315 | 3.3 mm | 1.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | J2249.3330 |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | J2249.3815 | 3.8 mm | 1.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | J2249.3830 |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | J2249.3845 |        | 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | J2249.4315 | 4.3 mm | 1.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | J2249.4330 |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | J2249.4345 |        | 4.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | J2249.5015 | 5.0 mm | 1.5 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | J2249.5030 |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     | J2249.5045 |        | 4.5 mm |
|  | <b>Componente hembra CM Dalbo®-Plus</b><br>para pilar de barra,<br>incl. pieza retentiva de laminillas<br><br><b>Material</b><br>Titanio de grado 4/Aleación de oro | 05003503   | 3.3 mm | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |            | 3.8 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |            | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |            | 5.0 mm |        |

Dalbo®-Plus es una marca comercial registrada de la compañía Cendres + Métaux SA, Biel, Suiza.

## Sistema de anclaje mediante pilares de bola

|                                                                                   | Artículo                                                                                                | Referencia | Ø      | AG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----|
|  | Pieza retentiva de laminillas para componentes hembra CM Dalbo®-Plus<br><br>Material<br>Aleación de oro | 05003504   | 3.3 mm | -  |
|                                                                                   |                                                                                                         |            | 3.8 mm |    |
|                                                                                   |                                                                                                         |            | 4.3 mm |    |
|                                                                                   |                                                                                                         |            | 5.0 mm |    |
|  | Análogo de pilar de bola incl. anillo de estabilización<br><br>Material<br>Latón/Plástico               | J3015.3300 | 3.3 mm | -  |
|                                                                                   |                                                                                                         | J3015.3800 | 3.8 mm |    |
|                                                                                   |                                                                                                         | J3015.4300 | 4.3 mm |    |
|                                                                                   |                                                                                                         | J3015.5000 | 5.0 mm |    |

## Sistema de anclaje Locator®

CAMLOG® Locator R-Tx®

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                                | Referencia | Ø      | AG     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|  | Pilares CAMLOG® Locator R-Tx® incl. carcasa de retención con pieza retentiva para procesamiento negra, Espaciador bloqueador blanco y cuatro piezas retentivas diferentes<br><br>Material<br>Aleación de titanio/Nailon | 30800-01   | 3.3 mm | 1.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30800-02   |        | 2.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30800-03   |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30800-04   |        | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30801-01   | 3.8 mm | 1.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30801-02   |        | 2.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30801-03   |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30801-04   |        | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30801-05   |        | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30802-01   | 4.3 mm | 1.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30802-02   |        | 2.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30802-03   |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30802-04   |        | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30802-05   |        | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30803-01   | 5.0 mm | 1.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30803-02   |        | 2.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30803-03   |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30803-04   |        | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 30803-05   |        | 5.0 mm |
|  | Casquillo de toma de impresión Locator R-Tx® (4 unidades)<br><br>Material<br>Polietileno                                                                                                                                | 30017-01   | 3.3 mm | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            | 3.8 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            | 5.0 mm |        |
|  | Análogo Locator R-Tx® Ø 3.35 mm (4 unidades)<br><br>Material<br>Aluminio                                                                                                                                                | 30014-01   | 3.3 mm | -      |

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                  | Referencia | Ø      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|    | <b>Análogo Locator R-Tx®</b><br>Ø 4.0 mm (4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Aluminio                                                                                  | 30015-01   | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 4.3 mm |
|    | <b>Análogo Locator R-Tx®</b><br>Ø 5.0 mm (4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Aluminio                                                                                  | 30016-01   | 5.0 mm |
|    | <b>Carcasa de titanio</b><br><b>Locator R-Tx®</b><br>con aditamento para el procesamiento negro<br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/Polietileno | 30013-01   | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 5.0 mm |
|  | <b>Pieza macho para procesamiento</b><br><b>Locator R-Tx®</b><br>negro (4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Polietileno                                                 | 30012-01   | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 5.0 mm |
|  | <b>Espaciador para el procesamiento</b><br><b>Locator R-Tx®</b><br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Polietileno                                                     | 30018-01   | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 5.0 mm |
|  | <b>Pieza retentiva</b><br><b>Locator R-Tx®</b><br>gris, NINGUNA RETENCIÓN<br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Nailon                                                | 30001-01   | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 5.0 mm |
|  | <b>Pieza retentiva</b><br><b>Locator R-Tx®</b><br>azul, LIGERO<br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Nailon                                                           | 30002-01   | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |            | 5.0 mm |

## Sistema de anclaje Locator®

### CAMLOG® Locator R-Tx®

|                                                                                   | Artículo                                                                                                      | Referencia | Ø      | AG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----|
|  | <b>Pieza retentiva<br/>Locator R-Tx®<br/>rosa, MEDIO<br/>(4 unidades)</b><br><br><b>Material</b><br>Nailon    | 30003-01   | 3.3 mm | -  |
|                                                                                   |                                                                                                               |            | 3.8 mm |    |
|                                                                                   |                                                                                                               |            | 4.3 mm |    |
|                                                                                   |                                                                                                               |            | 5.0 mm |    |
|  | <b>Pieza retentiva<br/>Locator R-Tx®<br/>blanco, FUERTE<br/>(4 unidades)</b><br><br><b>Material</b><br>Nailon | 30004-01   | 3.3 mm | -  |
|                                                                                   |                                                                                                               |            | 3.8 mm |    |
|                                                                                   |                                                                                                               |            | 4.3 mm |    |
|                                                                                   |                                                                                                               |            | 5.0 mm |    |

## Sistema de anclaje Locator®

### CAMLOG® Locator®

|                                                                                     | Artículo                                                                                                          | Referencia | Ø      | AG     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
|  | <b>Pilares<br/>CAMLOG® Locator®</b><br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/TiN                             | J2253.3310 | 3.3 mm | 1.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.3320 |        | 2.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.3330 |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.3340 |        | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.3810 | 3.8 mm | 1.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.3820 |        | 2.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.3830 |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.3840 |        | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.3850 | 5.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.4310 | 4.3 mm | 1.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.4320 |        | 2.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.4330 |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.4340 |        | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.4350 | 5.0 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.5010 | 5.0 mm | 1.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.5020 |        | 2.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.5030 |        | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.5040 |        | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.5050 | 5.0 mm |        |
|  | <b>Casquillo de toma de<br/>impresión Locator®</b><br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Aluminio/Polietileno | J2253.0200 | 3.3 mm | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                   |            | 3.8 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                   |            | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                   |            | 5.0 mm |        |
|  | <b>Análogo Locator®</b><br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Aluminio                                        | J2253.0340 | 3.3 mm | -      |
|                                                                                     |                                                                                                                   |            | 3.8 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                   |            | 4.3 mm |        |
|                                                                                     |                                                                                                                   | J2253.0350 | 5.0 mm |        |

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Referencia | Ø      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|    | <b>Sets de laboratorio Locator®</b><br>(2 unidades)<br><br><b>Contenido por set:</b><br>1 carcasa de retención con pieza macho para procesamiento,<br>1 espaciador bloqueador blanco,<br>1 pieza retentiva macho transparente,<br>1 pieza retentiva macho rosa,<br>1 pieza retentiva macho azul<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/Polietileno/<br>Teflón/Nailon              | J2253.0102 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 5.0 mm |
|   | <b>Sets de laboratorio Locator® para divergencia</b><br>(2 unidades)<br><br><b>Contenido por set:</b><br>1 carcasa de retención con pieza macho para procesamiento,<br>1 espaciador bloqueador blanco,<br>1 pieza retentiva macho verde,<br>1 pieza retentiva macho naranja,<br>1 pieza retentiva macho roja<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio/Polietileno/<br>Teflón/Nailon | J2253.0112 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 5.0 mm |
|  | <b>Espaciador bloqueador Locator®</b><br>(20 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Teflón                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J2253.0401 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 5.0 mm |
|  | <b>Pieza macho para procesamiento Locator®</b><br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Polietileno                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J2253.0402 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 5.0 mm |
|  | <b>Pieza retentiva Locator®</b><br>transparente, FUERTE, div.: 0°-10°<br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Nailon                                                                                                                                                                                                                                                                   | J2253.1005 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 5.0 mm |

# Sistema de anclaje Locator®

CAMLOG® Locator®

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                    | Referencia | Ø      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|    | <b>Pieza retentiva Locator®</b><br>rosa, MEDIO, div.: 0° – 10°<br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Nailon                                             | J2253.1003 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 5.0 mm |
|    | <b>Pieza retentiva Locator®</b><br>azul, LIGERO, div.: 0° – 10°<br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Nailon                                            | J2253.1002 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 5.0 mm |
|   | <b>Pieza retentiva Locator®</b><br><b>para angulación ampliada*</b><br>verde, FUERTE, div.: 10° – 20°<br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Nailon      | J2253.2004 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 5.0 mm |
|  | <b>Pieza retentiva Locator®</b><br><b>para angulación ampliada*</b><br>naranja, MEDIO, div.: 10° – 20°<br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Nailon     | J2253.2003 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 5.0 mm |
|  | <b>Pieza retentiva Locator®</b><br><b>para angulación ampliada*</b><br>rojo, LIGERO, div.: 10° – 20°<br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Nailon       | J2253.2002 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 5.0 mm |
|  | <b>Pieza retentiva Locator®</b><br><b>para angulación ampliada*</b><br>gris, SIN RETENCIÓN, div.: 0° – 20°<br>(4 unidades)<br><br><b>Material</b><br>Nailon | J2253.2000 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                             |            | 5.0 mm |

\* no permitido para Ø de implante 3.3 mm

Fabricante de Locator®: Zest Anchors, 2875 Loker Avenue East, Carlsbad, California 92010, EEUU  
Locator® y Locator R-Tx® son marcas comerciales registradas de Zest Anchors.



## Técnica de corona telescópica

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                               | Referencia | Ø      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|    | <b>Pilar universal CAMLOG®</b><br>para la técnica de corona telescópica individualizable,<br>incl. tornillo de pilar CAMLOG®<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                             | K2211.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | K2211.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | K2211.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | K2211.6000 | 6.0 mm |
|    | <b>Pilar universal PS CAMLOG®</b><br>para la técnica de corona telescópica, para Platform Switching individualizable,<br>incl. tornillo de pilar CAMLOG®<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K2201.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | K2201.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | K2201.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | K2201.6000 | 6.0 mm |
|  | <b>Pilares telescópicos CAMLOG®</b><br>para la técnica de corona telescópica individualizable,<br>incl. tornillo de pilar CAMLOG®<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                        | K2212.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | K2212.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | K2212.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | K2212.6000 | 6.0 mm |

Prótesis

## Accesorios para pilares

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                | Referencia | Ø      | Rosca |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
|  | <b>Tornillo de pilar CAMLOG®, hex</b><br>para el atornillado definitivo en el implante<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                    | J4005.1601 | 3.3 mm | M 1.6 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |            | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |            | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         | J4005.2001 | 5.0 mm | M 2.0 |
|  | <b>Tornillo de laboratorio CAMLOG®, hex</b><br>para la fijación en el modelo de trabajo, anodizado marrón<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | J4006.1601 | 3.3 mm | M 1.6 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |            | 3.8 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |            | 4.3 mm |       |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         | J4006.2001 | 5.0 mm | M 2.0 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |            | 6.0 mm |       |

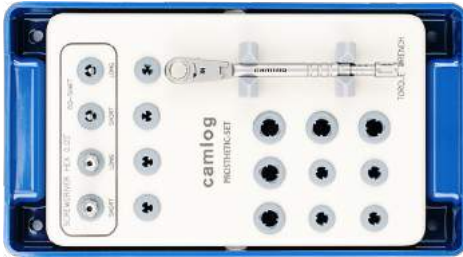
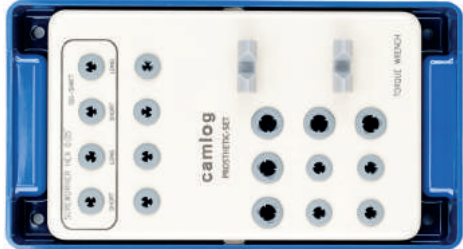
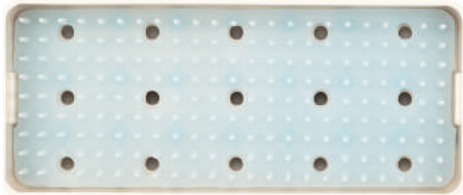
Los pilares PS CAMLOG® solo se deben usar con implantes CAMLOG® con referencia K.  
Los tornillos de laboratorio no deben usarse en el paciente.

# Instrumentos protésicos

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                            | Referencia | L       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|    | <p><b>Llave de carraca dinamométrica</b><br/>con ajuste progresivo del torque<br/>hasta máx. 30 Ncm</p> <p><b>Material</b><br/>Acero inoxidable</p> | J5320.1030 | -       |
|   | <p><b>Instrumento de inserción</b><br/>para pilar de bola,<br/>manual/carraca</p> <p><b>Material</b><br/>Acero inoxidable</p>                       | J5300.0011 | 18.3 mm |
|  | <p><b>Destornillador Activador</b><br/>para matriz de pilar de bola<br/>CM Dalbo®-Plus</p> <p><b>Material</b><br/>Acero inoxidable</p>              | 07000389   | -       |
|  | <p><b>Instrumento de inserción</b><br/>para pilar de barra recto, corto<br/>Ø 3.3/3.8/4.3 mm</p> <p><b>Material</b><br/>Acero inoxidable</p>        | J5300.0020 | 18.6 mm |
|  | <p><b>Instrumento de inserción</b><br/>para pilar de barra recto, corto<br/>Ø 5.0 mm</p> <p><b>Material</b><br/>Acero inoxidable</p>                | J5300.0025 | 18.6 mm |

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                             | Referencia | L       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|    | <b>Instrumento de inserción para pilar de barra recto, largo Ø 3.3/3.8/4.3 mm</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                         | J5300.0021 | 28.0 mm |
|    | <b>Instrumento de inserción para casquillos de toma de impresión y casquillos de cicatrización para pilares de barra Ø 3.3/3.8/4.3 mm</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J5300.0027 | 19.1 mm |
|   | <b>Instrumento de inserción para casquillos de toma de impresión y casquillos de cicatrización para pilares de barra Ø 5.0 mm</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable         | J5300.0028 | 19.1 mm |
|  | <b>Instrumento de inserción para pilar Locator®, manual/carraca</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                       | J2253.0001 | 24.3 mm |
|  | <b>Instrumento Locator® 3 componentes</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                                                 | J2253.0002 | 83.0 mm |
|  | <b>Casquillo de soporte del pilar Locator® para componente dorado del instrumento Locator® (4 unidades)</b><br><br><b>Material</b><br>Polisulfona                                    | 08394      | -       |
|  | <b>Calibre de medición angular Locator®</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                                               | J2253.0003 | -       |
|  | <b>Postes para paralelizar el Locator® (4 unidades)</b><br><br><b>Material</b><br>Polietileno                                                                                        | J2253.0004 | -       |

## Instrumentos protésicos

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referencia | Dimensiones       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|    | <p><b>Instrumento de inserción para piezas retentivas Locator R-Tx® con mango de plástico</b></p> <p><b>Material</b><br/>Acero inoxidable</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | 30021-01   | -                 |
|   | <p><b>Set protésico</b><br/>Contenido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- J5320.1030 llave de carraca dinamométrica</li> <li>- J5317.0501 destornillador, hex, corto, manual/carraca</li> <li>- J5317.0502 destornillador, hex, largo, manual/carraca</li> <li>- J5317.0504 destornillador, hex, corto, vástago ISO</li> <li>- J5317.0503 destornillador, hex, largo, vástago ISO</li> </ul> | J5330.8600 | 197 x 108 x 54 mm |
|  | <p><b>Bandeja protésica</b><br/>(sin contenido)</p> <p><b>Material</b><br/>Plástico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J5330.8500 | 197 x 108 x 54 mm |
|  | <p><b>Bandeja protésica universales</b><br/>(sin contenido)<br/>reesterilizable</p> <p><b>Material</b><br/>Radel®, Silicona</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | J5330.8700 | 162 x 73 x 29 mm  |
|  | <p><b>Destornillador</b><br/>hex, extracorto,<br/>manual/carraca</p> <p><b>Material</b><br/>Acero inoxidable</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J5317.0510 | 14.5 mm           |
|  | <p><b>Destornillador</b><br/>hex, corto,<br/>manual/carraca</p> <p><b>Material</b><br/>Acero inoxidable</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J5317.0501 | 22.5 mm           |

|                                                                                     | Artículo                                                                                                       | Referencia | L       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|    | <b>Destornillador</b><br>hex, largo,<br>manual/carraca<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable              | J5317.0502 | 30.3 mm |
|    | <b>Destornillador</b><br>hex, corto,<br>vástago ISO<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                 | J5317.0504 | 18.0 mm |
|   | <b>Destornillador</b><br>hex, largo,<br>vástago ISO<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                 | J5317.0503 | 26.0 mm |
|  | <b>Destornillador manual</b><br>hex, sin conexión para carraca<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable      | J5317.0511 | 23.0 mm |
|  | <b>Mango para el análogo de implante</b><br><b>CAMLOG®/CONELOG®</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable | J3025.0010 | 3.3 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                |            | 3.8 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                |            | 4.3 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                | J3025.0015 | 5.0 mm  |
|                                                                                     |                                                                                                                |            | 6.0 mm  |

## Instrumentos para el laboratorio

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                         | Referencia | Ø      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|    | <b>Mango universal</b><br>incl. 2 tornillos de laboratorio CAMLOG®, hex, y 1 soporte de pilar CAMLOG®<br>Ø 3.3/3.8/4.3/5.0/6.0 mm<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable/Aleación de titanio | J3709.0010 | -      |
|                                                                                     | <b>Mango universal</b><br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable                                                                                                                                | J3709.0015 | -      |
|    | <b>Soporte de pilar CAMLOG®</b><br>para mango universal,<br>para tallar pilares CAMLOG®<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                                                            | J3709.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | J3709.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | J3709.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | J3709.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | J3709.6000 | 6.0 mm |
|  | <b>Fresa para escayola para mango universal</b><br>incl. espiga guía codificada por color<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable/Aleación de titanio                                         | J3706.3300 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | J3706.3800 | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | J3706.4300 | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | J3706.5000 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | J3706.6000 | 6.0 mm |
|  | <b>Escariador para el acabado, base para pilar de barra</b><br>superficie plana/cono, con casquillos calcinables<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable/Latón                                | J3711.0010 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | J3711.0015 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |            | 6.0 mm |
|  | <b>Escariador para el acabado, base para pilar de barra</b><br>asiento del tornillo, con casquillos calcinables<br><br><b>Material</b><br>Acero inoxidable/Latón                                 | J3711.0020 | 3.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |            | 3.8 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |            | 4.3 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | J3711.0025 | 5.0 mm |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |            | 6.0 mm |

## Pilares de planificación

|                                                                                   | Artículo                                                                                                  | Referencia |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>Kit de pilares de planificación CAMLOG®</b><br>(Contenido 2 unidades de cada, según la tabla inferior) | K8011.1000 |

### Contenido: Kit de pilares de planificación CAMLOG®

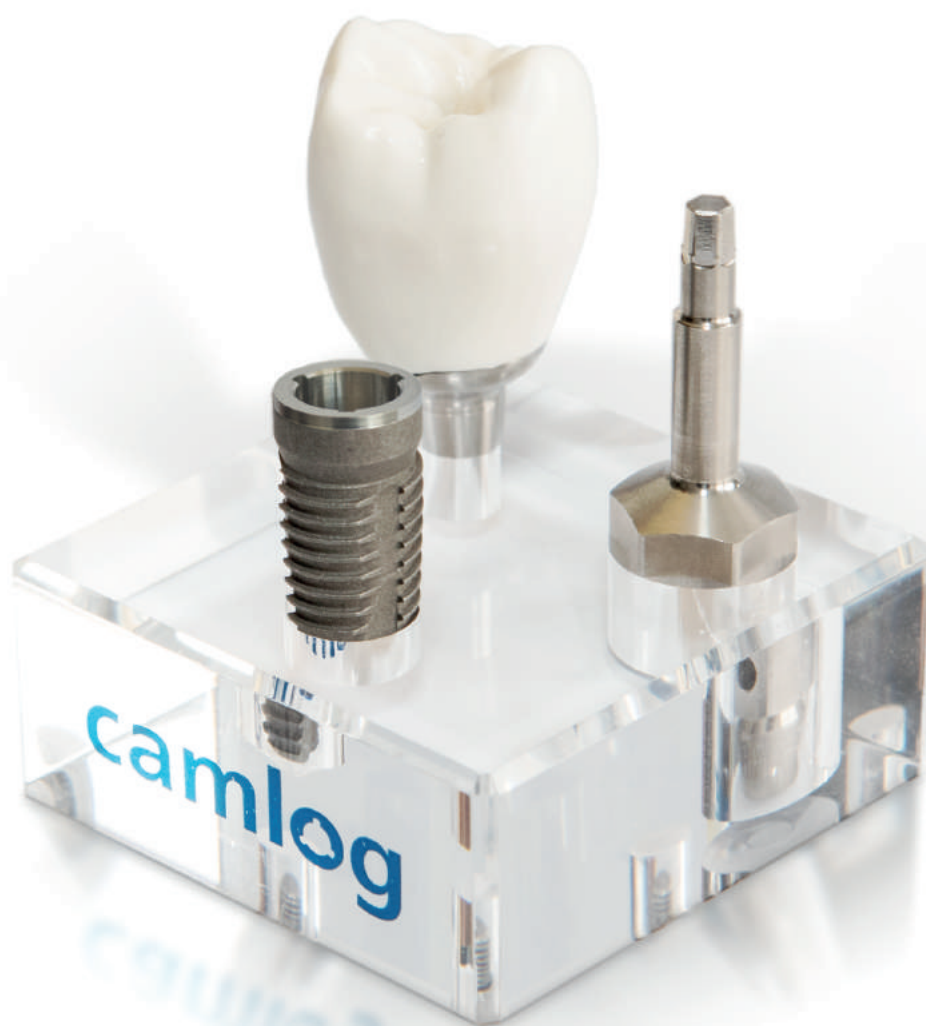
| Artículo                                                        | Material | Ø      |        |        | AG        |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| Pilar de planificación CAMLOG® Esthomic®, recto*                | POM      | 3.8 mm | 4.3 mm | 5.0 mm | 1.0 – 1.8 |
| Pilar de planificación CAMLOG® Esthomic®, angulado 15°, tipo A* |          |        |        |        | 3.0 – 4.5 |
| Pilar de planificación CAMLOG® Esthomic®, angulado 15°, tipo B* |          |        |        |        | 1.0 – 1.8 |
| Pilar de planificación CAMLOG® Esthomic®, angulado 20°, tipo A* |          |        |        |        |           |
| Pilar de planificación CAMLOG® Esthomic®, angulado 20°, tipo B* |          |        |        |        |           |

¡Cuidado, los pilares de planificación para la selección del pilar no se deben usar en el paciente!

\* Estos productos no están disponibles por separado.







## Implantes de prácticas

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                  | Referencia | Ø      | L     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
|    | <b>Implante de prácticas<br/>CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE</b><br>incl. poste de inserción a presión y<br>tornillo de cierre, anodizado amarillo<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio | K1901.3813 | 3.8 mm | 13 mm |
|    | <b>Implante de prácticas<br/>CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE</b><br>incl. poste de inserción a presión y<br>tornillo de cierre, anodizado rojo<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio     | K1901.4313 | 4.3 mm |       |
|    | <b>Implante de prácticas<br/>CAMLOG® SCREW-LINE</b><br>incl. poste de inserción y tornillo de<br>cierre, anodizado amarillo<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                 | K1049.3813 | 3.8 mm | 13 mm |
|  | <b>Implante de prácticas<br/>CAMLOG® SCREW-LINE</b><br>incl. poste de inserción y tornillo de<br>cierre, anodizado rojo<br><br><b>Material</b><br>Aleación de titanio                     | K1049.4313 | 4.3 mm |       |

¡Cuidado, los implantes de prácticas no se deben usar en el paciente!

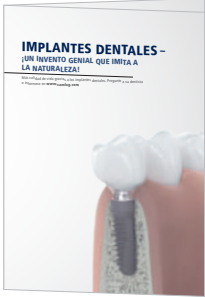
## Modelos de exposición

|                                                                                   | Artículo                                                                                                                                                                      | Referencia |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>Modelo de exposición CAMLOG®, cristal acrílico</b><br>maxilar superior, 4 implantes CAMLOG® SCREW-LINE,<br>4 x Ø 4.3 mm<br><br><b>Material</b><br>Cristal acrílico/Titanio | K8070.1020 |
|  | <b>Modelo de exposición CAMLOG®, cristal acrílico</b><br>maxilar inferior, 4 implantes CAMLOG® SCREW-LINE,<br>4 x Ø 4.3 mm<br><br><b>Material</b><br>Cristal acrílico/Titanio | K8050.1040 |
|  | <b>Maxilar inferior desdentado</b><br>incl. placa de montaje<br><br><b>Material</b><br>Plástico                                                                               | J8070.2050 |

## Macromodelos

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Referencia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>Macromodelo CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE</b><br>escala 3:1<br><br><b>Contenido:</b><br>1 implante CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE<br>1 pilar CAMLOG® Esthomic®, recto<br>1 tornillo del pilar CAMLOG®, hex<br>1 destornillador, hex<br>1 premolar, para pilar CAMLOG® Esthomic®, recto<br>1 zócalo de cristal acrílico<br><br><b>Material</b><br>Plástico/Acero inoxidable | K8010.1400 |
|  | <b>Macromodelo CAMLOG® SCREW-LINE</b><br>escala 3:1<br><br><b>Contenido:</b><br>1 implante CAMLOG® SCREW-LINE<br>1 pilar CAMLOG® Esthomic®, recto<br>1 tornillo del pilar CAMLOG®, hex<br>1 destornillador, hex<br>1 premolar, para pilar CAMLOG® Esthomic®, recto<br>1 zócalo de cristal acrílico<br><br><b>Material</b><br>Plástico/Acero inoxidable             | K8010.1010 |

# Literatura

|                                                                                     | Artículo                                                                                                                                   | Referencia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <b>Folleto para el paciente</b><br>Preguntas y respuestas sobre los implantes dentales                                                     | -          |
|    | <b>COMFOUR® Folleto para el paciente</b><br>En lugar de una dentadura postiza – una prótesis que te sienta bien                            | -          |
|   | <b>Carnet del implante</b><br>Documentación de la rehabilitación con implantes específica del paciente<br>Cantidad por envase: 10 unidades | -          |
|  | <b>Folleto de asesoramiento para el paciente</b><br>Set de 5 hojas, A4                                                                     | -          |
|  | <b>Carpeta de presentación</b><br>A4, laminado                                                                                             | -          |

|                                                                                    | Artículo                                                                                | Referencia |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | <b>Póster</b><br>Formato: 50 x 70 cm                                                    | -          |
|  | <b>Cuaderno de citas</b><br>Cuaderno de 50 hojas, A7<br>Cantidad por envase: 5 unidades | -          |

# Sinopsis de las indicaciones

| Restauración unitaria                                                                                                            |                                                                                                                                     | Rehabilitaciones con puentes                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cementada                                                                                                                        | Atornillada                                                                                                                         | Cementada                                                                                                                    |
| <br>Pilares provisionales, PEEK, incl. PS       | <br>Pilares provisionales, PEEK, incl. PS          | <br>Pilares provisionales, PEEK, incl. PS |
|                                                                                                                                  | <br>Pilar provisional, aleación de titanio, corona |                                                                                                                              |
| <br>Pilares Esthomic®, incl. PS                 |                                                                                                                                     | <br>Pilares Esthomic®, incl. PS           |
|                                                                                                                                  | <br>Pilares de barra                               |                                                                                                                              |
| <br>Base de titanio CAD/CAM, corona, incl. PS | <br>Base de titanio CAD/CAM, corona, incl. PS    | <br>Base de titanio CAD/CAM, puente     |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| <br>Pilar Logfit®                             |                                                                                                                                     | <br>Pilar Logfit®                       |
| <br>Pilar universal, incl. PS                 |                                                                                                                                     | <br>Pilar universal, incl. PS           |
| <br>Blank de titanio para CAM                 |                                                                                                                                     | <br>Blank de titanio para CAM           |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
| <br>Pilar de oro                              | <br>Pilar de oro                                 | <br>Pilar de oro                        |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                              |

| Rehabilitaciones con puentes                                                        | Rehabilitaciones híbridas                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atornillada                                                                         | Removible (dentadura completa)                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                                                           |
| Pilar provisional, aleación de titanio, puente                                      |                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                         |
| Pilares de barra                                                                    | Pilares de barra                                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                                           |
| Base de titanio CAD/CAM, puente                                                     |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |                                                                                        |
|                                                                                     | Sistema de anclaje Locator®                                                                                                                                               |
|                                                                                     |                                                                                        |
|                                                                                     | Pilar de bola                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |   |
|                                                                                     | Pilar universal, incl. PS      Blank de titanio para CAM                                                                                                                  |
|                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                     | Pilar telescópico                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                                                                        |
|                                                                                     | Pilar de oro                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                     | Base de titanio CAD/CAM, corona, incl. PS                                                                                                                                 |

Rehabilitaciones de coronas telescópicas

Informaciones adicionales

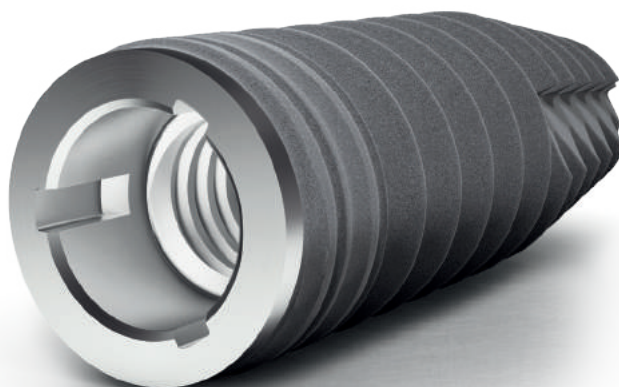




# Sinopsis de los implantes

| Artículo                                                                                                                                                                        | Referencia               |                          |                          |                          | L     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                 | Ø 3.3 mm                 | Ø 3.8 mm                 | Ø 4.3 mm                 | Ø 5.0 mm                 |       |
|  <b>Implante CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus</b><br>incl. poste de inserción a presión | -                        | K1076.3809<br>A Ø 3.0 mm | K1076.4309<br>A Ø 3.0 mm | K1076.5009<br>A Ø 3.5 mm | 9 mm  |
|                                                                                                                                                                                 | K1076.3311<br>A Ø 2.2 mm | K1076.3811<br>A Ø 2.7 mm | K1076.4311<br>A Ø 2.7 mm | K1076.5011<br>A Ø 3.2 mm | 11 mm |
|                                                                                                                                                                                 | K1076.3313<br>A Ø 2.2 mm | K1076.3813<br>A Ø 2.7 mm | K1076.4313<br>A Ø 2.7 mm | K1076.5013<br>A Ø 3.2 mm | 13 mm |
|                                                                                                                                                                                 | K1076.3316<br>A Ø 2.2 mm | K1076.3816<br>A Ø 2.7 mm | K1076.4316<br>A Ø 2.7 mm | K1076.5016<br>A Ø 3.2 mm | 16 mm |
|  <b>Implante CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus</b><br>incl. poste de inserción roscado   | -                        | K1075.3809<br>A Ø 3.0 mm | K1075.4309<br>A Ø 3.0 mm | K1075.5009<br>A Ø 3.5 mm | 9 mm  |
|                                                                                                                                                                                 | K1075.3311<br>A Ø 2.2 mm | K1075.3811<br>A Ø 2.7 mm | K1075.4311<br>A Ø 2.7 mm | K1075.5011<br>A Ø 3.2 mm | 11 mm |
|                                                                                                                                                                                 | K1075.3313<br>A Ø 2.2 mm | K1075.3813<br>A Ø 2.7 mm | K1075.4313<br>A Ø 2.7 mm | K1075.5013<br>A Ø 3.2 mm | 13 mm |
|                                                                                                                                                                                 | K1075.3316<br>A Ø 2.2 mm | K1075.3816<br>A Ø 2.7 mm | K1075.4316<br>A Ø 2.7 mm | K1075.5016<br>A Ø 3.2 mm | 16 mm |

| Artículo                                                                                                                                                                    | Referencia             |                        |                        |                        |                        | L     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | Ø 3.3 mm<br>A Ø 2.7 mm | Ø 3.8 mm<br>A Ø 3.5 mm | Ø 4.3 mm<br>A Ø 3.9 mm | Ø 5.0 mm<br>A Ø 4.6 mm | Ø 6.0 mm<br>A Ø 5.5 mm |       |
|  <b>Implante CAMLOG® SCREW-LINE, Promote®</b><br>incl. poste de inserción a presión      | -                      | K1046.3809             | K1046.4309             | K1046.5009             | K1046.6009             | 9 mm  |
|                                                                                                                                                                             | K1046.3311             | K1046.3811             | K1046.4311             | K1046.5011             | K1046.6011             | 11 mm |
|                                                                                                                                                                             | K1046.3313             | K1046.3813             | K1046.4313             | K1046.5013             | K1046.6013             | 13 mm |
|                                                                                                                                                                             | K1046.3316             | K1046.3816             | K1046.4316             | K1046.5016             | K1046.6016             | 16 mm |
|  <b>Implante CAMLOG® SCREW-LINE, Promote®</b><br>incl. poste de inserción roscado        | -                      | K1045.3809             | K1045.4309             | K1045.5009             | -                      | 9 mm  |
|                                                                                                                                                                             | K1045.3311             | K1045.3811             | K1045.4311             | K1045.5011             | -                      | 11 mm |
|                                                                                                                                                                             | K1045.3313             | K1045.3813             | K1045.4313             | K1045.5013             | -                      | 13 mm |
|                                                                                                                                                                             | K1045.3316             | K1045.3816             | K1045.4316             | -                      | -                      | 16 mm |
|  <b>Implante CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® plus</b><br>incl. poste de inserción a presión | -                      | K1056.3809             | K1056.4309             | K1056.5009             | K1056.6009             | 9 mm  |
|                                                                                                                                                                             | K1056.3311             | K1056.3811             | K1056.4311             | K1056.5011             | K1056.6011             | 11 mm |
|                                                                                                                                                                             | K1056.3313             | K1056.3813             | K1056.4313             | K1056.5013             | K1056.6013             | 13 mm |
|                                                                                                                                                                             | K1056.3316             | K1056.3816             | K1056.4316             | K1056.5016             | K1056.6016             | 16 mm |
|  <b>Implante CAMLOG® SCREW-LINE, Promote® plus</b><br>incl. poste de inserción roscado   | -                      | K1055.3809             | K1055.4309             | K1055.5009             | -                      | 9 mm  |
|                                                                                                                                                                             | K1055.3311             | K1055.3811             | K1055.4311             | K1055.5011             | -                      | 11 mm |
|                                                                                                                                                                             | K1055.3313             | K1055.3813             | K1055.4313             | K1055.5013             | -                      | 13 mm |
|                                                                                                                                                                             | K1055.3316             | K1055.3816             | K1055.4316             | -                      | -                      | 16 mm |



# Sinopsis de las prótesis

## Toma de impresión de implantes

|                                                                                                                                                                                                                  |  | Ø 3.3 mm   | Ø 3.8 mm   | Ø 4.3 mm   | Ø 5.0 mm   | Ø 6.0 mm   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| Artículo                                                                                                                                                                                                         |  | Referencia |            |            |            |            | AG |
|  Casquillo de toma de impresión CAMLOG®, cubeta abierta                                                                         |  | K2121.3300 | K2121.3800 | K2121.4300 | K2121.5000 | K2121.6000 | -  |
|  Casquillo de toma de impresión CAMLOG®, cubeta cerrada                                                                         |  | K2110.3300 | K2110.3800 | K2110.4300 | K2110.5000 | K2110.6000 | -  |
|  PS Casquillo de toma de impresión PS CAMLOG®, cubeta abierta, para Platform Switching con implantes CAMLOG® con referencia K   |  | -          | K2119.3800 | K2119.4300 | K2119.5000 | K2119.6000 | -  |
|  PS Casquillo de toma de impresión PS CAMLOG®, cubeta cerrada, para Platform Switching con implantes CAMLOG® con referencia K |  | -          | K2109.3800 | K2109.4300 | K2109.5000 | K2109.6000 | -  |
|  Retenedor para casquillos de toma de impresión, cubeta cerrada                                                               |  | J2111.3300 | J2111.3800 | J2111.4300 | J2111.5000 | J2111.6000 | -  |

## Registro de mordida

|                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
|  Pilar para el registro de mordida CAMLOG®, incl. casquillo de registro de la mordida | J2140.3300 | J2140.3800 | J2140.4300 | J2140.5000 | J2140.6000 | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|

## Fabricación del modelo

|                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
|  Análogo de laboratorio CAMLOG® para modelos colados                    | K3010.3300 | K3010.3800 | K3010.4300 | K3010.5000 | K3010.6000 | - |
|  Análogo de implante CAMLOG® para modelos impresos y colados            | K3025.3300 | K3025.3800 | K3025.4300 | K3025.5000 | K3025.6000 | - |
|  DIM Analog® para modelos impresos para el sistema de implantes CAMLOG® | K3012.3300 | K3012.3800 | K3012.4300 | K3012.5000 | K3012.6000 | - |

## Pilares para rehabilitaciones con coronas y puentes

|                                                                                     |                                                                                                                  | Ø 3.3 mm   | Ø 3.8 mm   | Ø 4.3 mm   | Ø 5.0 mm   | Ø 6.0 mm   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Artículo                                                                            |                                                                                                                  | Referencia |            |            |            |            | AG           |
|    | Pilar provisional CAMLOG®, PEEK                                                                                  | -          | K2241.3800 | K2241.4300 | K2241.5000 | K2241.6000 | -            |
|    | Pilar provisional PS CAMLOG®, PEEK para Platform Switching con implantes CAMLOG® con referencia K                | -          | K2208.3800 | K2208.4300 | K2208.5000 | K2208.6000 | -            |
|    | Pilar provisional CAMLOG®, corona, aleación de titanio                                                           | K2239.3300 | K2239.3800 | K2239.4300 | K2239.5000 | K2239.6000 | -            |
|    | Pilar provisional CAMLOG®, puente, aleación de titanio                                                           | J2339.3300 | J2339.3800 | J2339.4300 | J2339.5000 | J2339.6000 | -            |
|   | Pilares CAMLOG® Esthomic®, recto                                                                                 | -          | K2226.3810 | K2226.4310 | K2226.5010 | K2226.6010 | 1.0-1.8 mm   |
|                                                                                     |                                                                                                                  |            | K2226.3830 | K2226.4330 | K2226.5030 | K2226.6030 | 3.0-4.5 mm   |
|  | Pilares CAMLOG® Esthomic®, angulado 15°, tipo A                                                                  | -          | K2227.3810 | K2227.4310 | K2227.5010 | K2227.6010 | 1.0-1.8 mm   |
|                                                                                     |                                                                                                                  |            | K2227.3830 | K2227.4330 | K2227.5030 | K2227.6030 | 3.0-4.5 mm   |
|  | Pilares CAMLOG® Esthomic®, angulado 15°, tipo B                                                                  | -          | K2228.3810 | K2228.4310 | K2228.5010 | K2228.6010 | 1.0-1.8 mm   |
|                                                                                     |                                                                                                                  |            | K2228.3830 | K2228.4330 | K2228.5030 | K2228.6030 | 3.0-4.5 mm   |
|  | Pilares CAMLOG® Esthomic®, angulado 20°, tipo A                                                                  | -          | K2231.3810 | K2231.4310 | K2231.5010 | K2231.6010 | 1.0-1.8 mm   |
|                                                                                     |                                                                                                                  |            | K2231.3830 | K2231.4330 | K2231.5030 | K2231.6030 | 3.0-4.5 mm   |
|  | Pilares CAMLOG® Esthomic®, angulado 20°, tipo B                                                                  | -          | K2232.3810 | K2232.4310 | K2232.5010 | K2232.6010 | 1.0-1.8 mm   |
|                                                                                     |                                                                                                                  |            | K2232.3830 | K2232.4330 | K2232.5030 | K2232.6030 | 3.0-4.5 mm   |
|  | Pilar PS CAMLOG® Esthomic®, recto, para Platform Switching con implantes CAMLOG® con referencia K                | -          | K2202.3815 | K2202.4315 | K2202.5015 | K2202.6015 | 1.5 – 2.5 mm |
|  | Pilar PS CAMLOG® Esthomic®, angulado 15°, tipo A, para Platform Switching con implantes CAMLOG® con referencia K | -          | K2203.3815 | K2203.4315 | K2203.5015 | K2203.6015 | 1.5 – 2.5 mm |
|  | Pilar PS CAMLOG® Esthomic®, angulado 15°, tipo B, para Platform Switching con implantes CAMLOG® con referencia K | -          | K2204.3815 | K2204.4315 | K2204.5015 | K2204.6015 | 1.5 – 2.5 mm |

# Sinopsis de las prótesis

## Pilares para rehabilitaciones con coronas y puentes

|                                                                                     |                                                                                            | Ø 3.3 mm   | Ø 3.8 mm   | Ø 4.3 mm   | Ø 5.0 mm   | Ø 6.0 mm   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Artículo                                                                            |                                                                                            | Referencia |            |            |            |            | AG           |
|    | Pilar CAMLOG® Esthomic® Inset                                                              | K2235.3315 | K2235.3815 | K2235.4315 | K2235.5015 | K2235.6015 | 1.5 – 2.5 mm |
|    | Pilar universal CAMLOG®                                                                    | K2211.3300 | K2211.3800 | K2211.4300 | K2211.5000 | K2211.6000 | -            |
|    | Pilar universal PS CAMLOG®, para Platform Switching con implantes CAMLOG® con referencia K | -          | K2201.3800 | K2201.4300 | K2201.5000 | K2201.6000 | -            |
|    | Pilar de oro CAMLOG®                                                                       | K2246.3300 | K2246.3800 | K2246.4300 | K2246.5000 | K2246.6000 | -            |
|  | Base de titanio CAD/CAM CAMLOG®, corona                                                    | K2244.3348 | K2244.3848 | K2244.4348 | K2244.5048 | K2244.6048 | -            |
|  | Base de titanio CAD/CAM PS CAMLOG®, corona                                                 | -          | K2210.3808 | K2210.4308 | K2210.5008 | -          | 0.8 mm       |
|  | Base de titanio CAD/CAM CAMLOG®, puente                                                    | J2344.3348 | J2344.3848 | J2344.4348 | J2344.5048 | J2344.6048 | -            |
|  | Pilares CAMLOG® Logfit®                                                                    | -          | K2550.3808 | K2550.4308 | K2550.5008 | K2550.6008 | 0.8 mm       |
|                                                                                     |                                                                                            |            | K2550.3815 | K2550.4315 | K2550.5015 | K2550.6015 | 1.5 mm       |
|  | Casquillo de toma de impresión Logfit®                                                     | -          | J2551.4300 | J2551.4300 | J2551.6000 | J2551.6000 | -            |
|  | Análogo Logfit®                                                                            | -          | J2552.4300 | J2552.4300 | J2552.6000 | J2552.6000 | -            |
|  | Casquillo calcinable Logfit®, para coronas                                                 | -          | J2553.4302 | J2553.4302 | J2553.6002 | J2553.6002 | -            |
|  | Casquillo calcinable Logfit®, para puentes                                                 | -          | J2553.4301 | J2553.4301 | J2553.6001 | J2553.6001 | -            |

## COMFOUR® –

## Pilares para rehabilitaciones con coronas, puentes y rehabilitaciones híbridas

|                                                                                     |                                 |            |            |            |            |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
|  | Pilares de barra CAMLOG®, recto | J2254.3305 | J2254.3805 | J2254.4305 | J2254.5005 | - | 0.5 mm |
|                                                                                     |                                 | J2254.3320 | J2254.3820 | J2254.4320 | J2254.5020 |   | 2.0 mm |
|                                                                                     |                                 | -          | J2254.3840 | J2254.4340 | J2254.5040 |   | 4.0 mm |

|                                                                                     |                                                                                                 | Ø 3.3 mm   | Ø 3.8 mm   | Ø 4.3 mm   | Ø 5.0 mm    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| Artículo                                                                            |                                                                                                 | Referencia |            |            |             | AG             |
|    | Pilares de barra CAMLOG®,<br>angulado 17°, tipo A                                               | K2256.3325 | K2256.3825 | K2256.4325 | K2256.5025  | 2.5 mm         |
|                                                                                     |                                                                                                 | K2256.3340 | K2256.3840 | K2256.4340 | K2256.5040  | 4.0 mm         |
|    | Pilares de barra CAMLOG®,<br>angulado 17°, tipo B                                               | K2257.3325 | K2257.3825 | K2257.4325 | K2257.5025  | 2.5 mm         |
|                                                                                     |                                                                                                 | K2257.3340 | K2257.3840 | K2257.4340 | K2257.5040  | 4.0 mm         |
|    | Pilares de barra CAMLOG®,<br>angulado 30°, tipo A                                               | K2258.3325 | K2258.3825 | K2258.4325 | K2258.5035* | 2.5 mm/3.5 mm* |
|                                                                                     |                                                                                                 | K2258.3340 | K2258.3840 | K2258.4340 | K2258.5050* | 4.0 mm/5.0 mm* |
|    | Pilares de barra CAMLOG®,<br>angulado 30°, tipo B                                               | K2259.3325 | K2259.3825 | K2259.4325 | K2259.5035* | 2.5 mm/3.5 mm* |
|                                                                                     |                                                                                                 | K2259.3340 | K2259.3840 | K2259.4340 | K2259.5050* | 4.0 mm/5.0 mm* |
|    | Casquillo de cicatrización para<br>pilar de barra                                               | J2029.4300 | J2029.4300 | J2029.4300 | J2029.6000  | -              |
|    | Casquillo de toma de<br>impresión, corto, para pilar de<br>barra, cubeta cerrada                | J2129.4300 | J2129.4300 | J2129.4300 | J2129.6000  | -              |
|    | Casquillo de toma de impresión,<br>largo, para pilar de barra,<br>cubeta cerrada (puente/barra) | J2129.4310 | J2129.4310 | J2129.4310 | J2129.6010  | -              |
|  | Casquillo de escaneado<br>para pilares de barra                                                 | J2610.4300 | J2610.4300 | J2610.4300 | J2610.6000  | -              |
|  | Casquillo de titanio para pilar<br>de barra, para corona                                        | J2259.4301 | J2259.4301 | J2259.4301 | J2259.6001  | -              |
|  | Casquillo de titanio para pilar<br>de barra, para puente                                        | J2259.4302 | J2259.4302 | J2259.4302 | J2259.6002  | -              |
|  | Cazoleta de titanio sin<br>retención para pilar de barra,<br>para puente                        | J2259.4322 | J2259.4322 | J2259.4322 | J2259.6022  | -              |
|  | Base de corona para pilar<br>de barra, calcinable                                               | J2256.4306 | J2256.4306 | J2256.4306 | J2256.6006  | -              |
|  | Base para pilar de barra,<br>calcinable                                                         | J2257.4301 | J2257.4301 | J2257.4301 | J2257.6001  | -              |
|  | Base para pilar de barra,<br>sobrecalable                                                       | J2263.4300 | J2263.4300 | J2263.4300 | J2263.6000  | -              |
|  | Base para pilar de barra,<br>soldable                                                           | J2258.4300 | J2258.4300 | J2258.4300 | J2258.6000  | -              |
|  | Base para pilar de barra,<br>titanio, soldable por láser                                        | J2262.4300 | J2262.4300 | J2262.4300 | J2262.6000  | -              |
|  | Base adhesiva de titanio para<br>pilar de barra, Passive-Fit                                    | J2260.4301 | J2260.4301 | J2260.4301 | J2260.6001  | -              |
|  | Casquillo de barra para base<br>adhesiva de titanio, calcinable,<br>Passive-Fit                 | J2261.4301 | J2261.4301 | J2261.4301 | J2261.6001  | -              |
|  | Aditamento Locator® para pilar<br>de barra                                                      | J2253.4301 | J2253.4301 | J2253.4301 | J2253.6001  | -              |

# Sinopsis de las prótesis

## Prótesis híbridas

|                                                                                     |                                                       | Ø 3.3 mm   | Ø 3.8 mm   | Ø 4.3 mm   | Ø 5.0 mm   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Artículo                                                                            |                                                       | Referencia |            |            |            | AG     |
|    | Pilar de bola CAMLOG®, macho                          | J2249.3315 | J2249.3815 | J2249.4315 | J2249.5015 | 1.5 mm |
|                                                                                     |                                                       | J2249.3330 | J2249.3830 | J2249.4330 | J2249.5030 | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                       | -          | J2249.3845 | J2249.4345 | J2249.5045 | 4.5 mm |
|    | Componente hembra CM Dalbo®-Plus                      | 05003503   | 05003503   | 05003503   | 05003503   | -      |
|    | Análogo de pilar de bola                              | J3015.3300 | J3015.3800 | J3015.4300 | J3015.5000 | -      |
|    | Pilar CAMLOG® Locator R-Tx®                           | 30800-01   | 30801-01   | 30802-01   | 30803-01   | 1.0 mm |
|                                                                                     |                                                       | 30800-02   | 30801-02   | 30802-02   | 30803-02   | 2.0 mm |
|                                                                                     |                                                       | 30800-03   | 30801-03   | 30802-03   | 30803-03   | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                       | 30800-04   | 30801-04   | 30802-04   | 30803-04   | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                       | -          | 30801-05   | 30802-05   | 30803-05   | 5.0 mm |
|    | Casquillo de toma de impresión Locator R-Tx®          | 30017-01   | 30017-01   | 30017-01   | 30017-01   |        |
|   | Análogo Locator R-Tx®                                 | 30014-01   | 30015-01   | 30015-01   | 30016-01   | -      |
|  | Carcasa de titanio Locator R-Tx®                      | 30013-01   | 30013-01   | 30013-01   | 30013-01   | -      |
|  | Pieza macho para procesamiento Locator R-Tx®          | 30012-01   | 30012-01   | 30012-01   | 30012-01   | -      |
|  | Espaciador para el procesado Locator R-Tx®            | 30018-01   | 30018-01   | 30018-01   | 30018-01   | -      |
|  | Pieza retentiva Locator R-Tx® gris, NINGUNA RETENCIÓN | 30001-01   | 30001-01   | 30001-01   | 30001-01   | -      |
|  | Pieza retentiva Locator R-Tx® azul, LIGERO            | 30002-01   | 30002-01   | 30002-01   | 30002-01   | -      |
|  | Pieza retentiva Locator R-Tx® rosa, MEDIO             | 30003-01   | 30003-01   | 30003-01   | 30003-01   | -      |
|  | Pieza retentiva Locator R-Tx® blanco, FUERTE          | 30004-01   | 30004-01   | 30004-01   | 30004-01   | -      |
|  | Pilar CAMLOG® Locator®                                | J2253.3310 | J2253.3810 | J2253.4310 | J2253.5010 | 1.0 mm |
|                                                                                     |                                                       | J2253.3320 | J2253.3820 | J2253.4320 | J2253.5020 | 2.0 mm |
|                                                                                     |                                                       | J2253.3330 | J2253.3830 | J2253.4330 | J2253.5030 | 3.0 mm |
|                                                                                     |                                                       | J2253.3340 | J2253.3840 | J2253.4340 | J2253.5040 | 4.0 mm |
|                                                                                     |                                                       | -          | J2253.3850 | J2253.4350 | J2253.5050 | 5.0 mm |
|  | Casquillo de toma de impresión Locator®               | J2253.0200 | J2253.0200 | J2253.0200 | J2253.0200 | -      |
|  | Análogo Locator®                                      | J2253.0340 | J2253.0340 | J2253.0340 | J2253.0350 | -      |
|  | Sets de laboratorio Locator®                          | J2253.0102 | J2253.0102 | J2253.0102 | J2253.0102 | -      |
|  | Sets de laboratorio Locator®, para divergencia        | -          | J2253.0112 | J2253.0112 | J2253.0112 | -      |

|                                                                                   |                                                                                            | Ø 3.3 mm   | Ø 3.8 mm   | Ø 4.3 mm   | Ø 5.0 mm   | Ø 6.0 mm   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| Artículo                                                                          |                                                                                            | Referencia |            |            |            |            | AG |
|  | Pilar universal CAMLOG®                                                                    | -          | K2211.3800 | K2211.4300 | K2211.5000 | K2211.6000 | -  |
|  | Pilar universal PS CAMLOG®, para Platform Switching con implantes CAMLOG® con referencia K | -          | K2201.3800 | K2201.4300 | K2201.5000 | K2201.6000 | -  |
|  | Pilar telescópico CAMLOG® para la técnica de corona telescópica                            | -          | K2212.3800 | K2212.4300 | K2212.5000 | K2212.6000 | -  |

## Prótesis CAD/CAM

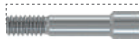
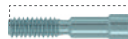
|                                                                                     |                                              |            |            |            |            |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
|   | Scanbody CAMLOG®                             | K2610.3310 | K2610.3810 | K2610.4310 | K2610.6010 | K2610.6010 | - |
|  | ScanPost CAMLOG® para Sirona® Scanbody       | K2620.3306 | K2620.3806 | K2620.4306 | K2620.5006 | K2620.6006 | - |
|  | Blank de titanio para CAM CAMLOG®, tipo IAC  | K2411.3313 | K2411.3813 | K2411.4313 | K2411.6013 | K2411.6013 | - |
|  | Blank de titanio para CAM CAMLOG®, tipo ME   | K2421.3320 | K2421.3820 | K2421.4320 | K2421.5020 | K2421.6020 | - |
|  | Casquillo de escaneado para pilares de barra | J2610.4300 | J2610.4300 | J2610.4300 | J2610.6000 | -          | - |



# Sinopsis de los tornillos

## Tornillos de pilar y transoclusales – aplicación intraoral

### Unión implane-pilar

|                                                                                     |                                                    | Ø 3.3 mm                                                                                                     | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm                                                                                                       | Ø 6.0 mm |        |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|--|
|                                                                                     |                                                    | M 1.6                                                                                                        |          |          | M 2.0                                                                                                          |          |        |                   |  |
| Artículo                                                                            |                                                    | Tornillos de pilar CAMLOG®                                                                                   |          |          |                                                                                                                |          | Torque |                   |  |
|    | Pilares provisional PEEK, incl. PS                 |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        | apretado a mano** |  |
|    | Scanbody                                           |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|    | ScanPost para Sirona® Scanbody                     |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|    | Pilares provisional titanio, corona y puente       |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|    | Pilares Esthomic® incl. PS                         |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|   | Pilar universal, incl. PS                          |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|   | Pilar telescópico                                  |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|  | Pilar de oro                                       | 10.5 mm<br><br>J4005.1601  |          |          | 10.5 mm<br><br>J4005.2001  |          |        | 20 Ncm*           |  |
|  | Pilar Logfit®                                      |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|  | Pilar cerámico                                     |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|  | Base de titanio CAD/CAM, corona, incl. PS y puente |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|  | Pilares Vario SR angulado 20° y 30°                |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|  | Blank de titanio para CAM CAMLOG®, tipo IAC y ME   |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|                                                                                     |                                                    |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|  | Pilar Vario SR, recto                              | 11.9 mm<br><br>J4007.1600 |          |          | 11.9 mm<br><br>J4007.2000 |          |        | 20 Ncm*           |  |
|                                                                                     |                                                    | Tornillos de pilar CAMLOG® con cabeza reducida, anodizado azul claro                                         |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |
|  | COMFOUR®                                           | 9.5 mm<br><br>J4004.1601  |          |          | 9.5 mm<br><br>J4004.2001  |          |        | 20 Ncm*           |  |
|                                                                                     | Pilares de barra, angulado 17° y 30°               |                                                                                                              |          |          |                                                                                                                |          |        |                   |  |

\* con llave de carraca dinamométrica J5320.1030

\*\* Opcional para los pilares provisionales de titanio: torque después de la fase de cicatrización 20 Ncm.

Todos los tornillos deben apretarse una segunda vez con el torque correspondiente después de al menos 5 minutos!





## Unión pilar-prótesis
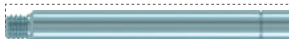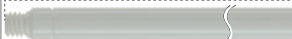
|                                                                                   |                                                             |                                                                                                           |          |          |                                                                                                             |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|                                                                                   |                                                             | Ø 3.3 mm                                                                                                  | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm                                                                                                    | Ø 6.0 mm |         |
|                                                                                   |                                                             | M 1.6                                                                                                     |          |          | M 2.0                                                                                                       |          |         |
| Artículo                                                                          |                                                             | Tornillos transoclusales para pilares de barra, anodizado azul claro                                      |          |          |                                                                                                             | Torque   |         |
|  | COMFOUR®<br><br>Pilares de barra, recto, angulado 17° y 30° | 3.6 mm<br><br>J4012.1601 |          |          | 3.8 mm<br><br>J4012.2001 |          | 15 Ncm* |
|                                                                                   |                                                             | Tornillo transoclusal Vario SR, anodizado amarillo                                                        |          |          |                                                                                                             |          |         |
|  | Pilares Vario SR, recto, angulado 20° y 30°                 | 4 mm<br><br>J4005.2004  |          |          |                                                                                                             |          | 15 Ncm* |

## Tornillos auxiliares Aplicación intraoral y extraoral

### Unión pilar-prótesis

|                                                                                     |                                                             | Ø 3.3 mm                                                                                                      | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm                                                                                                       | Ø 6.0 mm |        |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|--|
|                                                                                     |                                                             | M 1.6                                                                                                         |          |          | M 2.0                                                                                                          |          |        |                 |  |
| Artículo                                                                            |                                                             | Tornillos transoclusales para pilares de barra, anodizado azul claro                                          |          |          |                                                                                                                |          | Torque |                 |  |
|  | Casquillo de escaneado para pilares de barra                | 3.6 mm<br><br>J4012.1601   |          |          | 3.8 mm<br><br>J4012.2001  |          |        | apretado a mano |  |
|                                                                                     |                                                             | Tornillos para pilares de barra, para toma de impresión cubeta abierta y para la soldar, anodizado azul claro |          |          |                                                                                                                |          |        |                 |  |
|  | COMFOUR®<br><br>Pilares de barra, recto, angulado 17° y 30° | 12 mm<br><br>J4012.1610    |          |          | 12.2 mm<br><br>J4012.2010 |          |        | apretado a mano |  |
|                                                                                     |                                                             | 17 mm<br><br>J4012.1615    |          |          | 17.2 mm<br><br>J4012.2015 |          |        |                 |  |
|                                                                                     |                                                             | 22 mm<br><br>J4012.1620    |          |          | 22.2 mm<br><br>J4012.2020 |          |        |                 |  |
|                                                                                     |                                                             | Tornillos de plástico para pilar de barra, como ayuda para la fijación y el cementado, beis                   |          |          |                                                                                                                |          |        |                 |  |
|                                                                                     |                                                             | 29 mm<br><br>J4009.1627    |          |          | 29.2 mm<br><br>J4009.2027 |          |        | apretado a mano |  |


\* con llave de carraca dinamométrica J5320.1030

Todos los tornillos deben apretarse una segunda vez con el torque correspondiente después de al menos 5 minutos!

# Sinopsis de los tornillos

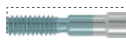Tornillos de laboratorio – aplicación extraoral

## Unión análogo de laboratorio-pilar

|                                                                                     |                                                                                                | Ø 3.3 mm                                                                                                     | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm                                                                                                       | Ø 5.0 mm                                                                                                     | Ø 6.0 mm           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                     |                                                                                                | M 1.6                                                                                                        |          |                                                                                                                | M 2.0                                                                                                        |                    |                    |
| Artículo                                                                            |                                                                                                | Tornillos de laboratorio CAMLOG®*, anodizado marrón                                                          |          |                                                                                                                |                                                                                                              | Torque             |                    |
|    | Pilares provisional PEEK,<br>incl. PS<br><br>Scanbody<br><br>ScanPost para<br>Sirona® Scanbody | <br>10.5 mm<br>J4006.1601   |          |                                                                                                                | <br>10.5 mm<br>J4006.2001 |                    | apretado<br>a mano |
|    | Pilares provisional titanio,<br>corona y puente                                                |                                                                                                              |          |                                                                                                                |                                                                                                              |                    |                    |
|    | Pilares Esthomic®,<br>incl. PS                                                                 |                                                                                                              |          |                                                                                                                |                                                                                                              |                    |                    |
|   | Pilar universal, incl. PS<br><br>Pilar telescópico<br><br>Pilar de oro                         |                                                                                                              |          |                                                                                                                |                                                                                                              |                    |                    |
|  | Pilar cerámico                                                                                 |                                                                                                              |          |                                                                                                                |                                                                                                              |                    |                    |
|  | Base de titanio CAD/CAM,<br>corona, incl. PS y puente                                          |                                                                                                              |          |                                                                                                                |                                                                                                              |                    |                    |
|  | Pilares Vario SR<br>angulado 20° y 30°                                                         |                                                                                                              |          |                                                                                                                |                                                                                                              |                    |                    |
|  | Blank de titanio para CAM<br>CAMLOG®, tipo IAC y ME                                            |                                                                                                              |          |                                                                                                                |                                                                                                              |                    |                    |
|                                                                                     |                                                                                                | Poste de ayuda CAMLOG®**                                                                                     |          |                                                                                                                |                                                                                                              |                    |                    |
|  | Base de titanio CAD/CAM,<br>corona y puente                                                    | <br>27.5 mm              |          | <br>27.5 mm               |                                                                                                              | apretado<br>a mano |                    |
|                                                                                     |                                                                                                | Tornillos de laboratorio CAMLOG® Vario SR*, anodizado marrón                                                 |          |                                                                                                                |                                                                                                              |                    |                    |
|  | Pilar Vario SR,<br>recto                                                                       | <br>11.9 mm<br>J4008.1600 |          | <br>11.9 mm<br>J4008.2000 |                                                                                                              | apretado<br>a mano |                    |
|                                                                                     |                                                                                                | Tornillos de laboratorio CAMLOG®* con cabeza reducida,<br>parcialmente anodizado azul claro                  |          |                                                                                                                |                                                                                                              |                    |                    |
|  | COMFOUR®<br><br>Pilares de barra,<br>angulado 17° y 30°                                        | <br>9.5 mm<br>J4004.1600  |          | <br>9.5 mm<br>J4004.2000  |                                                                                                              | apretado<br>a mano |                    |

\* Los tornillos de laboratorio no deben usarse en el paciente.

\*\* no están disponibles por separado, se incluyen en el envase de la base de titanio CAD/CAM.

## Unión pilar-prótesis

|                                                                                     |                                                                                                                          | Ø 3.3 mm                                                                                                                                                                                                    | Ø 3.8 mm | Ø 4.3 mm | Ø 5.0 mm                                                                                                                                 | Ø 6.0 mm |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     |                                                                                                                          | M 1.6                                                                                                                                                                                                       |          |          | M 2.0                                                                                                                                    |          |                 |                 |
| Artículo                                                                            |                                                                                                                          | Tornillos transoclusales de laboratorio para pilares de barra*, anodizado marrón                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                          |          | Torque          |                 |
|    | Casquillo de escaneado para pilares de barra                                                                             | <div>3.6 mm</div> <div></div> <div>J4013.1601</div>                                                                        |          |          | <div>3.8 mm</div> <div></div> <div>J4013.2001</div>   |          |                 | apretado a mano |
|    | <b>COMFOUR®</b><br>Pilares de barra, recto, angulado 17° y 30°                                                           |                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                          |          |                 |                 |
|    | Análogo de laboratorio de barra para pilares de barra                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                          |          |                 |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                          | Tornillo transoclusal Vario SR, anodizado amarillo                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                          |          |                 |                 |
|    | Pilares Vario SR, recto, angulado 20° y 30°                                                                              | <div>4 mm</div> <div></div> <div>J4005.2004</div>                                                                        |          |          |                                                                                                                                          |          | apretado a mano |                 |
|  | Análogo Vario SR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                                                                                                          |          |                 |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                          | Tornillos transoclusales para pilares de barra*, para la fabricación del encerado sobre el casquillo de barra calcinable para la base adhesiva de titanio Passive-Fit en el análogo de laboratorio de barra |          |          |                                                                                                                                          |          |                 |                 |
|  | Base adhesiva de titanio para pilar de barra y casquillo de barra para base adhesiva de titanio, calcinable, Passive-Fit | <div>5.5 mm</div> <div></div> <div>J4005.1602</div>                                                                      |          |          | <div>5.5 mm</div> <div></div> <div>J4005.2002</div> |          |                 | apretado a mano |

\* Los tornillos de laboratorio no deben usarse en el paciente.

| Artículo                                                                                                                                                                                               | Instrumentos                                                                                                                | Torque            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <p>Tornillo de cierre del implante</p>                                                                               |                                                                                                                             | apretado a mano** |
|  <p>Casquillo de cicatrización (incl. PS)<br/>cilíndrico, wide body, bottleneck</p>                                   |                                                                                                                             |                   |
|  <p>Casquillo de toma de impresión (incl. PS)<br/>Pilar de registro de mordida</p>                                    |                                                                                                                             |                   |
|  <p>Tornillos de laboratorio<br/>Tornillos de laboratorio con cabeza reducida</p>                                     |                                                                                                                             |                   |
|  <p>Pilar provisional, PEEK, incl. PS<br/>Pilar provisional, aleación de titanio, corona y puente, incl. PS</p>      |                                                                                                                             |                   |
|  <p>Tornillos del pilar<br/>Tornillos del pilar con cabeza reducida</p>                                             |  <p>J5317.0510 J5317.0501 J5317.0502</p> | 20 Ncm*           |
|  <p>Pilar Esthomic®, recto, incl. PS<br/>Pilar Esthomic®, angulado 15°/20°, incl. PS<br/>Pilar Esthomic®, Inset</p> |  <p>J5317.0504 J5317.0503</p>           |                   |
|  <p>Pilar de oro<br/>Pilar universal<br/>Pilar telescópico<br/>Pilar cerámico</p>                                   |                                                                                                                             |                   |
|  <p>Pilar Logfit®<br/>Bases de titanio CAD/CAM, corona y puente</p>                                                 |                                                                                                                             |                   |
|  <p>Blank de titanio para CAM CAMLOG®, tipo IAC y ME</p>                                                            |                                                                                                                             |                   |

\* con llave de carraca dinamométrica J5320.1030

\*\* Opcional para los pilares provisionales de titanio: torque después de la fase de cicatrización 20 Ncm.

Todos los tornillos deben apretarse una segunda vez con el torque correspondiente después de al menos 5 minutos!

|                                                                                     |                                                                                     | 3.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.8 mm                                                                            | 4.3 mm                                                                              | Ø 5.0 mm | 3.3             | 3.8        | 4.3     | 5.0     | 6.0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|---------|---------|-----|
| Artículo                                                                            |                                                                                     | Instrumentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |          | Torque          |            |         |         |     |
|    | Pilares de barra, recto                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |          | 20 Ncm*         | 30 Ncm*    |         |         |     |
|                                                                                     |                                                                                     | J5300.0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J5300.0021                                                                        | J5300.0025                                                                          |          |                 |            |         |         |     |
|    | Pilares de barra angulado 17° y 30°                                                 |   <br>  |                                                                                   |                                                                                     |          | 20 Ncm*         |            |         |         |     |
|    | Casquillo de escaneado para pilares de barra                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |          | apretado a mano |            |         |         |     |
|    | Casquillos de titanio para pilares de barra, corona/puente                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |          | 15 Ncm*         |            |         |         |     |
|    | Base de corona para pilar de barra, calcinable                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |          |                 |            |         |         |     |
|   | Bases para pilares de barra, calcinable, sobrecolable, soldable, soldable por láser |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |          |                 |            |         |         |     |
|  | Base adhesiva de titanio para pilar de barra, Passive-Fit                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |          |                 |            |         |         |     |
|  | Pilar Locator R-Tx®                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |          | J5317.0504      | J5317.0503 | 20 Ncm* | 30 Ncm* |     |
|  | Casquillo de cicatrización para pilar de barra                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |          | apretado a mano |            |         |         |     |
|  | Casquillo de toma de impresión para pilar de barra, cubeta cerrada (puente/barra)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |          | J5300.0027      | J5300.0028 |         |         |     |
|  | Pilares de bola                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |          | 20 Ncm*         | 30 Ncm*    |         |         |     |
|                                                                                     |                                                                                     | J5300.0011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |          |                 |            |         |         |     |
|  | Pilares Locator®                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |          | 20 Ncm*         |            |         |         |     |
|  | Aditamento Locator® para pilar de barra                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |          |                 |            |         |         |     |
|  | Scanbody                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |          | apretado a mano |            |         |         |     |
|  | ScanPost para Sirona® Scanbody                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |          |                 |            |         |         |     |
|                                                                                     |                                                                                     | J5317.0501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J5317.0502                                                                        |                                                                                     |          |                 |            |         |         |     |

\* con llave de carraca dinamométrica J5320.1030

Todos los tornillos deben apretarse una segunda vez con el torque correspondiente después de al menos 5 minutos!

# Materiales

| Titanio de grado 4         |                        |           |
|----------------------------|------------------------|-----------|
| Propiedades (ASTM F67)     |                        |           |
| Composición química (en %) | O                      | ≤ 0.4     |
|                            | Fe                     | ≤ 0.5     |
|                            | C                      | ≤ 0.08    |
|                            | N                      | ≤ 0.05    |
|                            | H                      | ≤ 0.015   |
|                            | Ti                     | Resto     |
| Propiedades mecánicas      | Resistencia            | ≥ 550 MPa |
|                            | Alargamiento de rotura | ≥ 12 %    |

| Aleación de titanio Ti6Al4V ELI |                        |           |
|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Propiedades (ASTM F136)         |                        |           |
| Composición química (en %)      | Al                     | 5.5 – 6.5 |
|                                 | V                      | 3.5 – 4.5 |
|                                 | Fe                     | ≤ 0.25    |
|                                 | C                      | ≤ 0.08    |
|                                 | N                      | ≤ 0.05    |
|                                 | O                      | ≤ 0.13    |
|                                 | H                      | ≤ 0.012   |
|                                 | Ti                     | Resto     |
| Propiedades mecánicas           | Resistencia            | ≥ 860 MPa |
|                                 | Alargamiento de rotura | ≥ 10 %    |

| Aleación de oro sobrecolable pilar de oro CAMLOG® |                                                |                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Propiedades                                       |                                                |                |
| Composición química (en %)                        | Au                                             | 60             |
|                                                   | Pd                                             | 20             |
|                                                   | Pt                                             | 19             |
|                                                   | Ir                                             | 1              |
| Propiedades físicas                               | Intervalo de fusión                            | 1400 – 1490 °C |
|                                                   | Espesor                                        | 17.5 g/cm³     |
|                                                   | Módulo de elasticidad                          | 136 GPa        |
|                                                   | Coefficiente de expansión térmica (25 – 500°C) | 11.9 µm/m· °C  |
|                                                   | Coefficiente de expansión térmica (25 – 600°C) | 12.2 µm/m· °C  |
|                                                   | Color                                          | blanco         |
| Propiedades mecánicas                             |                                                | estirado       |
|                                                   | Dureza HV5                                     | > 215          |
|                                                   | Resistencia a la tracción                      | > 750 MPa      |
|                                                   | Límite de alargamiento 0.2% (Rp 0.2%)          | > 650 MPa      |
|                                                   | Alargamiento de rotura                         | > 2 %          |

| Aleación de oro sobrecolable base para pilar de barra |                                                |                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Propiedades                                           |                                                |                         |
| Composición química (en %)                            | Au                                             | 60                      |
|                                                       | Pt                                             | 19                      |
|                                                       | Pd                                             | 20                      |
|                                                       | Ir                                             | 1                       |
| Propiedades físicas                                   | Espesor                                        | 17.5 g/cm³              |
|                                                       | Color                                          | blanco                  |
|                                                       | Líquido                                        | 1490 °C                 |
|                                                       | Sólido                                         | 1400 °C                 |
|                                                       | Coefficiente de expansión térmica (25 – 500°C) | 12.5 µm/m· °C           |
|                                                       | Coefficiente de expansión térmica (25 – 600°C) | 12.6 µm/m· °C           |
| Propiedades mecánicas                                 | Módulo E                                       | 136 GPa                 |
|                                                       |                                                | fraguado 700 °C/30 min. |
|                                                       | Dureza HV5                                     | 210                     |
|                                                       | 0.2 % Límite de alargamiento                   | 450 – 570 MPa           |
|                                                       | Alargamiento de rotura                         | min. 10 %               |
|                                                       | Resistencia a la tracción MPa                  | 530 – 650               |

| Aleación de oro soldable base para pilar de barra |                     |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Propiedades                                       |                     |              |
| Composición química (in %)                        | Au                  | 68.60        |
|                                                   | Pt                  | 2.45         |
|                                                   | Ag                  | 11.85        |
|                                                   | Pd                  | 3.95         |
|                                                   | Cu                  | 10.60        |
|                                                   | Zn                  | 2.50         |
|                                                   | Ir                  | 0.05         |
|                                                   | Rh                  | -            |
|                                                   | Ru                  | -            |
| Propiedades físicas                               | Color               | amarillo     |
|                                                   | Intervalo de fusión | 880 – 940 °C |
| Propiedades mecánicas                             | Dureza              |              |
|                                                   | ablandado HV5       | 175          |
|                                                   | fraguado HV5        | 275          |
|                                                   | autoendurecido HV5  | 240          |

|                                                                   |        |                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|
| <b>A</b>                                                          |        | <b>B</b>                                            |        |
| Adaptador de la llave de carraca                                  | 27     | Bandeja quirúrgica                                  | 22     |
| Adaptador manual                                                  | 45     | CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE                   |        |
| Adaptador para implantes de tornillo                              | 48     | Bandeja quirúrgica                                  | 26     |
| Adaptador roscado CAMLOG® y CONELOG®                              | 23     | CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Flex              |        |
| Adaptador vástago ISO para contraángulo/carraca                   | 47     | Bandeja quirúrgica Cirugía Guiada                   | 30     |
| Aditamento Locator® para pilar de barra                           | 72     | CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE                   |        |
| Aguja de limpieza                                                 | 49     | Base adhesiva de titanio para pilar de barra        | 71     |
| Aguja para pretaladrar ALTApin                                    | 55     | Base de corona para pilar de barra                  | 71     |
| Aguja para pretaladrar ALTApin, pieza insertada                   | 56     | Base de titanio CAD/CAM                             | 64     |
| Análogo de implante                                               | 61     | Base de titanio CAD/CAM PS para Platform Switching  | 64     |
| Análogo de implante de barra para pilares de barra                | 70     | Bases para pilar de barra                           | 71     |
| Análogo de laboratorio                                            | 61     | Bisturís circulares Cirugía Guiada                  | 41     |
| Análogo de laboratorio de barra para soldar para pilares de barra | 70     | Bisturís circulares Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE | 30     |
| Análogo de pilar de bola                                          | 74     | Blank de titanio para CAM                           | 66     |
| Análogo Locator®                                                  | 76     | <b>C</b>                                            |        |
| Análogo Locator R-Tx®                                             | 74, 75 | Calibre de medición angular Locator®                | 81     |
| Análogos Logfit®                                                  | 68     | Cánula de limpieza                                  | 49     |
| Aplicador ALTApin                                                 | 54     | Carcasa de titanio Locator R-Tx®                    | 75     |
| Avellanador                                                       | 44     | Carnet del implante                                 | 90     |
| Ayuda para el modelado CAMLOG® para base de titanio CAD/CAM       | 65     | Carpeta de presentación                             | 90     |
| <b>B</b>                                                          |        | Cartucho ALTApin                                    | 56     |
| Bandeja ALTApin                                                   | 54     | Casquillo calcinable Logfit®                        | 68     |
| Bandeja de cirugía para el reprocesado                            |        | Casquillo de barra para base adhesiva de titanio    | 71     |
| CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE                                 | 22     | Casquillo de cicatrización                          | 57     |
| CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE                                       | 38     | Casquillo de cicatrización PS                       | 58     |
| Bandeja de quirúrgica                                             | 38     | Casquillo de escaneado para pilares de barra        | 70     |
| CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE                                       |        | Casquillo de soporte del pilar Locator®             | 81     |
| Bandeja protésica                                                 | 82     | Casquillo de titanio para pilar de barra            | 70, 71 |
| Bandeja protésica universales                                     | 82     | Casquillo de toma de impresión Locator®             | 76     |
|                                                                   |        | Casquillo de toma de impresión Locator R-Tx®        | 74     |



## C

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Casquillo de toma de impresión Logfit®                                            | 68 |
| Casquillo de toma de impresión para pilar de barra, cubeta cerrada (puente/barra) | 70 |
| Casquillo guía Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE                                    | 32 |
| Casquillo para colocar el instrumento auxiliar de inserción en el implante        | 48 |
| Casquillo para la planificación mediante TC                                       | 17 |
| Casquillo para registro de mordida                                                | 61 |
| Casquillos de cicatrización para pilar de barra                                   | 70 |
| Casquillos de toma de impresión                                                   | 60 |
| Casquillos de toma de impresión PS                                                | 60 |
| Casquillos guía Cirugía Guiada                                                    | 41 |
| Cazoleta de titanio sin retención para pilar de barra                             | 71 |
| COMFOUR® Folleto para el paciente                                                 | 90 |
| Componente auxiliar                                                               | 70 |
| Componente hembra CM Dalbo®-Plus                                                  | 73 |
| Cuaderno de citas                                                                 | 91 |

## D

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Dense bone drill Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE | 31             |
| Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE                | 23             |
| Destornillador Activador                         | 80             |
| Destornillador, hex                              | 48, 49, 82, 83 |
| Destornillador manual, hex                       | 49, 83         |
| DIM Analog® para el sistema de implantes CAMLOG® | 61             |

## E

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| El kit quirúrgico                                    |    |
| CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE                    | 22 |
| CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE Flex               | 26 |
| CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE                          | 38 |
| Escariador para el acabado, base para pilar de barra | 84 |
| Espaciador bloqueador Locator®                       | 77 |

## E

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Espaciador para el procesado Locator R-Tx® | 75 |
| Espiga guía para fresa avellanadora        | 44 |

## F

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fijador de membrana ALTApin                                                   | 55 |
| Folleto para el paciente                                                      | 90 |
| Folletos de asesoramiento para el paciente                                    | 90 |
| Fresa avellanadora                                                            | 44 |
| Fresa cónica Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE                                  | 31 |
| Fresa cónica SCREW-LINE                                                       | 43 |
| Fresa de perfil Cirugía Guiada para Ø 3,8 mm con preparación PROGRESSIVE-LINE | 31 |
| Fresa de perfil Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE                               | 31 |
| Fresa de perfil PROGRESSIVE-LINE                                              | 23 |
| Fresa de perfil SCREW-LINE                                                    | 39 |
| Fresa de perfil SCREW-LINE para hueso cortical                                | 39 |
| Fresa desechable ALTApin, vástago ISO                                         | 55 |
| Fresa lanceta                                                                 | 32 |
| Fresa para colocar el casquillo de TC estriado                                | 17 |
| Fresa para escayola para mango universal                                      | 84 |
| Fresa para férula Cirugía Guiada                                              | 42 |
| Fresa para férula Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE                             | 32 |
| Fresa para hueso cortical Cirugía Guiada SCREW-LINE                           | 41 |
| Fresa para la exposición para el tornillo de cierre                           | 44 |
| Fresa perfilada PROGRESSIVE-LINE Flex                                         | 27 |
| Fresa piloto                                                                  | 43 |
| Fresa piloto Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE                                  | 30 |
| Fresa piloto SCREW-LINE                                                       | 43 |
| Fresa PROGRESSIVE-LINE Flex                                                   | 27 |
| Fresa redonda                                                                 | 43 |

## I

|                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Implante de prácticas PROGRESSIVE-LINE y SCREW-LINE                                                               | 88     |
| Implante PROGRESSIVE-LINE, Promote® plus                                                                          | 19     |
| Implante SCREW-LINE, Promote®                                                                                     | 34, 35 |
| Implante SCREW-LINE, Promote® plus                                                                                | 34, 35 |
| Indicador de la altura gingival, recto                                                                            | 70     |
| Instrumento de inserción Cirugía Guiada                                                                           | 42     |
| Instrumento de inserción Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE                                                          | 32     |
| Instrumento de inserción para casquillos de toma de impresión y casquillos de cicatrización para pilares de barra | 70, 81 |
| Instrumento de inserción para piezas retentivas Locator R-Tx®                                                     | 82     |
| para pilar de bola, manual/carraca                                                                                | 80     |
| para pilar de barra recto                                                                                         | 80, 81 |
| para pilar Locator®                                                                                               | 81     |
| cardánico (30°)                                                                                                   | 47     |
| para implantes de tornillo                                                                                        | 46     |
| Instrumento Locator®                                                                                              | 81     |
| Instrumento PickUp                                                                                                | 47     |

## K

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Kit de osteotomos CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE | 50, 51, 52, 53 |
| Kit de pilares de planificación               | 85             |

## L

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Llave de carraca dinamométrica     | 80 |
| Llave de inserción, para implantes | 46 |
| Llave guía                         | 48 |

## M

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Macho de rosca PROGRESSIVE-LINE           | 23 |
| Macho de rosca SCREW-LINE                 | 39 |
| Macromodelo PROGRESSIVE-LINE y SCREW-LINE | 89 |

## M

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Mango para el análogo de implante CAMLOG®/CONELOG® | 83 |
| Mango universal                                    | 84 |
| Martillo quirúrgico ALTApin                        | 55 |
| Maxilar inferior desdentado                        | 89 |
| Modelo de exposición, cristal acrílico             | 89 |

## O

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Osteotomos SCREW-LINE | 50, 51, 52, 53 |
|-----------------------|----------------|

## P

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Paralelizador PROGRESSIVE-LINE                      | 23     |
| Paralelizador SCREW-LINE                            | 45     |
| Perno de control Cirugía Guiada                     | 42     |
| Perno de control Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE    | 32     |
| Pieza macho para procesamiento Locator®             | 77     |
| Pieza macho para procesamiento Locator R-Tx®        | 75     |
| Pieza retentiva de laminillas                       | 74     |
| Pieza retentiva Locator®                            | 77, 78 |
| Pieza retentiva Locator® para angulación ampliada   | 78     |
| Pieza retentiva Locator R-Tx®                       | 75, 76 |
| Pilar de oro                                        | 67     |
| Pilar para el registro de la mordida                | 61     |
| Pilar provisional                                   | 62     |
| Pilar provisional PS, PEEK, para Platform Switching | 62     |
| Pilar universal                                     | 67, 79 |
| Pilar universal PS para Platform Switching          | 67, 79 |
| Pilares de barra                                    | 69     |
| Pilares Esthomic®                                   | 62, 63 |
| Pilares Esthomic®, Inset                            | 63     |

|                                                                                                  |                |                                                                           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>P</b>                                                                                         |                | <b>S</b>                                                                  |        |
| Pilares Locator®                                                                                 | 76             | Scanbody                                                                  | 65     |
| Pilares Locator R-Tx®                                                                            | 74             | ScanPost se emplean junto con los<br>Scanbodies de Sirona®                | 65     |
| Pilares Logfit®                                                                                  | 68             | Set ALTApin                                                               | 54     |
| Pilares PS Esthomic®                                                                             | 63             | Set de fresa piloto Cirugía Guiada                                        | 40     |
| Pilares telescópicos para la técnica de corona<br>telescópica                                    | 79             | Set de pilar de bola, componentes macho                                   | 73     |
| Plantilla de orientación para COMFOUR®                                                           | 70             | Set protésico                                                             | 82     |
| Plantilla para la bandeja de cirugía para el<br>reprocesado CAMLOG®/CONELOG® PROGRESSIVE-LINE    | 22             | Set quirúrgico Cirugía Guiada, SCREW-LINE                                 | 40     |
| Plantilla para la bandeja de cirugía para el<br>reprocesado CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE          | 38             | Sets de laboratorio Locator®                                              | 77     |
| Plantilla radiográfica de planificación<br>1.25:1 Implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE             | 16             | Sets de laboratorio Locator® para divergencia                             | 77     |
| Plantilla radiográfica de planificación<br>1.25:1 Implantes CAMLOG® SCREW-LINE                   | 16             | Soporte de pilar                                                          | 84     |
| Plantilla radiográfica de planificación<br>1.4:1 Implantes CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE              | 16             | Soporte para blank para CAM, tipo IAC                                     | 66     |
| Plantilla radiográfica de planificación<br>1.4:1 Implantes CAMLOG® SCREW-LINE                    | 16             | <b>T</b>                                                                  |        |
| Plantillas autoadhesiva de planificación<br>1.25:1 Implantes CAMLOG® SCREW-LINE                  | 16             | Tope de profundidad para fresa de perfil<br>PROGRESSIVE-LINE y SCREW-LINE | 23, 39 |
| Poste de inserción Cirugía Guiada CAMLOG®                                                        | 32, 42         | Tope de profundidad SCREW-LINE para fresa<br>piloto y fresa cónica        | 44     |
| Póster                                                                                           | 91             | Tornillo de cierre del implante                                           | 57     |
| Postes para paralelizar el Locator®                                                              | 81             | Tornillo de laboratorio, hex                                              | 79     |
| Pre-osteotomo SCREW-LINE                                                                         | 50, 51, 52, 53 | Tornillo de laboratorio con cabeza reducida, hex                          | 72     |
| Prolongador de fresas vástago ISO<br>(no está indicado para fresas con<br>refrigeración interna) | 45             | Tornillo de pilar con cabeza reducida, hex                                | 72     |
| Prolongador de fresas vástago ISO,<br>para instrumentos con refrigeración interna                | 42             | Tornillo de pilar, hex                                                    | 79     |
| Protector para pulido para casquillos y<br>bases para pilar de barra                             | 72             | Tornillo de plástico para pilar de barra                                  | 73     |
|                                                                                                  |                | Tornillo transoclusal de laboratorio,<br>para pilar de barra              | 72     |
|                                                                                                  |                | Tornillo transoclusal, para pilar de barra                                | 72     |
|                                                                                                  |                | Tornillo, hex                                                             | 72, 73 |
| <b>R</b>                                                                                         |                |                                                                           |        |
| Retenedor para casquillos de toma<br>de impresión, cubeta cerrada                                | 60             |                                                                           |        |

## Índice Por referencias

|            |                                                               |    |            |                                             |                                                |                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------|----|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 05003503   | Componente hembra CM Dalbo®-Plus                              | 73 |            |                                             | Fresa para colocar el casquillo de TC estriado |                                        |
| 05003504   | Pieza retentiva de laminillas                                 | 74 | A2050.2600 | Ø 2.6 mm                                    | 17                                             |                                        |
|            |                                                               |    | A2050.2800 | Ø 2.8 mm                                    | 17                                             |                                        |
| 07000389   | Destornillador Activador                                      | 80 |            |                                             |                                                |                                        |
| 08394      | Casquillo de soporte del pilar Locator®                       | 81 | A2222.2200 | Casquillo para la planificación mediante TC | 17                                             |                                        |
|            | Pieza retentiva Locator R-Tx®                                 |    | B1012      | Fresa lanceta                               | 43                                             |                                        |
| 30001-01   | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm, gris                                    | 75 |            |                                             |                                                |                                        |
| 30002-01   | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm, azul                                    | 75 |            |                                             |                                                |                                        |
| 30003-01   | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm, rosa                                    | 76 | J2011.3340 | Ø 3.3 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30004-01   | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm, blanco                                  | 76 | J2011.3840 | Ø 3.8 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            |                                                               |    | J2011.3860 | Ø 3.8 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            | Pieza macho para procesamiento Locator R-Tx®                  |    | J2011.4340 | Ø 4.3 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            |                                                               |    | J2011.4360 | Ø 4.3 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30012-01   | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm                                          | 75 | J2011.5040 | Ø 5.0 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            |                                                               |    | J2011.5060 | Ø 5.0 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            | Carcasa de titanio Locator R-Tx®                              |    | J2011.6040 | Ø 6.0 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30013-01   | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm                                          | 75 | J2011.6060 | Ø 6.0 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            | Análogo Locator R-Tx®                                         |    |            |                                             |                                                | Casquillo de cicatrización, wide body  |
| 30014-01   | Ø 3.3 mm                                                      | 74 | J2014.3320 | Ø 3.3 mm, AG 2.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30015-01   | Ø 3.8/4.3 mm                                                  | 75 | J2014.3340 | Ø 3.3 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30016-01   | Ø 5.0 mm                                                      | 75 | J2014.3820 | Ø 3.8 mm, AG 2.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            |                                                               |    | J2014.3840 | Ø 3.8 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            | Casquillo de toma de impresión Locator R-Tx®                  |    | J2014.3860 | Ø 3.8 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            |                                                               |    | J2014.4320 | Ø 4.3 mm, AG 2.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30017-01   | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm                                          | 74 | J2014.4340 | Ø 4.3 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            |                                                               |    | J2014.4360 | Ø 4.3 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            | Espaciador para el procesado Locator R-Tx®                    |    | J2014.5020 | Ø 5.0 mm, AG 2.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            |                                                               |    | J2014.5040 | Ø 5.0 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30018-01   | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm                                          | 75 | J2014.5060 | Ø 5.0 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            |                                                               |    | J2014.6020 | Ø 6.0 mm, AG 2.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30021-01   | Instrumento de inserción para piezas retentivas Locator R-Tx® | 82 | J2014.6040 | Ø 6.0 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            |                                                               |    | J2014.6060 | Ø 6.0 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
|            | Pilares Locator R-Tx®                                         |    |            |                                             |                                                | Casquillo de cicatrización, cilíndrico |
| 30800-01   | Ø 3.3 mm, AG 1.0 mm                                           | 74 | J2015.3320 | Ø 3.3 mm, AG 2.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30800-02   | Ø 3.3 mm, AG 2.0 mm                                           | 74 | J2015.3340 | Ø 3.3 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30800-03   | Ø 3.3 mm, AG 3.0 mm                                           | 74 | J2015.3820 | Ø 3.8 mm, AG 2.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30800-04   | Ø 3.3 mm, AG 4.0 mm                                           | 74 | J2015.3840 | Ø 3.8 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30801-01   | Ø 3.8 mm, AG 1.0 mm                                           | 74 | J2015.3860 | Ø 3.8 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30801-02   | Ø 3.8 mm, AG 2.0 mm                                           | 74 | J2015.4320 | Ø 4.3 mm, AG 2.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30801-03   | Ø 3.8 mm, AG 3.0 mm                                           | 74 | J2015.4340 | Ø 4.3 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30801-04   | Ø 3.8 mm, AG 4.0 mm                                           | 74 | J2015.4360 | Ø 4.3 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30801-05   | Ø 3.8 mm, AG 5.0 mm                                           | 74 | J2015.5020 | Ø 5.0 mm, AG 2.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30802-01   | Ø 4.3 mm, AG 1.0 mm                                           | 74 | J2015.5040 | Ø 5.0 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30802-02   | Ø 4.3 mm, AG 2.0 mm                                           | 74 | J2015.5060 | Ø 5.0 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30802-03   | Ø 4.3 mm, AG 3.0 mm                                           | 74 | J2015.6020 | Ø 6.0 mm, AG 2.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30802-04   | Ø 4.3 mm, AG 4.0 mm                                           | 74 | J2015.6040 | Ø 6.0 mm, AG 4.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30802-05   | Ø 4.3 mm, AG 5.0 mm                                           | 74 | J2015.6060 | Ø 6.0 mm, AG 6.0 mm                         | 57                                             |                                        |
| 30803-01   | Ø 5.0 mm, AG 1.0 mm                                           | 74 |            |                                             |                                                |                                        |
| 30803-02   | Ø 5.0 mm, AG 2.0 mm                                           | 74 |            |                                             |                                                | Tornillo de cierre                     |
| 30803-03   | Ø 5.0 mm, AG 3.0 mm                                           | 74 | J2019.3300 | Ø 3.3 mm                                    | 57                                             |                                        |
| 30803-04   | Ø 5.0 mm, AG 4.0 mm                                           | 74 | J2019.3800 | Ø 3.8 mm                                    | 57                                             |                                        |
| 30803-05   | Ø 5.0 mm, AG 5.0 mm                                           | 74 | J2019.4300 | Ø 4.3 mm                                    | 57                                             |                                        |
|            |                                                               |    | J2019.5000 | Ø 5.0 mm                                    | 57                                             |                                        |
| A2002.2000 | Casquillo para la planificación mediante TC                   | 17 | J2019.6000 | Ø 6.0 mm                                    | 57                                             |                                        |

|            |                                                                                    |    |            |                                                   |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------------------------------------------|----|
|            | Casquillos de cicatrización para pilar de barra                                    |    | J2253.0002 | Instrumento Locator®                              | 81 |
| J2029.4300 | Ø 3.3/3.8/4.3 mm                                                                   | 70 | J2253.0003 | Calibre de medición angular Locator®              | 81 |
| J2029.6000 | Ø 5.0 mm                                                                           | 70 | J2253.0004 | Postes para paralelizar el Locator®               | 81 |
|            | Retenedor para casquillos de toma de impresión, cubeta cerrada                     |    | J2253.0102 | Sets de laboratorio Locator®                      | 77 |
| J2111.3300 | Ø 3.3 mm                                                                           | 60 | J2253.0112 | Sets de laboratorio Locator® para divergencia     | 77 |
| J2111.3800 | Ø 3.8 mm                                                                           | 60 | J2253.0200 | Casquillo de toma de impresión Locator®           | 76 |
| J2111.4300 | Ø 4.3 mm                                                                           | 60 |            |                                                   |    |
| J2111.5000 | Ø 5.0 mm                                                                           | 60 |            |                                                   |    |
| J2111.6000 | Ø 6.0 mm                                                                           | 60 |            |                                                   |    |
|            | Casquillo para registro de mordida                                                 |    |            | Análogo Locator®                                  |    |
| J2112.3300 | Ø 3.3 mm                                                                           | 61 | J2253.0340 | Ø 3.3/3.8/4.3 mm                                  | 76 |
| J2112.3800 | Ø 3.8 mm                                                                           | 61 | J2253.0350 | Ø 5.0 mm                                          | 76 |
| J2112.4300 | Ø 4.3 mm                                                                           | 61 | J2253.0401 | Espaciador bloqueador Locator®                    | 77 |
| J2112.5000 | Ø 5.0 mm                                                                           | 61 | J2253.0402 | Pieza macho para procesamiento Locator®           | 77 |
| J2112.6000 | Ø 6.0 mm                                                                           | 61 |            |                                                   |    |
|            | Casquillo de toma de impresión, para pilar de barra, cubeta cerrada (puente/barra) |    |            | Pieza retentiva Locator®                          |    |
| J2129.4300 | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, corto                                                            | 70 | J2253.1002 | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm, azul                        | 78 |
| J2129.4310 | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, largo                                                            | 70 | J2253.1003 | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm, rosa                        | 78 |
| J2129.6000 | Ø 5.0 mm, corto                                                                    | 70 | J2253.1005 | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm, transparente                | 77 |
| J2129.6010 | Ø 5.0 mm, largo                                                                    | 70 |            |                                                   |    |
|            | Pilar para el registro de la mordida                                               |    |            | Pieza retentiva Locator® para angulación ampliada |    |
| J2140.3300 | Ø 3.3 mm                                                                           | 61 | J2253.2000 | Ø 3.8/4.3/5.0 mm, gris                            | 78 |
| J2140.3800 | Ø 3.8 mm                                                                           | 61 | J2253.2002 | Ø 3.8/4.3/5.0 mm, rojo                            | 78 |
| J2140.4300 | Ø 4.3 mm                                                                           | 61 | J2253.2003 | Ø 3.8/4.3/5.0 mm, naranja                         | 78 |
| J2140.5000 | Ø 5.0 mm                                                                           | 61 | J2253.2004 | Ø 3.8/4.3/5.0 mm, verde                           | 78 |
| J2140.6000 | Ø 6.0 mm                                                                           | 61 |            |                                                   |    |
|            | Ayuda para el modelado para base de titanio CAD/CAM CAMLOG®                        |    | J2253.3310 | Pilares Locator®                                  |    |
| J2244.3302 | Ø 3.3 mm                                                                           | 65 | J2253.3320 | Ø 3.3 mm, AG 1.0 mm                               | 76 |
| J2244.3802 | Ø 3.8 mm                                                                           | 65 | J2253.3330 | Ø 3.3 mm, AG 2.0 mm                               | 76 |
| J2244.4302 | Ø 4.3 mm                                                                           | 65 | J2253.3340 | Ø 3.3 mm, AG 3.0 mm                               | 76 |
| J2244.5002 | Ø 5.0 mm                                                                           | 65 | J2253.3810 | Ø 3.3 mm, AG 4.0 mm                               | 76 |
| J2244.6002 | Ø 6.0 mm                                                                           | 65 | J2253.3820 | Ø 3.8 mm, AG 1.0 mm                               | 76 |
|            | Set de pilar de bola, componentes macho                                            |    | J2253.3830 | Ø 3.8 mm, AG 2.0 mm                               | 76 |
| J2249.3315 | Ø 3.3 mm, AG 1.5 mm                                                                | 73 | J2253.3840 | Ø 3.8 mm, AG 3.0 mm                               | 76 |
| J2249.3330 | Ø 3.3 mm, AG 3.0 mm                                                                | 73 | J2253.3850 | Ø 3.8 mm, AG 4.0 mm                               | 76 |
| J2249.3815 | Ø 3.8 mm, AG 1.5 mm                                                                | 73 | J2253.4310 | Ø 3.8 mm, AG 5.0 mm                               | 76 |
| J2249.3830 | Ø 3.8 mm, AG 3.0 mm                                                                | 73 | J2253.4320 | Ø 4.3 mm, AG 1.0 mm                               | 76 |
| J2249.3845 | Ø 3.8 mm, AG 4.5 mm                                                                | 73 | J2253.4330 | Ø 4.3 mm, AG 2.0 mm                               | 76 |
| J2249.4315 | Ø 4.3 mm, AG 1.5 mm                                                                | 73 | J2253.4340 | Ø 4.3 mm, AG 3.0 mm                               | 76 |
| J2249.4330 | Ø 4.3 mm, AG 3.0 mm                                                                | 73 | J2253.4350 | Ø 4.3 mm, AG 4.0 mm                               | 76 |
| J2249.4345 | Ø 4.3 mm, AG 4.5 mm                                                                | 73 | J2253.5010 | Ø 4.3 mm, AG 5.0 mm                               | 76 |
| J2249.5015 | Ø 5.0 mm, AG 1.5 mm                                                                | 73 | J2253.5020 | Ø 5.0 mm, AG 1.0 mm                               | 76 |
| J2249.5030 | Ø 5.0 mm, AG 3.0 mm                                                                | 73 | J2253.5030 | Ø 5.0 mm, AG 2.0 mm                               | 76 |
| J2249.5045 | Ø 5.0 mm, AG 4.5 mm                                                                | 73 | J2253.5040 | Ø 5.0 mm, AG 3.0 mm                               | 76 |
|            |                                                                                    |    | J2253.5050 | Ø 5.0 mm, AG 4.0 mm                               | 76 |
| J2253.0001 | Instrumento de inserción para pilar Locator®                                       | 81 |            | Ø 5.0 mm, AG 5.0 mm                               | 76 |
|            |                                                                                    |    | J2253.4301 | Aditamento Locator® para pilar de barra           |    |
|            |                                                                                    |    | J2253.6001 | Ø 3.3/3.8/4.3 mm                                  | 72 |
|            |                                                                                    |    |            | Ø 5.0 mm                                          | 72 |

|                                                                    |                                      |    |                                                                   |                            |    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| Pilares de barra, recto                                            |                                      |    | Base de titanio CAD/CAM, puente                                   |                            |    |
| J2254.3305                                                         | Ø 3.3 mm, AG 0.5 mm                  | 69 | J2344.3348                                                        | Ø 3.3 mm                   | 64 |
| J2254.3320                                                         | Ø 3.3 mm, AG 2.0 mm                  | 69 | J2344.3848                                                        | Ø 3.8 mm                   | 64 |
| J2254.3805                                                         | Ø 3.8 mm, AG 0.5 mm                  | 69 | J2344.4348                                                        | Ø 4.3 mm                   | 64 |
| J2254.3820                                                         | Ø 3.8 mm, AG 2.0 mm                  | 69 | J2344.5048                                                        | Ø 5.0 mm                   | 64 |
| J2254.3840                                                         | Ø 3.8 mm, AG 4.0 mm                  | 69 | J2344.6048                                                        | Ø 6.0 mm                   | 64 |
| J2254.4305                                                         | Ø 4.3 mm, AG 0.5 mm                  | 69 | Casquillo de toma de impresión Logfit®                            |                            |    |
| J2254.4320                                                         | Ø 4.3 mm, AG 2.0 mm                  | 69 | J2551.4300                                                        | Ø 3.8/4.3 mm               | 68 |
| J2254.4340                                                         | Ø 4.3 mm, AG 4.0 mm                  | 69 | J2551.6000                                                        | Ø 5.0/6.0 mm               | 68 |
| J2254.5005                                                         | Ø 5.0 mm, AG 0.5 mm                  | 69 | Análogos Logfit®                                                  |                            |    |
| J2254.5020                                                         | Ø 5.0 mm, AG 2.0 mm                  | 69 | J2552.4300                                                        | Ø 3.8/4.3 mm               | 68 |
| J2254.5040                                                         | Ø 5.0 mm, AG 4.0 mm                  | 69 | J2552.6000                                                        | Ø 5.0/6.0 mm               | 68 |
| Base para pilar de barra                                           |                                      |    | Casquillo calcinable Logfit®                                      |                            |    |
| J2256.4306                                                         | Ø 3.3/3.8/4.3 mm                     | 71 | J2553.4301                                                        | Ø 3.8/4.3 mm, para puentes | 68 |
| J2256.6006                                                         | Ø 5.0 mm                             | 71 | J2553.4302                                                        | Ø 3.8/4.3 mm, para coronas | 68 |
| Base para pilar de barra                                           |                                      |    | J2553.6001                                                        | Ø 5.0/6.0 mm, para puentes | 68 |
| J2257.4301                                                         | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, calcinable         | 71 | J2553.6002                                                        | Ø 5.0/6.0 mm, para coronas | 68 |
| J2257.6001                                                         | Ø 5.0 mm, calcinable                 | 71 | Casquillo de escaneado para pilares de barra                      |                            |    |
| J2258.4300                                                         | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, soldable           | 71 | J2610.4300                                                        | Ø 3.3/3.8/4.3 mm           | 70 |
| J2258.6000                                                         | Ø 5.0 mm, soldable                   | 71 | J2610.6000                                                        | Ø 5.0 mm                   | 70 |
| Casquillo de titanio para pilar de barra                           |                                      |    | Análogo de pilar de bola                                          |                            |    |
| J2259.4301                                                         | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, para corona        | 70 | J3015.3300                                                        | Ø 3.3 mm                   | 74 |
| J2259.4302                                                         | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, para puente        | 71 | J3015.3800                                                        | Ø 3.8 mm                   | 74 |
| J2259.6001                                                         | Ø 5.0 mm, para corona                | 70 | J3015.4300                                                        | Ø 4.3 mm                   | 74 |
| J2259.6002                                                         | Ø 5.0 mm, para puente                | 71 | J3015.5000                                                        | Ø 5.0 mm                   | 74 |
| Cazoleta de titanio sin retención para pilar de barra, para puente |                                      |    | Análogo de laboratorio de barra para soldar para pilares de barra |                            |    |
| J2259.4322                                                         | Ø 3.3/3.8/4.3 mm                     | 71 | J3020.4300                                                        | Ø 3.3/3.8/4.3 mm           | 70 |
| J2259.6022                                                         | Ø 5.0 mm                             | 71 | J3020.6000                                                        | Ø 5.0 mm                   | 70 |
| Base adhesiva de titanio para pilar de barra                       |                                      |    | Protector para pulido para casquillos y bases para pilar de barra |                            |    |
| J2260.4301                                                         | Ø 3.3/3.8/4.3 mm                     | 71 | J3021.4300                                                        | Ø 3.3/3.8/4.3 mm           | 72 |
| J2260.6001                                                         | Ø 5.0 mm                             | 71 | J3021.6000                                                        | Ø 5.0 mm                   | 72 |
| Casquillo de barra para base adhesiva de titanio                   |                                      |    | Mango para el análogo de implante CAMLOG®/CONELOG®                |                            |    |
| J2261.4301                                                         | Ø 3.3/3.8/4.3 mm                     | 71 | J3025.0010                                                        | Ø 3.3/3.8/4.3 mm           | 83 |
| J2261.6001                                                         | Ø 5.0 mm                             | 71 | J3025.0015                                                        | Ø 5.0/6.0 mm               | 83 |
| Base para pilar de barra,                                          |                                      |    | Análogo de implante de barra para pilares de barra                |                            |    |
| J2262.4300                                                         | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, soldable por láser | 71 | J3025.4300                                                        | Ø 3.3/3.8/4.3 mm           | 70 |
| J2262.6000                                                         | Ø 5.0 mm, soldable por láser         | 71 | J3025.6000                                                        | Ø 5.0 mm                   | 70 |
| J2263.4300                                                         | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, sobrecolable       | 71 | Indicador de la altura gingival, recto                            |                            |    |
| J2263.6000                                                         | Ø 5.0 mm, sobrecolable               | 71 | J3550.3300                                                        | Ø 3.3 mm                   | 70 |
| Componente auxiliar 17°                                            |                                      |    | J3550.3800                                                        | Ø 3.8 mm                   | 70 |
| J2269.0003                                                         | Componente auxiliar 17°              | 70 | J3550.4300                                                        | Ø 4.3 mm                   | 70 |
| J2269.0004                                                         | Componente auxiliar 30°              | 70 | J3550.5000                                                        | Ø 5.0 mm                   | 70 |
| J2269.0005                                                         | Componente auxiliar 17°              | 70 | Plantilla de orientación para COMFOUR®                            |                            |    |
| J2269.0006                                                         | Componente auxiliar 30°              | 70 | J3551.0001                                                        |                            | 70 |
| Pilar provisional, puente, aleación de titanio                     |                                      |    |                                                                   |                            |    |
| J2339.3300                                                         | Ø 3.3 mm                             | 62 |                                                                   |                            |    |
| J2339.3800                                                         | Ø 3.8 mm                             | 62 |                                                                   |                            |    |
| J2339.4300                                                         | Ø 4.3 mm                             | 62 |                                                                   |                            |    |
| J2339.5000                                                         | Ø 5.0 mm                             | 62 |                                                                   |                            |    |
| J2339.6000                                                         | Ø 6.0 mm                             | 62 |                                                                   |                            |    |

|                                                      |                                                                      |    |                                                                               |                                                        |    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|
| Fresa para escayola para mango universal             |                                                                      |    | Tornillo de pilar con cabeza reducida, hex                                    |                                                        |    |
| J3706.3300                                           | Ø 3.3 mm                                                             | 84 | J4004.1601                                                                    | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, M 1.6                                | 72 |
| J3706.3800                                           | Ø 3.8 mm                                                             | 84 | J4004.2001                                                                    | Ø 5.0 mm, M 2.0                                        | 72 |
| J3706.4300                                           | Ø 4.3 mm                                                             | 84 | Tornillos de pilar, hex                                                       |                                                        |    |
| J3706.5000                                           | Ø 5.0 mm                                                             | 84 | J4005.1601                                                                    | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, M 1.6                                | 79 |
| J3706.6000                                           | Ø 6.0 mm                                                             | 84 | J4005.2001                                                                    | Ø 5.0/6.0 mm, M 2.0                                    | 79 |
| J3709.0010                                           | Mango universal, incl. tornillos de laboratorio y 1 soporte de pilar | 84 | Tornillos de laboratorio, hex                                                 |                                                        |    |
| J3709.0015                                           | Mango universal                                                      | 84 | J4006.1601                                                                    | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, M 1.6                                | 79 |
| J3709.0015                                           | Mango universal                                                      | 84 | J4006.2001                                                                    | Ø 5.0/6.0 mm, M 2.0                                    | 79 |
| Soporte de pilar                                     |                                                                      |    | Tornillo de plástico para pilar de barra                                      |                                                        |    |
| J3709.3300                                           | Ø 3.3 mm                                                             | 84 | J4009.1627                                                                    | M 1.6                                                  | 73 |
| J3709.3800                                           | Ø 3.8 mm                                                             | 84 | J4009.2027                                                                    | M 2.0                                                  | 73 |
| J3709.4300                                           | Ø 4.3 mm                                                             | 84 | Tornillo transoclusal, para pilar de barra                                    |                                                        |    |
| J3709.5000                                           | Ø 5.0 mm                                                             | 84 | J4012.1601                                                                    | Ø 3.3/3.8/4.3 mm                                       | 72 |
| J3709.6000                                           | Ø 6.0 mm                                                             | 84 | J4012.2001                                                                    | Ø 5.0 mm                                               | 72 |
| Escariador para el acabado, base para pilar de barra |                                                                      |    | Tornillo, hex                                                                 |                                                        |    |
| J3711.0010                                           | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, superf. plana/cono                                 | 84 | J4012.1610                                                                    | L 10 mm, M 1.6                                         | 72 |
| J3711.0015                                           | Ø 5.0/6.0 mm, superf. plana/cono                                     | 84 | J4012.1615                                                                    | L 15 mm, M 1.6                                         | 72 |
| J3711.0020                                           | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, asiento del tornillo                               | 84 | J4012.1620                                                                    | L 20 mm, M 1.6                                         | 73 |
| J3711.0025                                           | Ø 5.0/6.0 mm, asiento del tornillo                                   | 84 | J4012.2010                                                                    | L 10 mm, M 2.0                                         | 72 |
| Instrumento de inserción Cirugía Guiada              |                                                                      |    | J4012.2015                                                                    | L 15 mm, M 2.0                                         | 72 |
| J3716.3300                                           | Ø 3.3 mm                                                             | 42 | J4012.2020                                                                    | L 20 mm, M 2.0                                         | 73 |
| J3716.4300                                           | Ø 3.8/4.3 mm                                                         | 42 | Tornillo transoclusal de laboratorio, para pilar de barra                     |                                                        |    |
| J3717.3300                                           | Ø 3.3 mm, PROGRESSIVE-LINE                                           | 32 | J4013.1601                                                                    | Ø 3.3/3.8/4.3 mm                                       | 72 |
| J3717.4300                                           | Ø 3.8/4.3 mm, PROGRESSIVE-LINE                                       | 32 | J4013.2001                                                                    | Ø 5.0 mm                                               | 72 |
| J3717.5000                                           | Ø 5.0 mm, PROGRESSIVE-LINE                                           | 32 | Prolongador de fresas vástago ISO para instrumentos con refrigeración interna |                                                        |    |
| J3733.3300                                           | Ø 3.3 mm                                                             | 42 | J5002.0005                                                                    |                                                        | 42 |
| J3733.4300                                           | Ø 3.8/4.3 mm                                                         | 42 | J5002.0006                                                                    | no está indicado para fresas con refrigeración interna | 45 |
| Casquillos guía Cirugía Guiada                       |                                                                      |    | J5002.0011                                                                    | Adaptador vástago ISO                                  | 47 |
| J3734.3303                                           | Ø 3.3 mm                                                             | 41 | J5002.0012                                                                    | Aguja de limpieza                                      | 49 |
| J3734.3803                                           | Ø 3.8 mm                                                             | 41 | J5002.0013                                                                    | Adaptador de la llave de carraca                       | 27 |
| J3734.4303                                           | Ø 4.3 mm                                                             | 41 | J5002.0020                                                                    | Cánula de limpieza                                     | 49 |
| Fresa para férula Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE    |                                                                      |    | Espiga guía para fresa avellanadora                                           |                                                        |    |
| J3753.3300                                           | Ø 3.3 mm                                                             | 32 | J5002.3300                                                                    | Ø 3.3 mm                                               | 44 |
| J3753.4300                                           | Ø 3.8/4.3 mm                                                         | 32 | J5002.3800                                                                    | Ø 3.8 mm                                               | 44 |
| J3753.5000                                           | Ø 5.0 mm                                                             | 32 | J5002.4300                                                                    | Ø 4.3 mm                                               | 44 |
| Casquillo guía Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE       |                                                                      |    | J5002.5000                                                                    | Ø 5.0 mm                                               | 44 |
| J3754.3301                                           | Ø 3.3 mm                                                             | 32 | Fresa avellanadora                                                            |                                                        |    |
| J3754.3801                                           | Ø 3.8 mm                                                             | 32 | J5003.3350                                                                    | Ø 3.3 mm, Ø 5.0 mm                                     | 44 |
| J3754.4301                                           | Ø 4.3 mm                                                             | 32 | J5003.4360                                                                    | Ø 3.8/4.3 mm, Ø 6.0 mm                                 | 44 |
| J3754.5001                                           | Ø 5.0 mm                                                             | 32 | J5003.5070                                                                    | Ø 5.0 mm, Ø 7.0 mm                                     | 44 |
| Tornillo de laboratorio con cabeza reducida, hex     |                                                                      |    |                                                                               |                                                        |    |
| J4004.1600                                           | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, M 1.6                                              | 72 |                                                                               |                                                        |    |
| J4004.2000                                           | Ø 5.0 mm, M 2.0                                                      | 72 |                                                                               |                                                        |    |



|                                                                        |                            |        |                                                     |                              |    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----|
| Fresa para la exposición para el tornillo                              |                            |        | Fresa de perfil SCREW-LINE                          |                              |    |
| J5004.3300                                                             | Ø 3.3 mm                   | 44     | J5062.3309                                          | Ø 3.3 mm, L 9 mm             | 39 |
| J5004.3800                                                             | Ø 3.8 mm                   | 44     | J5062.3311                                          | Ø 3.3 mm, L 11 mm            | 39 |
| J5004.4300                                                             | Ø 4.3 mm                   | 44     | J5062.3313                                          | Ø 3.3 mm, L 13 mm            | 39 |
| J5004.5000                                                             | Ø 5.0 mm                   | 44     | J5062.3316                                          | Ø 3.3 mm, L 16 mm            | 39 |
| Avellanador                                                            |                            |        | J5062.3809                                          | Ø 3.8 mm, L 9 mm             | 39 |
| J5006.3346                                                             | Ø 3.3 mm, Ø 4.6 mm         | 44     | J5062.3811                                          | Ø 3.8 mm, L 11 mm            | 39 |
| J5006.3852                                                             | Ø 3.8 mm, Ø 5.2 mm         | 44     | J5062.3813                                          | Ø 3.8 mm, L 13 mm            | 39 |
| J5006.4356                                                             | Ø 4.3 mm, Ø 5.6 mm         | 44     | J5062.3816                                          | Ø 3.8 mm, L 16 mm            | 39 |
| J5006.5063                                                             | Ø 5.0 mm, Ø 6.3 mm         | 44     | J5062.4309                                          | Ø 4.3 mm, L 9 mm             | 39 |
| Tope de profundidad SCREW-LINE para fresa piloto y fresa cónica        |                            |        | J5062.4311                                          | Ø 4.3 mm, L 11 mm            | 39 |
| J5015.0009                                                             | L 9 mm                     | 44     | J5062.4313                                          | Ø 4.3 mm, L 13 mm            | 39 |
| J5015.0011                                                             | L 11 mm                    | 44     | J5062.4316                                          | Ø 4.3 mm, L 16 mm            | 39 |
| J5015.0013                                                             | L 13 mm                    | 44     | J5062.5009                                          | Ø 5.0 mm, L 9 mm             | 39 |
| Tope de profundidad para fresa de perfil PROGRESSIVE-LINE y SCREW-LINE |                            |        | J5062.5011                                          | Ø 5.0 mm, L 11 mm            | 39 |
| J5015.3300                                                             | Ø 3.3 mm                   | 23, 39 | J5062.5013                                          | Ø 5.0 mm, L 13 mm            | 39 |
| J5015.3800                                                             | Ø 3.8 mm                   | 23, 39 | J5062.5016                                          | Ø 5.0 mm, L 16 mm            | 39 |
| J5015.4300                                                             | Ø 4.3 mm                   | 23, 39 | J5062.6009                                          | Ø 6.0 mm, L 9 mm             | 39 |
| J5015.5000                                                             | Ø 5.0 mm                   | 23, 39 | J5062.6011                                          | Ø 6.0 mm, L 11 mm            | 39 |
| J5015.6000                                                             | Ø 6.0 mm                   | 39     | J5062.6013                                          | Ø 6.0 mm, L 13 mm            | 39 |
| Bisturís circulares Cirugía Guiada                                     |                            |        | J5062.6016                                          | Ø 6.0 mm, L 16 mm            | 39 |
| J5041.3303                                                             | Ø 3.3 mm, SCREW-LINE       | 41     | Set de fresa piloto Cirugía Guiada                  |                              |    |
| J5041.3304                                                             | Ø 3.3 mm, PROGRESSIVE-LINE | 30     | J5063.3311                                          | Ø 3.3 mm, L 5/9/11 mm        | 40 |
| J5041.3803                                                             | Ø 3.8 mm, SCREW-LINE       | 41     | J5063.3313                                          | Ø 3.3 mm, L 5/9/11/13 mm     | 40 |
| J5041.3804                                                             | Ø 3.8 mm, PROGRESSIVE-LINE | 30     | J5063.4309                                          | Ø 3.8/4.3 mm, L 5/9 mm       | 40 |
| J5041.4303                                                             | Ø 4.3 mm, SCREW-LINE       | 41     | J5063.4311                                          | Ø 3.8/4.3 mm, L 5/9/11 mm    | 40 |
| J5041.4304                                                             | Ø 4.3 mm, PROGRESSIVE-LINE | 30     | J5063.4313                                          | Ø 3.8/4.3 mm, L 5/9/11/13 mm | 40 |
| J5041.5004                                                             | Ø 5.0 mm, PROGRESSIVE-LINE | 30     | J5064.3316                                          | Ø 3.3 mm, L 16 mm            | 40 |
| J5050.2300                                                             | Fresa redonda              | 43     | J5064.4316                                          | Ø 3.8/4.3 mm, L 16 mm        | 40 |
| J5051.2000                                                             | Fresa piloto SCREW-LINE    | 43     | Set quirúrgico Cirugía Guiada, SCREW-LINE           |                              |    |
| J5051.2003                                                             | Fresa piloto               | 43     | J5065.3311                                          | Ø 3.3 mm, L 5/9/11 mm        | 40 |
| J5051.2800                                                             | Fresa cónica SCREW-LINE    | 43     | J5065.3313                                          | Ø 3.3 mm, L 5/9/11/13 mm     | 40 |
| Fresa de perfil SCREW-LINE para hueso cortical                         |                            |        | J5065.3809                                          | Ø 3.8 mm, L 5/9 mm           | 40 |
| J5053.3316                                                             | Ø 3.3 mm                   | 39     | J5065.3811                                          | Ø 3.8 mm, L 5/9/11 mm        | 40 |
| J5053.3816                                                             | Ø 3.8 mm                   | 39     | J5065.3813                                          | Ø 3.8 mm, L 5/9/11/13 mm     | 40 |
| J5053.4316                                                             | Ø 4.3 mm                   | 39     | J5065.4309                                          | Ø 4.3 mm, L 5/9 mm           | 40 |
| J5053.5016                                                             | Ø 5.0 mm                   | 39     | J5065.4311                                          | Ø 4.3 mm, L 5/9/11 mm        | 40 |
| J5053.6016                                                             | Ø 6.0 mm                   | 39     | J5065.4313                                          | Ø 4.3 mm, L 5/9/11/13 mm     | 40 |
| Macho de rosca SCREW-LINE                                              |                            |        | J5066.3316                                          | Ø 3.3 mm, L 16 mm            | 40 |
| J5054.3309                                                             | Ø 3.3 mm                   | 39     | J5066.3816                                          | Ø 3.8 mm, L 16 mm            | 40 |
| J5054.3809                                                             | Ø 3.8 mm                   | 39     | J5066.4316                                          | Ø 4.3 mm, L 16 mm            | 40 |
| J5054.4309                                                             | Ø 4.3 mm                   | 39     | Fresa para hueso cortical Cirugía Guiada SCREW-LINE |                              |    |
| J5054.5009                                                             | Ø 5.0 mm                   | 39     | J5068.3311                                          | Ø 3.3 mm, L 11 mm            | 41 |
| J5054.6009                                                             | Ø 6.0 mm                   | 39     | J5068.3313                                          | Ø 3.3 mm, L 13 mm            | 41 |
|                                                                        |                            |        | J5068.3316                                          | Ø 3.3 mm, L 16 mm            | 41 |
|                                                                        |                            |        | J5068.3809                                          | Ø 3.8 mm, L 9 mm             | 41 |
|                                                                        |                            |        | J5068.3811                                          | Ø 3.8 mm, L 11 mm            | 41 |
|                                                                        |                            |        | J5068.3813                                          | Ø 3.8 mm, L 13 mm            | 41 |
|                                                                        |                            |        | J5068.3816                                          | Ø 3.8 mm, L 16 mm            | 41 |
|                                                                        |                            |        | J5068.4309                                          | Ø 4.3 mm, L 9 mm             | 41 |
|                                                                        |                            |        | J5068.4311                                          | Ø 4.3 mm, L 11 mm            | 41 |
|                                                                        |                            |        | J5068.4313                                          | Ø 4.3 mm, L 13 mm            | 41 |
|                                                                        |                            |        | J5068.4316                                          | Ø 4.3 mm, L 16 mm            | 41 |



|                                              |                       |    |                                                                               |                                                             |    |
|----------------------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| Fresa de perfil PROGRESSIVE-LINE             |                       |    | Fresa de perfil Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE                               |                                                             |    |
| J5070.3309                                   | Ø 3.3 mm, L 9 mm      | 23 | J5076.3311                                                                    | Ø 3.3 mm, L 11 mm                                           | 31 |
| J5070.3311                                   | Ø 3.3 mm, L 11 mm     | 23 | J5076.3313                                                                    | Ø 3.3 mm, L 13 mm                                           | 31 |
| J5070.3313                                   | Ø 3.3 mm, L 13 mm     | 23 | J5076.3316                                                                    | Ø 3.3 mm, L 16 mm                                           | 31 |
| J5070.3316                                   | Ø 3.3 mm, L 16 mm     | 23 | J5076.3809                                                                    | Ø 3.8 mm, L 9 mm                                            | 31 |
| J5070.3809                                   | Ø 3.8 mm, L 9 mm      | 23 | J5076.3811                                                                    | Ø 3.8 mm, L 11 mm                                           | 31 |
| J5070.3811                                   | Ø 3.8 mm, L 11 mm     | 23 | J5076.3813                                                                    | Ø 3.8 mm, L 13 mm                                           | 31 |
| J5070.3813                                   | Ø 3.8 mm, L 13 mm     | 23 | J5076.3816                                                                    | Ø 3.8 mm, L 16 mm                                           | 31 |
| J5070.3816                                   | Ø 3.8 mm, L 16 mm     | 23 | J5076.4309                                                                    | Ø 4.3 mm, L 9 mm                                            | 31 |
| J5070.4309                                   | Ø 4.3 mm, L 9 mm      | 23 | J5076.4311                                                                    | Ø 4.3 mm, L 11 mm                                           | 31 |
| J5070.4311                                   | Ø 4.3 mm, L 11 mm     | 23 | J5076.4313                                                                    | Ø 4.3 mm, L 13 mm                                           | 31 |
| J5070.4313                                   | Ø 4.3 mm, L 13 mm     | 23 | J5076.4316                                                                    | Ø 4.3 mm, L 16 mm                                           | 31 |
| J5070.4316                                   | Ø 4.3 mm, L 16 mm     | 23 | J5076.5009                                                                    | Ø 5.0 mm, L 9 mm                                            | 31 |
| J5070.5009                                   | Ø 5.0 mm, L 9 mm      | 23 | J5076.5011                                                                    | Ø 5.0 mm, L 11 mm                                           | 31 |
| J5070.5011                                   | Ø 5.0 mm, L 11 mm     | 23 | J5076.5013                                                                    | Ø 5.0 mm, L 13 mm                                           | 31 |
| J5070.5013                                   | Ø 5.0 mm, L 13 mm     | 23 | J5076.5016                                                                    | Ø 5.0 mm, L 16 mm                                           | 31 |
| J5070.5016                                   | Ø 5.0 mm, L 16 mm     | 23 |                                                                               |                                                             |    |
| Macho de rosca PROGRESSIVE-LINE              |                       |    | Fresa de perfil Cirugía Guiada para Ø 3,8 mm con preparación PROGRESSIVE-LINE |                                                             |    |
| J5071.3300                                   | Ø 3.3 mm              | 23 | J5077.3309                                                                    | Ø 3.3 mm, L 9 mm                                            | 31 |
| J5071.3800                                   | Ø 3.8 mm              | 23 | J5077.3311                                                                    | Ø 3.3 mm, L 11 mm                                           | 31 |
| J5071.4300                                   | Ø 4.3 mm              | 23 | J5077.3313                                                                    | Ø 3.3 mm, L 13 mm                                           | 31 |
| J5071.5000                                   | Ø 5.0 mm              | 23 | J5077.3316                                                                    | Ø 3.3 mm, L 16 mm                                           | 31 |
| Dense bone drill PROGRESSIVE-LINE            |                       |    | Dense bone drill Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE                              |                                                             |    |
| J5072.3300                                   | Ø 3.3 mm              | 23 | J5078.3311                                                                    | Ø 3.3 mm, L 11 mm                                           | 31 |
| J5072.3800                                   | Ø 3.8 mm              | 23 | J5078.3313                                                                    | Ø 3.3 mm, L 13 mm                                           | 31 |
| J5072.4300                                   | Ø 4.3 mm              | 23 | J5078.3316                                                                    | Ø 3.3 mm, L 16 mm                                           | 31 |
| J5072.5000                                   | Ø 5.0 mm              | 23 | J5078.3809                                                                    | Ø 3.8 mm, L 9 mm                                            | 31 |
| Fresa piloto Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE |                       |    | J5078.3811                                                                    | Ø 3.8 mm, L 11 mm                                           | 31 |
| J5074.3305                                   | Ø 3.3 mm, L 5 mm      | 30 | J5078.3813                                                                    | Ø 3.8 mm, L 13 mm                                           | 31 |
| J5074.3309                                   | Ø 3.3 mm, L 9 mm      | 30 | J5078.3816                                                                    | Ø 3.8 mm, L 16 mm                                           | 31 |
| J5074.3311                                   | Ø 3.3 mm, L 11 mm     | 30 | J5078.4309                                                                    | Ø 4.3 mm, L 9 mm                                            | 31 |
| J5074.3313                                   | Ø 3.3 mm, L 13 mm     | 30 | J5078.4311                                                                    | Ø 4.3 mm, L 11 mm                                           | 31 |
| J5074.3316                                   | Ø 3.3 mm, L 16 mm     | 30 | J5078.4313                                                                    | Ø 4.3 mm, L 13 mm                                           | 31 |
| J5074.4305                                   | Ø 3.8/4.3 mm, L 5 mm  | 30 | J5078.4316                                                                    | Ø 4.3 mm, L 16 mm                                           | 31 |
| J5074.4307                                   | Ø 3.8/4.3 mm, L 7 mm  | 30 | J5078.5009                                                                    | Ø 5.0 mm, L 9 mm                                            | 31 |
| J5074.4309                                   | Ø 3.8/4.3 mm, L 9 mm  | 30 | J5078.5011                                                                    | Ø 5.0 mm, L 11 mm                                           | 31 |
| J5074.4311                                   | Ø 3.8/4.3 mm, L 11 mm | 30 | J5078.5013                                                                    | Ø 5.0 mm, L 13 mm                                           | 31 |
| J5074.4313                                   | Ø 3.8/4.3 mm, L 13 mm | 30 | J5078.5016                                                                    | Ø 5.0 mm, L 16 mm                                           | 31 |
| J5074.4316                                   | Ø 3.8/4.3 mm, L 16 mm | 30 |                                                                               |                                                             |    |
| J5074.5005                                   | Ø 5.0 mm, L 5 mm      | 30 | Fresa PROGRESSIVE-LINE Flex                                                   |                                                             |    |
| J5074.5007                                   | Ø 5.0 mm, L 7 mm      | 30 | J5079.3300                                                                    | Ø 3.3 mm                                                    | 27 |
| J5074.5009                                   | Ø 5.0 mm, L 9 mm      | 30 | J5079.3800                                                                    | Ø 3.8 mm                                                    | 27 |
| J5074.5011                                   | Ø 5.0 mm, L 11 mm     | 30 | J5079.4300                                                                    | Ø 4.3 mm                                                    | 27 |
| J5074.5013                                   | Ø 5.0 mm, L 13 mm     | 30 | J5079.5000                                                                    | Ø 5.0 mm                                                    | 27 |
| J5074.5016                                   | Ø 5.0 mm, L 16 mm     | 30 |                                                                               |                                                             |    |
| Fresa cónica Cirugía Guiada PROGRESSIVE-LINE |                       |    | Fresa perfilada PROGRESSIVE-LINE Flex                                         |                                                             |    |
| J5076.3305                                   | Ø 3.3 mm              | 31 | J5080.3300                                                                    | Ø 3.3 mm                                                    | 27 |
| J5076.3805                                   | Ø 3.8 mm              | 31 | J5080.3800                                                                    | Ø 3.8 mm                                                    | 27 |
| J5076.4305                                   | Ø 4.3 mm              | 31 | J5080.4300                                                                    | Ø 4.3 mm                                                    | 27 |
| J5076.5005                                   | Ø 5.0 mm              | 31 | J5080.5000                                                                    | Ø 5.0 mm                                                    | 27 |
|                                              |                       |    | J5300.0011                                                                    | Instrumento de inserción para pilar de bola, manual/carraca | 80 |

|                                                                                                                   |                                          |        |                                                                            |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| Instrumento de inserción para pilar de barra recto                                                                |                                          |        | Perno de control Cirugía Guiada                                            |                                                       |        |
| J5300.0020                                                                                                        | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, corto                  | 80     | J5301.3300                                                                 | Ø 3.3 mm                                              | 42     |
| J5300.0021                                                                                                        | Ø 3.3/3.8/4.3 mm, largo                  | 81     | J5301.3310                                                                 | Ø 3.3 mm, PROGRESSIVE-LINE                            | 32     |
| J5300.0025                                                                                                        | Ø 5.0 mm, corto                          | 80     | J5301.4300                                                                 | Ø 3.8/4.3 mm                                          | 42     |
|                                                                                                                   |                                          |        | J5301.4310                                                                 | Ø 3.8/4.3 mm, PROGRESSIVE-LINE                        | 32     |
|                                                                                                                   |                                          |        | J5301.5010                                                                 | Ø 5.0 mm, PROGRESSIVE-LINE                            | 32     |
| Adaptador roscado CAMLOG® y CONELOG®                                                                              |                                          |        | Llave guía                                                                 |                                                       |        |
| J5300.0022                                                                                                        | Ø 3.3/3.8/4.3/5.0 mm                     | 23     | J5302.0010                                                                 |                                                       | 48     |
| Instrumento de inserción para casquillos de toma de impresión y casquillos de cicatrización para pilares de barra |                                          |        | Casquillo para colocar el instrumento auxiliar de inserción en el implante |                                                       |        |
| J5300.0027                                                                                                        | Ø 3.3/3.8/4.3 mm                         | 70, 81 | J5302.3300                                                                 | Ø 3.3 mm                                              | 48     |
| J5300.0028                                                                                                        | Ø 5.0 mm                                 | 70, 81 | J5302.3800                                                                 | Ø 3.8 mm                                              | 48     |
|                                                                                                                   |                                          |        | J5302.4300                                                                 | Ø 4.3 mm                                              | 48     |
| J5300.0030                                                                                                        | Instrumento PickUp                       | 47     | J5302.5000                                                                 | Ø 5.0 mm                                              | 48     |
|                                                                                                                   |                                          |        | J5302.6000                                                                 | Ø 6.0 mm                                              | 48     |
| Llave de inserción, para implantes                                                                                |                                          |        | Destornillador, hex                                                        |                                                       |        |
| J5300.0031                                                                                                        | extra corto, manual/carraca              | 46     | J5317.0501                                                                 | corto, manual/carraca                                 | 48, 82 |
| J5300.0032                                                                                                        | corto, manual/carraca                    | 46     | J5317.0502                                                                 | largo, manual/carraca                                 | 48, 83 |
| J5300.0033                                                                                                        | largo, manual/carraca                    | 46     | J5317.0503                                                                 | largo, vástago ISO                                    | 49, 83 |
| J5300.0034                                                                                                        | corto, con vástago ISO para contraángulo | 46     | J5317.0504                                                                 | corto, vástago ISO                                    | 49, 83 |
| J5300.0035                                                                                                        | largo, con vástago ISO para contraángulo | 46     | J5317.0510                                                                 | extracorto, manual/carraca                            | 48, 82 |
| Instrumento de inserción, para implantes de tornillo, (sin hexágono en el vástago)                                |                                          |        | J5317.0511                                                                 | Destornillador manual, hex                            | 49, 83 |
| J5300.0036                                                                                                        | corto, con vástago ISO para contraángulo | 46     | J5320.1030                                                                 | Llave de carraca dinamométrica                        | 80     |
| J5300.0037                                                                                                        | largo, con vástago ISO para contraángulo | 46     |                                                                            |                                                       |        |
| J5300.0038                                                                                                        | Instrumento de inserción, cardánico      | 47     | J5322.0010                                                                 | Adaptador manual corto                                | 45     |
|                                                                                                                   |                                          |        | J5322.0011                                                                 | largo                                                 | 45     |
| El kit quirúrgico CAMLOG®/CONELOG®                                                                                |                                          |        | J5330.8500                                                                 | Bandeja protésica                                     | 82     |
| J5300.0063                                                                                                        | SCREW-LINE                               | 38     | J5330.8600                                                                 | Set protésico                                         | 82     |
| J5300.0065                                                                                                        | PROGRESSIVE-LINE                         | 22     |                                                                            |                                                       |        |
| J5300.0071                                                                                                        | PROGRESSIVE-LINE Flex                    | 26     | J5330.8700                                                                 | Bandeja protésica universales                         | 82     |
| Plantilla para la bandeja de cirugía para el reprocesado CAMLOG®/CONELOG®                                         |                                          |        | J5417.2800                                                                 | Pre-osteotomo SCREW-LINE, 1.7 – 2.8 mm, recto convexo | 50, 51 |
| J5300.1068                                                                                                        | SCREW-LINE                               | 38     |                                                                            |                                                       |        |
| J5300.1070                                                                                                        | PROGRESSIVE-LINE                         | 22     |                                                                            |                                                       |        |
| Paralelizador                                                                                                     |                                          |        | Kit de osteotomos                                                          |                                                       |        |
| J5300.2000                                                                                                        | PROGRESSIVE-LINE                         | 23     | J5418.0020                                                                 | CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE, recto convexo            | 50     |
| J5300.2028                                                                                                        | SCREW-LINE                               | 45     | J5418.0030                                                                 | angulado convexo                                      | 51     |
| Bandeja quirúrgica (sin contenido) CAMLOG®/CONELOG®                                                               |                                          |        | Osteotomos SCREW-LINE                                                      |                                                       |        |
| J5300.8916                                                                                                        | SCREW-LINE                               | 38     | J5418.3300                                                                 | Ø 3.3 mm, recto convexo                               | 50     |
| J5300.8917                                                                                                        | PROGRESSIVE-LINE                         | 22     | J5418.3310                                                                 | Ø 3.3 mm, angulado convexo                            | 51     |
| J5300.8920                                                                                                        | PROGRESSIVE-LINE Flex                    | 26     | J5418.3800                                                                 | Ø 3.8 mm, recto convexo                               | 50     |
|                                                                                                                   |                                          |        | J5418.3810                                                                 | Ø 3.8 mm, angulado convexo                            | 51     |
| Bandeja quirúrgica Cirugía Guiada CAMLOG®/CONELOG® (sin contenido)                                                |                                          |        | J5418.4300                                                                 | Ø 4.3 mm, recto convexo                               | 50     |
| J5300.8919                                                                                                        | PROGRESSIVE-LINE                         | 30     | J5418.4310                                                                 | Ø 4.3 mm, angulado convexo                            | 51     |
|                                                                                                                   |                                          |        | J5418.5000                                                                 | Ø 5.0 mm, recto convexo                               | 50     |
| Bandeja de cirugía para el reprocesado CAMLOG®/CONELOG® (sin contenido)                                           |                                          |        | J5418.5010                                                                 | Ø 5.0 mm, angulado convexo                            | 51     |
| J5300.8968                                                                                                        | SCREW-LINE                               | 38     | J5418.6000                                                                 | Ø 6.0 mm, recto convexo                               | 50     |
| J5300.8970                                                                                                        | PROGRESSIVE-LINE                         | 22     | J5418.6010                                                                 | Ø 6.0 mm, angulado convexo                            | 51     |
|                                                                                                                   |                                          |        | J5419.2800                                                                 | Pre-osteotomo SCREW-LINE 1.7 – 2.8 mm, recto cóncavo  | 52, 53 |

|                                                   |                                                                             |    |                                                                                                               |                                    |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| Kit de osteotomos<br>CAMLOG®/CONELOG® SCREW-LINE, |                                                                             |    | Implante CAMLOG® SCREW-LINE,<br>Promote® plus                                                                 |                                    |    |
| J5420.0020                                        | recto cóncavo                                                               | 52 |                                                                                                               | incl. poste de inserción roscado   |    |
| J5420.0030                                        | angulado cóncavo                                                            | 53 | K1055.3311                                                                                                    | Ø 3.3 mm, L 11 mm                  | 35 |
|                                                   |                                                                             |    | K1055.3313                                                                                                    | Ø 3.3 mm, L 13 mm                  | 35 |
|                                                   | Osteotomos SCREW-LINE                                                       |    | K1055.3316                                                                                                    | Ø 3.3 mm, L 16 mm                  | 35 |
| J5420.3300                                        | Ø 3.3 mm, recto cóncavo                                                     | 52 | K1055.3809                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 9 mm                   | 35 |
| J5420.3310                                        | Ø 3.3 mm, angulado cóncavo                                                  | 53 | K1055.3811                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 11 mm                  | 35 |
| J5420.3800                                        | Ø 3.8 mm, recto cóncavo                                                     | 52 | K1055.3813                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 13 mm                  | 35 |
| J5420.3810                                        | Ø 3.8 mm, angulado cóncavo                                                  | 53 | K1055.3816                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 16 mm                  | 35 |
| J5420.4300                                        | Ø 4.3 mm, recto cóncavo                                                     | 52 | K1055.4309                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 9 mm                   | 35 |
| J5420.4310                                        | Ø 4.3 mm, angulado cóncavo                                                  | 53 | K1055.4311                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 11 mm                  | 35 |
| J5420.5000                                        | Ø 5.0 mm, recto cóncavo                                                     | 52 | K1055.4313                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 13 mm                  | 35 |
| J5420.5010                                        | Ø 5.0 mm, angulado cóncavo                                                  | 53 | K1055.4316                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 16 mm                  | 35 |
| J5420.6000                                        | Ø 6.0 mm, recto cóncavo                                                     | 52 | K1055.5009                                                                                                    | Ø 5.0 mm, L 9 mm                   | 35 |
| J5420.6010                                        | Ø 6.0 mm, angulado cóncavo                                                  | 53 | K1055.5011                                                                                                    | Ø 5.0 mm, L 11 mm                  | 35 |
|                                                   |                                                                             |    | K1055.5013                                                                                                    | Ø 5.0 mm, L 13 mm                  | 35 |
| J8070.2050                                        | Maxilar inferior desdentado                                                 | 89 | Implante CAMLOG® SCREW-LINE,<br>Promote® plus                                                                 |                                    |    |
|                                                   | Implante CAMLOG® SCREW-LINE, Promote®<br>incl. poste de inserción roscado   |    |                                                                                                               | incl. poste de inserción a presión |    |
| K1045.3311                                        | Ø 3.3 mm, L 11 mm                                                           | 35 | K1056.3311                                                                                                    | Ø 3.3 mm, L 11 mm                  | 34 |
| K1045.3313                                        | Ø 3.3 mm, L 13 mm                                                           | 35 | K1056.3313                                                                                                    | Ø 3.3 mm, L 13 mm                  | 34 |
| K1045.3316                                        | Ø 3.3 mm, L 16 mm                                                           | 35 | K1056.3316                                                                                                    | Ø 3.3 mm, L 16 mm                  | 34 |
| K1045.3809                                        | Ø 3.8 mm, L 9 mm                                                            | 35 | K1056.3809                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 9 mm                   | 34 |
| K1045.3811                                        | Ø 3.8 mm, L 11 mm                                                           | 35 | K1056.3811                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 11 mm                  | 34 |
| K1045.3813                                        | Ø 3.8 mm, L 13 mm                                                           | 35 | K1056.3813                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 13 mm                  | 34 |
| K1045.3816                                        | Ø 3.8 mm, L 16 mm                                                           | 35 | K1056.3816                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 16 mm                  | 34 |
| K1045.4309                                        | Ø 4.3 mm, L 9 mm                                                            | 35 | K1056.4309                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 9 mm                   | 34 |
| K1045.4311                                        | Ø 4.3 mm, L 11 mm                                                           | 35 | K1056.4311                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 11 mm                  | 34 |
| K1045.4313                                        | Ø 4.3 mm, L 13 mm                                                           | 35 | K1056.4313                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 13 mm                  | 34 |
| K1045.4316                                        | Ø 4.3 mm, L 16 mm                                                           | 35 | K1056.4316                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 16 mm                  | 34 |
| K1045.5009                                        | Ø 5.0 mm, L 9 mm                                                            | 35 | K1056.5009                                                                                                    | Ø 5.0 mm, L 9 mm                   | 34 |
| K1045.5011                                        | Ø 5.0 mm, L 11 mm                                                           | 35 | K1056.5011                                                                                                    | Ø 5.0 mm, L 11 mm                  | 34 |
| K1045.5013                                        | Ø 5.0 mm, L 13 mm                                                           | 35 | K1056.5013                                                                                                    | Ø 5.0 mm, L 13 mm                  | 34 |
|                                                   | Implante CAMLOG® SCREW-LINE, Promote®<br>incl. poste de inserción a presión |    | K1056.5016                                                                                                    | Ø 5.0 mm, L 16 mm                  | 34 |
| K1046.3311                                        | Ø 3.3 mm, L 11 mm                                                           | 34 | K1056.6009                                                                                                    | Ø 6.0 mm, L 9 mm                   | 34 |
| K1046.3313                                        | Ø 3.3 mm, L 13 mm                                                           | 34 | K1056.6011                                                                                                    | Ø 6.0 mm, L 11 mm                  | 34 |
| K1046.3316                                        | Ø 3.3 mm, L 16 mm                                                           | 34 | K1056.6013                                                                                                    | Ø 6.0 mm, L 13 mm                  | 34 |
| K1046.3809                                        | Ø 3.8 mm, L 9 mm                                                            | 34 | K1056.6016                                                                                                    | Ø 6.0 mm, L 16 mm                  | 34 |
| K1046.3811                                        | Ø 3.8 mm, L 11 mm                                                           | 34 | Implante CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE,<br>Promote® plus, incl. poste de inserción<br>roscado y tornillo de cierre |                                    |    |
| K1046.3813                                        | Ø 3.8 mm, L 13 mm                                                           | 34 | K1075.3311                                                                                                    | Ø 3.3 mm, L 11 mm                  | 19 |
| K1046.3816                                        | Ø 3.8 mm, L 16 mm                                                           | 34 | K1075.3313                                                                                                    | Ø 3.3 mm, L 13 mm                  | 19 |
| K1046.4309                                        | Ø 4.3 mm, L 9 mm                                                            | 34 | K1075.3316                                                                                                    | Ø 3.3 mm, L 16 mm                  | 19 |
| K1046.4311                                        | Ø 4.3 mm, L 11 mm                                                           | 34 | K1075.3809                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 9 mm                   | 19 |
| K1046.4313                                        | Ø 4.3 mm, L 13 mm                                                           | 34 | K1075.3811                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 11 mm                  | 19 |
| K1046.4316                                        | Ø 4.3 mm, L 16 mm                                                           | 34 | K1075.3813                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 13 mm                  | 19 |
| K1046.5009                                        | Ø 5.0 mm, L 9 mm                                                            | 34 | K1075.3816                                                                                                    | Ø 3.8 mm, L 16 mm                  | 19 |
| K1046.5011                                        | Ø 5.0 mm, L 11 mm                                                           | 34 | K1075.4309                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 9 mm                   | 19 |
| K1046.5013                                        | Ø 5.0 mm, L 13 mm                                                           | 34 | K1075.4311                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 11 mm                  | 19 |
| K1046.5016                                        | Ø 5.0 mm, L 16 mm                                                           | 34 | K1075.4313                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 13 mm                  | 19 |
| K1046.6009                                        | Ø 6.0 mm, L 9 mm                                                            | 34 | K1075.4316                                                                                                    | Ø 4.3 mm, L 16 mm                  | 19 |
| K1046.6011                                        | Ø 6.0 mm, L 11 mm                                                           | 34 | K1075.5009                                                                                                    | Ø 5.0 mm, L 9 mm                   | 19 |
| K1046.6013                                        | Ø 6.0 mm, L 13 mm                                                           | 34 | K1075.5011                                                                                                    | Ø 5.0 mm, L 11 mm                  | 19 |
| K1046.6016                                        | Ø 6.0 mm, L 16 mm                                                           | 34 | K1075.5013                                                                                                    | Ø 5.0 mm, L 13 mm                  | 19 |
|                                                   | Implante de prácticas SCREW-LINE                                            |    | K1075.5016                                                                                                    | Ø 5.0 mm, L 16 mm                  | 19 |
| K1049.3813                                        | Ø 3.8 mm, L 13 mm                                                           | 88 |                                                                                                               |                                    |    |
| K1049.4313                                        | Ø 4.3 mm, L 13 mm                                                           | 88 |                                                                                                               |                                    |    |

|            |                                 |        |                                                                                                                 |  |  |                                                                                |                  |        |
|------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|            |                                 |        | Implante CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE,<br>Promote® plus, incl. poste de inserción<br>a presión y tornillo de cierre |  |  | Casquillos de toma de impresión PS,<br>cubeta cerrada, para Platform Switching |                  |        |
| K1076.3311 | Ø 3.3 mm, L 11 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2109.3800                                                                     | Ø 3.8 mm         | 60     |
| K1076.3313 | Ø 3.3 mm, L 13 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2109.4300                                                                     | Ø 4.3 mm         | 60     |
| K1076.3316 | Ø 3.3 mm, L 16 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2109.5000                                                                     | Ø 5.0 mm         | 60     |
| K1076.3809 | Ø 3.8 mm, L 9 mm                | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2109.6000                                                                     | Ø 6.0 mm         | 60     |
| K1076.3811 | Ø 3.8 mm, L 11 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | Casquillos de toma de impresión,<br>cubeta cerrada                             |                  |        |
| K1076.3813 | Ø 3.8 mm, L 13 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2110.3300                                                                     | Ø 3.3 mm         | 60     |
| K1076.3816 | Ø 3.8 mm, L 16 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2110.3800                                                                     | Ø 3.8 mm         | 60     |
| K1076.4309 | Ø 4.3 mm, L 9 mm                | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2110.4300                                                                     | Ø 4.3 mm         | 60     |
| K1076.4311 | Ø 4.3 mm, L 11 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2110.5000                                                                     | Ø 5.0 mm         | 60     |
| K1076.4313 | Ø 4.3 mm, L 13 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2110.6000                                                                     | Ø 6.0 mm         | 60     |
| K1076.4316 | Ø 4.3 mm, L 16 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | Casquillos de toma de impresión PS,<br>cubeta abierta, para Platform Switching |                  |        |
| K1076.5009 | Ø 5.0 mm, L 9 mm                | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2119.3800                                                                     | Ø 3.8 mm         | 60     |
| K1076.5011 | Ø 5.0 mm, L 11 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2119.4300                                                                     | Ø 4.3 mm         | 60     |
| K1076.5013 | Ø 5.0 mm, L 13 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2119.5000                                                                     | Ø 5.0 mm         | 60     |
| K1076.5016 | Ø 5.0 mm, L 16 mm               | 19     |                                                                                                                 |  |  | K2119.6000                                                                     | Ø 6.0 mm         | 60     |
|            |                                 |        | Implante de prácticas PROGRESSIVE-LINE                                                                          |  |  | Casquillos de toma de impresión,<br>cubeta abierta                             |                  |        |
| K1901.3813 | Ø 3.8 mm, L 13 mm               | 88     |                                                                                                                 |  |  | K2121.3300                                                                     | Ø 3.3 mm         | 60     |
| K1901.4313 | Ø 4.3 mm, L 13 mm               | 88     |                                                                                                                 |  |  | K2121.3800                                                                     | Ø 3.8 mm         | 60     |
|            |                                 |        | Casquillo de cicatrización PS,                                                                                  |  |  | K2121.4300                                                                     | Ø 4.3 mm         | 60     |
| K2001.3840 | Ø 3.8 mm, AG 4.0 mm, bottleneck | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2121.5000                                                                     | Ø 5.0 mm         | 60     |
| K2001.3860 | Ø 3.8 mm, AG 6.0 mm, bottleneck | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2121.6000                                                                     | Ø 6.0 mm         | 60     |
| K2001.4340 | Ø 4.3 mm, AG 4.0 mm, bottleneck | 58     |                                                                                                                 |  |  | Pilar universal PS                                                             |                  |        |
| K2001.4360 | Ø 4.3 mm, AG 6.0 mm, bottleneck | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2201.3800                                                                     | Ø 3.8 mm         | 67, 79 |
| K2001.5040 | Ø 5.0 mm, AG 4.0 mm, bottleneck | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2201.4300                                                                     | Ø 4.3 mm         | 67, 79 |
| K2001.5060 | Ø 5.0 mm, AG 6.0 mm, bottleneck | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2201.5000                                                                     | Ø 5.0 mm         | 67, 79 |
| K2004.3840 | Ø 3.8 mm, AG 4.0 mm, wide body  | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2201.6000                                                                     | Ø 6.0 mm         | 67, 79 |
| K2004.3860 | Ø 3.8 mm, AG 6.0 mm, wide body  | 58     |                                                                                                                 |  |  | Pilares PS Esthomic®,<br>recto, para Platform Switching                        |                  |        |
| K2004.4340 | Ø 4.3 mm, AG 4.0 mm, wide body  | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2202.3815                                                                     | Ø 3.8 mm         | 63     |
| K2004.4360 | Ø 4.3 mm, AG 6.0 mm, wide body  | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2202.4315                                                                     | Ø 4.3 mm         | 63     |
| K2004.5040 | Ø 5.0 mm, AG 4.0 mm, wide body  | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2202.5015                                                                     | Ø 5.0 mm         | 63     |
| K2004.5060 | Ø 5.0 mm, AG 6.0 mm, wide body  | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2202.6015                                                                     | Ø 6.0 mm         | 63     |
| K2004.6040 | Ø 6.0 mm, AG 4.0 mm, wide body  | 58     |                                                                                                                 |  |  | Pilares PS Esthomic®,<br>angulado 15°, para Platform Switching                 |                  |        |
| K2004.6060 | Ø 6.0 mm, AG 6.0 mm, wide body  | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2203.3815                                                                     | Ø 3.8 mm, tipo A | 63     |
| K2005.3820 | Ø 3.8 mm, AG 2.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2203.4315                                                                     | Ø 4.3 mm, tipo A | 63     |
| K2005.3840 | Ø 3.8 mm, AG 4.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2203.5015                                                                     | Ø 5.0 mm, tipo A | 63     |
| K2005.3860 | Ø 3.8 mm, AG 6.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2203.6015                                                                     | Ø 6.0 mm, tipo A | 63     |
| K2005.4320 | Ø 4.3 mm, AG 2.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2204.3815                                                                     | Ø 3.8 mm, tipo B | 63     |
| K2005.4340 | Ø 4.3 mm, AG 4.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2204.4315                                                                     | Ø 4.3 mm, tipo B | 63     |
| K2005.4360 | Ø 4.3 mm, AG 6.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2204.5015                                                                     | Ø 5.0 mm, tipo B | 63     |
| K2005.5020 | Ø 5.0 mm, AG 2.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2204.6015                                                                     | Ø 6.0 mm, tipo B | 63     |
| K2005.5040 | Ø 5.0 mm, AG 4.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | Pilar provisional PS,<br>PEEK, para Platform Switching                         |                  |        |
| K2005.5060 | Ø 5.0 mm, AG 6.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2208.3800                                                                     | Ø 3.8 mm         | 62     |
| K2005.6020 | Ø 6.0 mm, AG 2.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2208.4300                                                                     | Ø 4.3 mm         | 62     |
| K2005.6040 | Ø 6.0 mm, AG 4.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2208.5000                                                                     | Ø 5.0 mm         | 62     |
| K2005.6060 | Ø 6.0 mm, AG 6.0 mm, cilíndrico | 58     |                                                                                                                 |  |  | K2208.6000                                                                     | Ø 6.0 mm         | 62     |
|            |                                 |        | Poste de inserción Cirugía Guiada CAMLOG®,<br>roscado                                                           |  |  |                                                                                |                  |        |
| K2026.3303 | Ø 3.3 mm                        | 32, 42 |                                                                                                                 |  |  |                                                                                |                  |        |
| K2026.3803 | Ø 3.8 mm                        | 32, 42 |                                                                                                                 |  |  |                                                                                |                  |        |
| K2026.4303 | Ø 4.3 mm                        | 32, 42 |                                                                                                                 |  |  |                                                                                |                  |        |
| K2026.5003 | Ø 5.0 mm                        | 32     |                                                                                                                 |  |  |                                                                                |                  |        |

|                                                                       |                                   |        |                                                |                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| Base de titanio CAD/CAM PS CAMLOG®<br>para Platform Switching, corona |                                   |        | Pilares Esthomic®, angulado 20°                |                                   |    |
| K2210.3808                                                            | Ø 3.8 mm                          | 64     | K2232.4310                                     | Ø 4.3 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo B | 63 |
| K2210.4308                                                            | Ø 4.3 mm                          | 64     | K2232.4330                                     | Ø 4.3 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo B | 63 |
| K2210.5008                                                            | Ø 5.0 mm                          | 64     | K2232.5010                                     | Ø 5.0 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo B | 63 |
|                                                                       |                                   |        | K2232.5030                                     | Ø 5.0 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo B | 63 |
|                                                                       |                                   |        | K2232.6010                                     | Ø 6.0 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo B | 63 |
|                                                                       |                                   |        | K2232.6030                                     | Ø 6.0 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo B | 63 |
| Pilar universal                                                       |                                   |        | Pilares Esthomic®, Inset                       |                                   |    |
| K2211.3300                                                            | Ø 3.3 mm                          | 67     | K2235.3315                                     | Ø 3.3 mm, AG 1.5 – 2.8 mm         | 63 |
| K2211.3800                                                            | Ø 3.8 mm                          | 67, 79 | K2235.3815                                     | Ø 3.8 mm, AG 1.5 – 2.8 mm         | 63 |
| K2211.4300                                                            | Ø 4.3 mm                          | 67, 79 | K2235.4315                                     | Ø 4.3 mm, AG 1.5 – 2.8 mm         | 63 |
| K2211.5000                                                            | Ø 5.0 mm                          | 67, 79 | K2235.5015                                     | Ø 5.0 mm, AG 1.5 – 2.8 mm         | 63 |
| K2211.6000                                                            | Ø 6.0 mm                          | 67, 79 | K2235.6015                                     | Ø 6.0 mm, AG 1.5 – 2.8 mm         | 63 |
| Pilares telescópicos para<br>la técnica de corona telescópica         |                                   |        | Pilar provisional, puente, aleación de titanio |                                   |    |
| K2212.3800                                                            | Ø 3.8 mm                          | 79     | K2239.3300                                     | Ø 3.3 mm                          | 62 |
| K2212.4300                                                            | Ø 4.3 mm                          | 79     | K2239.3800                                     | Ø 3.8 mm                          | 62 |
| K2212.5000                                                            | Ø 5.0 mm                          | 79     | K2239.4300                                     | Ø 4.3 mm                          | 62 |
| K2212.6000                                                            | Ø 6.0 mm                          | 79     | K2239.5000                                     | Ø 5.0 mm                          | 62 |
|                                                                       |                                   |        | K2239.6000                                     | Ø 6.0 mm                          | 62 |
| Pilares Esthomic®, recto                                              |                                   |        | Pilar provisional, PEEK                        |                                   |    |
| K2226.3810                                                            | Ø 3.8 mm, AG 1.0 – 1.8 mm         | 62     | K2241.3800                                     | Ø 3.8 mm                          | 62 |
| K2226.3830                                                            | Ø 3.8 mm, AG 3.0 – 4.5 mm         | 62     | K2241.4300                                     | Ø 4.3 mm                          | 62 |
| K2226.4310                                                            | Ø 4.3 mm, AG 1.0 – 1.8 mm         | 62     | K2241.5000                                     | Ø 5.0 mm                          | 62 |
| K2226.4330                                                            | Ø 4.3 mm, AG 3.0 – 4.5 mm         | 62     | K2241.6000                                     | Ø 6.0 mm                          | 62 |
| K2226.5010                                                            | Ø 5.0 mm, AG 1.0 – 1.8 mm         | 62     |                                                |                                   |    |
| K2226.5030                                                            | Ø 5.0 mm, AG 3.0 – 4.5 mm         | 62     | Base de titanio CAD/CAM, corona                |                                   |    |
| K2226.6010                                                            | Ø 6.0 mm, AG 1.0 – 1.8 mm         | 62     | K2244.3348                                     | Ø 3.3 mm                          | 64 |
| K2226.6030                                                            | Ø 6.0 mm, AG 3.0 – 4.5 mm         | 62     | K2244.3848                                     | Ø 3.8 mm                          | 64 |
| Pilares Esthomic®, angulado 15°                                       |                                   |        | K2244.4348                                     | Ø 4.3 mm                          | 64 |
| K2227.3810                                                            | Ø 3.8 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo A | 62     | K2244.5048                                     | Ø 5.0 mm                          | 64 |
| K2227.3830                                                            | Ø 3.8 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo A | 62     | K2244.6048                                     | Ø 6.0 mm                          | 64 |
| K2227.4310                                                            | Ø 4.3 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo A | 62     |                                                |                                   |    |
| K2227.4330                                                            | Ø 4.3 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo A | 62     | Pilar de oro                                   |                                   |    |
| K2227.5010                                                            | Ø 5.0 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo A | 62     | K2246.3300                                     | Ø 3.3 mm                          | 67 |
| K2227.5030                                                            | Ø 5.0 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo A | 62     | K2246.3800                                     | Ø 3.8 mm                          | 67 |
| K2227.6010                                                            | Ø 6.0 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo A | 62     | K2246.4300                                     | Ø 4.3 mm                          | 67 |
| K2227.6030                                                            | Ø 6.0 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo A | 62     | K2246.5000                                     | Ø 5.0 mm                          | 67 |
| K2228.3810                                                            | Ø 3.8 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo B | 63     | K2246.6000                                     | Ø 6.0 mm                          | 67 |
| K2228.3830                                                            | Ø 3.8 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo B | 63     |                                                |                                   |    |
| K2228.4310                                                            | Ø 4.3 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo B | 63     | Pilares de barra, angulado 17°                 |                                   |    |
| K2228.4330                                                            | Ø 4.3 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo B | 63     | K2256.3325                                     | Ø 3.3 mm, AG 2.5, tipo A          | 69 |
| K2228.5010                                                            | Ø 5.0 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo B | 63     | K2256.3340                                     | Ø 3.3 mm, AG 4.0, tipo A          | 69 |
| K2228.5030                                                            | Ø 5.0 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo B | 63     | K2256.3825                                     | Ø 3.8 mm, AG 2.5, tipo A          | 69 |
| K2228.6010                                                            | Ø 6.0 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo B | 63     | K2256.3840                                     | Ø 3.8 mm, AG 4.0, tipo A          | 69 |
| K2228.6030                                                            | Ø 6.0 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo B | 63     | K2256.4325                                     | Ø 4.3 mm, AG 2.5, tipo A          | 69 |
| Pilares Esthomic®, angulado 20°                                       |                                   |        | K2256.4340                                     | Ø 4.3 mm, AG 4.0, tipo A          | 69 |
| K2231.3810                                                            | Ø 3.8 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo A | 63     | K2256.5025                                     | Ø 5.0 mm, AG 2.5, tipo A          | 69 |
| K2231.3830                                                            | Ø 3.8 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo A | 63     | K2256.5040                                     | Ø 5.0 mm, AG 4.0, tipo A          | 69 |
| K2231.4310                                                            | Ø 4.3 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo A | 63     | K2257.3325                                     | Ø 3.3 mm, AG 2.5, tipo B          | 69 |
| K2231.4330                                                            | Ø 4.3 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo A | 63     | K2257.3340                                     | Ø 3.3 mm, AG 4.0, tipo B          | 69 |
| K2231.5010                                                            | Ø 5.0 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo A | 63     | K2257.3825                                     | Ø 3.8 mm, AG 2.5, tipo B          | 69 |
| K2231.5030                                                            | Ø 5.0 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo A | 63     | K2257.3840                                     | Ø 3.8 mm, AG 4.0, tipo B          | 69 |
| K2231.6010                                                            | Ø 6.0 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo A | 63     | K2257.4325                                     | Ø 4.3 mm, AG 2.5, tipo B          | 69 |
| K2231.6030                                                            | Ø 6.0 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo A | 63     | K2257.4340                                     | Ø 4.3 mm, AG 4.0, tipo B          | 69 |
| K2232.3810                                                            | Ø 3.8 mm, AG 1.0 – 1.8 mm, tipo B | 63     | K2257.5025                                     | Ø 5.0 mm, AG 2.5, tipo B          | 69 |
| K2232.3830                                                            | Ø 3.8 mm, AG 3.0 – 4.5 mm, tipo B | 63     | K2257.5040                                     | Ø 5.0 mm, AG 4.0, tipo B          | 69 |

|            |                                                         |    |  |                                                                              |                                    |
|------------|---------------------------------------------------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|            | Pilares de barra, angulado 30°                          |    |  | DIM Analog® para el sistema de implantes CAMLOG®                             |                                    |
| K2258.3325 | Ø 3.3 mm, AG 2.5, tipo A                                | 69 |  | K3012.3300                                                                   | Ø 3.3 mm 61                        |
| K2258.3340 | Ø 3.3 mm, AG 4.0, tipo A                                | 69 |  | K3012.3800                                                                   | Ø 3.8 mm 61                        |
| K2258.3825 | Ø 3.8 mm, AG 2.5, tipo A                                | 69 |  | K3012.4300                                                                   | Ø 4.3 mm 61                        |
| K2258.3840 | Ø 3.8 mm, AG 4.0, tipo A                                | 69 |  | K3012.6000                                                                   | Ø 5.0/6.0 mm 61                    |
| K2258.4325 | Ø 4.3 mm, AG 2.5, tipo A                                | 69 |  |                                                                              |                                    |
| K2258.4340 | Ø 4.3 mm, AG 4.0, tipo A                                | 69 |  | Análogo de implante                                                          |                                    |
| K2258.5035 | Ø 5.0 mm, AG 3.5, tipo A                                | 69 |  | K3025.3300                                                                   | Ø 3.3 mm 61                        |
| K2258.5050 | Ø 5.0 mm, AG 5.0, tipo A                                | 69 |  | K3025.3800                                                                   | Ø 3.8 mm 61                        |
| K2259.3325 | Ø 3.3 mm, AG 2.5, tipo B                                | 69 |  | K3025.4300                                                                   | Ø 4.3 mm 61                        |
| K2259.3340 | Ø 3.3 mm, AG 4.0, tipo B                                | 69 |  | K3025.5000                                                                   | Ø 5.0 mm 61                        |
| K2259.3825 | Ø 3.8 mm, AG 2.5, tipo B                                | 69 |  | K3025.6000                                                                   | Ø 6.0 mm 61                        |
| K2259.3840 | Ø 3.8 mm, AG 4.0, tipo B                                | 69 |  |                                                                              |                                    |
| K2259.4325 | Ø 4.3 mm, AG 2.5, tipo B                                | 69 |  | Soporte para blank para CAM, tipo IAC                                        |                                    |
| K2259.4340 | Ø 4.3 mm, AG 4.0, tipo B                                | 69 |  | K3720.3300                                                                   | Ø 3.3 mm 66                        |
| K2259.5035 | Ø 5.0 mm, AG 3.5, tipo B                                | 69 |  | K3720.3800                                                                   | Ø 3.8 mm 66                        |
| K2259.5050 | Ø 5.0 mm, AG 5.0, tipo B                                | 69 |  | K3720.4300                                                                   | Ø 4.3 mm 66                        |
|            |                                                         |    |  | K3720.6000                                                                   | Ø 5.0/6.0 mm 66                    |
|            | Blank de titanio para CAM                               |    |  |                                                                              |                                    |
| K2411.3313 | Ø 3.3 mm, tipo IAC                                      | 66 |  | Plantilla radiográfica de planificación CAMLOG® SCREW-LINE                   |                                    |
| K2411.3813 | Ø 3.8 mm, tipo IAC                                      | 66 |  | K5300.9010                                                                   | 1.25:1 Implantes 16                |
| K2411.4313 | Ø 4.3 mm, tipo IAC                                      | 66 |  | K5300.9011                                                                   | 1.4:1 Implantes 16                 |
| K2411.6013 | Ø 5.0/6.0 mm, tipo IAC                                  | 66 |  |                                                                              |                                    |
| K2421.3320 | Ø 3.3 mm, tipo ME                                       | 66 |  | CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE                                                     |                                    |
| K2421.3820 | Ø 3.8 mm, tipo ME                                       | 66 |  | K5300.9014                                                                   | 1.25:1 Implantes 16                |
| K2421.4320 | Ø 4.3 mm, tipo ME                                       | 66 |  | K5300.9015                                                                   | 1.4:1 Implantes 16                 |
| K2421.5020 | Ø 5.0 mm, tipo ME                                       | 66 |  |                                                                              |                                    |
| K2421.6020 | Ø 6.0 mm, tipo ME                                       | 66 |  | Plantillas autoadhesiva de planificación 1.25:1 Implantes CAMLOG® SCREW-LINE |                                    |
|            | Pilares Logfit®                                         |    |  | K5300.9080                                                                   | Ø 3.3 mm 16                        |
| K2550.3808 | Ø 3.8 mm, AG 0.8 mm                                     | 68 |  | K5300.9081                                                                   | Ø 3.8 mm 16                        |
| K2550.3815 | Ø 3.8 mm, AG 1.5 mm                                     | 68 |  | K5300.9082                                                                   | Ø 4.3 mm 16                        |
| K2550.4308 | Ø 4.3 mm, AG 0.8 mm                                     | 68 |  | K5300.9083                                                                   | Ø 5.0 mm 16                        |
| K2550.4315 | Ø 4.3 mm, AG 1.5 mm                                     | 68 |  | K5300.9084                                                                   | Ø 6.0 mm 16                        |
| K2550.5008 | Ø 5.0 mm, AG 0.8 mm                                     | 68 |  |                                                                              |                                    |
| K2550.5015 | Ø 5.0 mm, AG 1.5 mm                                     | 68 |  | Adaptador para implantes de tornillo                                         |                                    |
| K2550.6008 | Ø 6.0 mm, AG 0.8 mm                                     | 68 |  | K5302.3310                                                                   | Ø 3.3 mm, largo 48                 |
| K2550.6015 | Ø 6.0 mm, AG 1.5 mm                                     | 68 |  | K5302.3311                                                                   | Ø 3.3 mm, corto 48                 |
|            | Scanbody                                                |    |  | K5302.3810                                                                   | Ø 3.8 mm, largo 48                 |
| K2610.3310 | Ø 3.3 mm                                                | 65 |  | K5302.3811                                                                   | Ø 3.8 mm, corto 48                 |
| K2610.3810 | Ø 3.8 mm                                                | 65 |  | K5302.4310                                                                   | Ø 4.3 mm, largo 48                 |
| K2610.4310 | Ø 4.3 mm                                                | 65 |  | K5302.4311                                                                   | Ø 4.3 mm, corto 48                 |
| K2610.6010 | Ø 5.0/6.0 mm                                            | 65 |  | K5302.6011                                                                   | Ø 5.0/6.0 mm, corto 48             |
|            | ScanPost se emplean junto con los Scanbodies de Sirona® |    |  |                                                                              |                                    |
| K2620.3306 | Ø 3.3 mm                                                | 65 |  | Macromodelo                                                                  |                                    |
| K2620.3806 | Ø 3.8 mm                                                | 65 |  | K8010.1010                                                                   | SCREW-LINE 89                      |
| K2620.4306 | Ø 4.3 mm                                                | 65 |  | K8010.1400                                                                   | PROGRESSIVE-LINE 89                |
| K2620.5006 | Ø 5.0 mm                                                | 65 |  |                                                                              |                                    |
| K2620.6006 | Ø 6.0 mm                                                | 65 |  | K8011.1000                                                                   | Kit de pilares de planificación 85 |
|            | Análogo de laboratorio                                  |    |  |                                                                              |                                    |
| K3010.3300 | Ø 3.3 mm                                                | 61 |  | Modelo de exposición, cristal acrílico                                       |                                    |
| K3010.3800 | Ø 3.8 mm                                                | 61 |  | K8050.1040                                                                   | maxilar inferior 89                |
| K3010.4300 | Ø 4.3 mm                                                | 61 |  | K8070.1020                                                                   | maxilar superior 89                |
| K3010.5000 | Ø 5.0 mm                                                | 61 |  |                                                                              |                                    |
| K3010.6000 | Ø 6.0 mm                                                | 61 |  | M1000.0050                                                                   | Cartucho ALTApin, 1 unidad 56      |
|            |                                                         |    |  | M1000.0100                                                                   | Cartucho ALTApin, 3 unidades 56    |
|            |                                                         |    |  |                                                                              |                                    |
|            |                                                         |    |  | M5100.0010                                                                   | Aplicador ALTApin, recto 54        |
|            |                                                         |    |  | M5100.0030                                                                   | Aplicador ALTApin, angulado 90° 54 |

|            |                                                    |    |
|------------|----------------------------------------------------|----|
| M5100.0050 | Aguja para pretaladrar ALTApin                     | 55 |
| M5100.0070 | Fijador de membrana ALTApin                        | 55 |
| M5100.0100 | Martillo quirúrgico ALTApin                        | 55 |
| M5200.0010 | Aplicador ALTApin, recto,<br>extremo activo        | 54 |
| M5200.0055 | Aguja para pretaladrar ALTApin,<br>pieza insertada | 56 |
| M5500.0050 | Fresa desechable ALTApin, vástago ISO              | 55 |
| M5600.0110 | Set ALTApin                                        | 54 |
| M5600.0210 | Bandeja ALTApin                                    | 54 |



# Documentación adicional

Encontrará documentación adicional sobre los productos CAMLOG® en los documentos siguientes:

- Catálogo CAMLOG®
- Instrucciones de trabajo CAMLOG®
- Manual de instrucciones CAMLOG®
- Instrucciones de preparación
- Camlog literature overview
- Camlog and science

Los documentos están disponibles en la correspondiente representación Camlog del país.

Véase también en:

<https://ifu.camlog.com>  
[www.camlog.com](http://www.camlog.com)

## Referencia

- [1] Conserva E. Initial stability after placement of a new buttress threaded implant. A case series study. implants. 2019(3): 24-28.
- [2] Rupp J. One-year clinical experience with Progressive-Line implants. EDI journal. 2020(4): 54-63.
- [3] Semper-Hogg W, Kraft S, Stiller S, Mehrhof J, Nelson K. Analytical and experimental position stability of the abutment in different dental implant systems with a conical implant-abutment connection. Clin Oral Investig 2010;17(3): 1017-23.
- [4] Semper Hogg W, Zulauf K, Mehrhof J, Nelson K. The influence of torque tightening on the position stability of the abutment in conical implant-abutment connections. Int J Prosthodont 2015;28: 538-41.

## Nombres de marca y copyright

Los nombres comerciales protegidos (marcas registradas) no siempre se indican específicamente. Por lo tanto, la ausencia de esta indicación NO significa que no se trate de una marca registrada. El documento, incluidas todas sus partes, está protegido por los derechos de autor. Usted puede descargar el contenido para el uso previsto, pero está prohibido modificarlo o reproducirlo. No está permitido, y puede constituir un delito punible por la vía penal, cualquier uso que se encuentre fuera de los límites de la ley de derechos de autor sin la autorización previa por escrito de CAMLOG Biotechnologies GmbH.





CE0123

Referencia J8001.0006 Rev. 09 07/2021



+E219J800100061G



+\$0090113105GU

#### **Subsidiaria España y Portugal**

BioHorizons Camlog Ibérica | C/ Oruro, 9 – 1º | 28016 Madrid | España

Telefono +34 91 713 10 84 | Fax +34 913 558 375 | [www.biohorizons.com](http://www.biohorizons.com) | [www.camlog.com](http://www.camlog.com)

#### **Headquarters**

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Suiza

Telefono +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | [info@camlog.com](mailto:info@camlog.com) | [www.camlog.com](http://www.camlog.com)

Fabricante de los productos CAMLOG® y CONELOG®: ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Alemania

